

Re Born リボン

手のひらサイズでどこでも簡単シャープニング

インスツルメントを生まれ変わらせる、シャープナー“Re Born(リボン)”

YDM から皆様へ、ステキなプレゼントとなるようお願いを込めました





Re Born^{リボン}

快適なSRPIには、キュレットの“切れ味”が重要です。
切れ味が鈍ったキュレットでは効率よく歯石をとることが難しいだけでなく、患者さんの
歯周組織へのダメージが大きくなってしまいます。
患者さんのためにも、術者のためにも…だれでも簡単にシャープな刃をとり戻せる
シャープナー“*Re Born*”が誕生。
あなたの大切なインスツルメントのそばに…

衛生的な小型シャープナー

診療中でも使えるよう、キュレットが当たる
砥石や台はオートクレーブ滅菌対応。
また、ブラケットテーブルに置いても
邪魔にならないコンパクトサイズ。



Re Born リボン 製品説明

手のひらサイズでどこでも簡単シャープニング

コードNo.101110
標準価格¥48,000

本体底部

本体の底部には円盤が付いており、サイドエッジからトゥ(先端)までを連続的にシャープニングすることが可能です。キュレット本来の丸い先端形状を、長期間保つことができます。



砥石

70度に設定された砥石が上下に動きまゝす。2種類の異なる砥石をご用意し、使用環境にあわせて砥石を選べるようになっています。

セラミック砥石




細目～中目。毎日のメインテナンスに適しています。

ダイヤモンド砥石



粗目。切れ味が著しく鈍ったインスツルメントに。

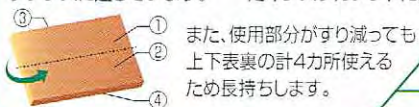

台

インスツルメント背面を置いて安定保持させるための台。レストを置いてさらに安定させることができるよう、幅広の設計にしました。

ボディ

手になじみやすい流線型。パソコンの“マウス”を連想させる、扱いやすいデザインに仕上げました。また、可能な限りコンパクトにしたため、使用場所や保管場所に困りません。

<製品仕様>

砥石：セラミック砥石・ダイヤモンド砥石
オイル・水(潤滑剤)不要
オートクレーブ滅菌可能
上下表裏(計4カ所)使用可能


本体：プラスチック製
底部に円盤付
電池式(単三形アルカリ乾電池使用)

セット内容：本体 1 入
セラミック砥石
(納品時は本体に装着してあります) 1 入
ダイヤモンド砥石 1 入
シャープニングテスター 1 入
インスツルメントキャップ 1 入
単三形アルカリ乾電池 2 入

単品：Re Born 用 セラミック砥石
コードNo.101111 標準価格¥3,300
Re Born 用 ダイヤモンド砥石
コードNo.101112 標準価格¥3,300

<使用可能な主なインスツルメント>

グレイシーキュレット・ユニバーサルキュレット
シクルスケーラー・エキスカベーター
※インスツルメントのデザインによっては
ご使用いただけない製品もございます。

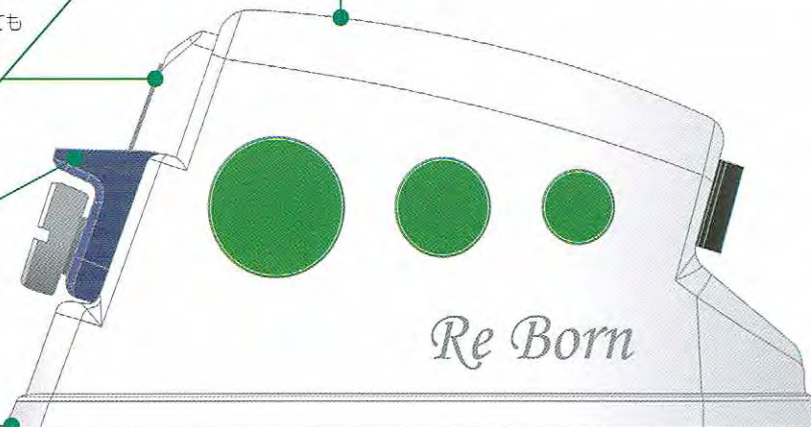

3つのポイント

three points

Point 1 砥石を Re Born に持ち替えるだけ

学校で習うシャープニング方法を元にした設計。砥石の角度が70度に設定されているため、手砥ぎのイメージで簡単に使いこなせます。


Point 2 どこでも手軽に

キュレットを持つ手をフリーハンドにし、面倒なセッティングや調整を不要にしました。スケーリング中や空いた時間、どこでも手軽に使えます。


Point 3 安定した仕上がり

一定の角度で動かすことが難しい砥石の「動き」と「角度」を機械化することで、「キュレットの刃の内面を床と平行にすること」に集中でき、安定したシャープなエッジに仕上がります。


< 使用方法 >

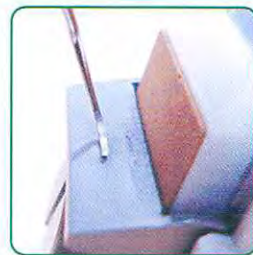


①キュレットの刃の内面が台と平行になるように置きます。

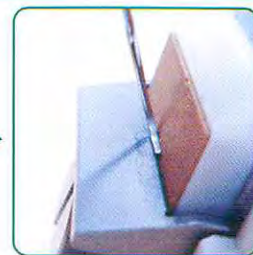

②キュレットを台の上でスライドさせ、砥石面にサイドブレードを当てます。

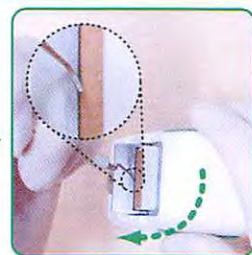

③トゥ（先端）は Re Born を回転させて砥ぎます。

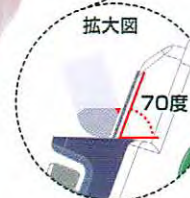

Re Born リボン

手のひらサイズでどこでも簡単シャープニング
インストゥルメントを生まれ変わらせる、シャープナー「Re Born(リボン)」
YDM から皆様へ、ステキなプレゼントとなるようお願いを込めました

※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2010年7月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。



製造元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28

問合先 本社 営業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>