

ruscello®

the dental flosser on P4 concept

./'GC./

flosser

ハンドル付デンタルフロス
ルシェロ フロッサー

マルチアングルフロスヘッドと
ロングハンドルで、フロッシングが快適に。
歯ブラシ感覚で手軽に使える、
ルシェロ フロッサー新登場。



フロスヘッドを使いやすいアングルに合わせられる
マルチアングルフロスヘッド

使いやすいアングルに合わせられる

マルチアングルフロスヘッドで、簡単フロッシング

フロスヘッドは、360°回転し、30°ごとに角度を変えられるマルチアングル設計。使いやすいアングルに合わせることができるので、より簡単、スムーズなフロッシングが可能です。



フロッシングが難しいとされる臼歯部もフロスヘッドを横方向にし、手を汚さず片手で簡単にフロッシングすることができます。



フロスヘッドを柄と平行(縦方向)にすることで、フロッシング操作がよりシンプルで簡単に。初心者の方には、まず前歯部で試していただくとスムーズです。



犬歯～小白歯、歯列不正部位にはフロスヘッドを斜めに調整してフロッシングすることもできます。

フロスヘッドの着脱方法

フロスヘッドの付け方



スライドロックが下りていることを確認してください。



フロスヘッドを縦向きにカチッと音がするまで押し込みます。



スライドロックを止まるまで押し上げてフロスヘッドを確実に固定します。



ロックしたままヘッドの角度を自由に変えられます。

確実にフロスヘッドのロックを行ってからご使用ください



フロスヘッドの外し方



フロスヘッドを縦向きにします。




スライドロックを下ろします。



ハンドル後ろの突起を押し、フロスヘッドを下方方向に倒しながら抜きます。

どのような持ち方でも手になじむラバーグリップ

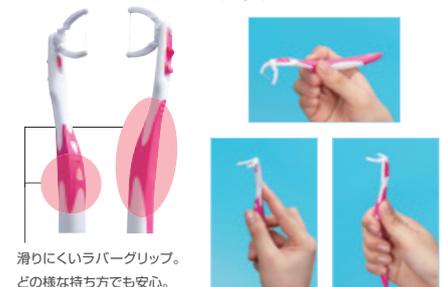

滑りにくいラバーグリップ。どの様な持ち方でも安心。

いつも清潔&エコな 交換できるフロスヘッド

フロスヘッドのみ交換できるディスプレイタイプで、いつも清潔&エコ。30個1函(約1ヶ月分)の付け替え用フロスヘッドもご用意しています。



最後臼歯遠心まで届きやすい ロングハンドル

歯ブラシとほぼ同じ長さのロングハンドルのため、磨き残しによるう蝕や歯周病のリスクが高い最後臼歯遠心へのアプローチも容易です。



コンタクトに合わせて選べる 2種類のフロス

240本もの繊維を束ねたフロスを採用。M(ふつう)とS(ほそめ)の2種類の太さをご用意しています。



効率的なプラーク除去を可能にする フロスヘッドの適度なたわみ

フロスヘッドの適度なたわみにより、歯間部にフロスがしっかりフィットするので、効率的なプラーク除去ができます。



このような方にオススメ!

・お子さんのケアの
仕上げに!



・お子さんのセルフケアに!



・フロッシング習慣が
なかなか定着しない方へ



臨床例



小児例(Ⅶ,Ⅵ)
う蝕リスクの高いⅦ,Ⅵの清掃




大人症例(最後臼歯遠心)
う蝕や歯周病リスクの高い最後臼歯
遠心の清掃



叢生部
フロッシングしにくい叢生部の清掃


フロス未使用者も「ルシェロ フロッサー」なら
2人に1人の方が継続して使ってみたいと言っています!

年齢階級別 デンタルフロス使用状況 デンタルフロス使用率: 15%

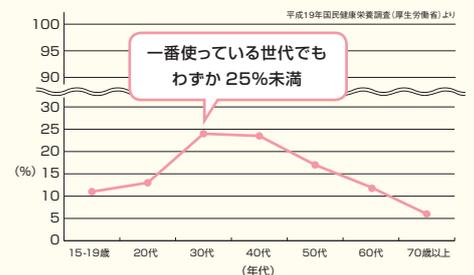


普段フロスを使用していない方に聞きました

フロスを使っていない理由は?

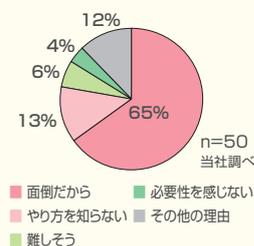

ルシェロ フロッサーを継続して
使ってみたいですか?

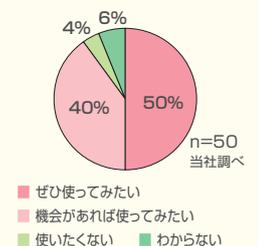

手軽で簡単!だからおすすめ! ルシェロ フロッサー

ルシェロ フロッサーとルシェロ フロスの処方の目安

	ルシェロ フロッサー	ルシェロ フロス (指巻きフロス)
こんな方にオススメ	<ul style="list-style-type: none"> ・フロッシングが初めての方に ・ルシェロ フロス(指巻きフロス)を上手く使用できない方に ・お子さんの仕上げ磨きをされている方に ・お子さんのセルフケアに ・短時間で手軽にフロッシングしたい方に 	<ul style="list-style-type: none"> ・指巻きのフロッシングができる方に ・歯面の感触を指で確認しながら操作したい方に ・より高いプラーク除去効果を求める方に ・低コストでケアしたい方に
プラーク除去力	○	◎
隅角部の清掃のしやすさ	○	◎
最後臼歯遠心面の清掃のしやすさ	◎	△
経済性	○	◎

フロッシングが初めての方でも簡単！ 歯ブラシ感覚で手軽に使えるハンドル付デンタルフロス



ルシェロ フロッサー

【内容】ハンドル(ピンク/グリーン) 1本
フロスヘッド 7個
(フロス太さ: M ホワイト/S イエロー)

【材質】フロス: 高強度 PE
フロスヘッド: PP
ハンドル: PP、TPR(熱可塑性ゴム)

【耐熱温度】80℃

【包装】ピンクM、ピンクS、グリーンM、グリーンS
各1函: 6セット入

【希望患者価格】1セット=¥500(税込)



ルシェロ フロッサー アソートセット

【包装】1函: 6セット入
(ピンクM 2セット、グリーンM 2セット、
ピンクS 1セット、グリーンS 1セット)

いつも清潔&エコ。 毎日使っても1ヶ月使用できる付け替え用フロスヘッド



ルシェロ フロッサー フロスヘッド

【内容】フロスヘッド 30個(10個×3)
(フロス太さ: M ホワイト/S イエロー)

【材質】フロス: 高強度 PE フロスヘッド: PP
【耐熱温度】80℃
【包装】1函 30個×12函入
【希望患者価格】1函=¥500(税込)

プロフェッショナルケアに最適なアンワックスタイプのフロス

ルシェロ フロス アンワックス



ルシェロ フロス アンワックス

【内容量】30m
【ケース色】ホワイト1色
【包装】1函: 6個入
【希望患者価格】1個=¥310(税込)

患者さんのセルフケアに最適なワックスタイプをご用意

歯間への入れやすさと耐久性を実現。ミントのさわやかなフレーバー付きです。

ルシェロ フロス ミントワックス



ルシェロ フロス ミントワックス

【内容量】30m
【ケース色】4色: ピンク、グリーン、イエロー、パープル
【包装】各色1函: 6個入
【希望患者価格】1個=¥310(税込)

ルシェロ フロス アソートセット

【包装】1函: 6個入(アンワックス2個、ミントワックス4色各1個)

ご使用に際しては、必ず製品に記載されております使用方法をお読みください。

●「ハンドル交換について」

新品のフロスヘッドを付けてもヘッドにぐらつきが見られたり、ロックに緩みが見られる際にはハンドルを新しいものに交換してください。
必要以上にヘッドを回転させると固定が弱まる場合がありますのでご注意ください。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の実験データは、2011年3月現在のものです。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なる場合があります。

情報満載の製品ホームページもご覧ください。

<http://www.gcdental.co.jp/ruscello/>

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷 3-2-14

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286