

目指したのは、ヘッドの向きを変えることで、
患者さんの使いやすさを提案できる歯間ブラシ。

ruscello

the interdental brush on P4 concept

Interdental Brush

ルシェロ 歯間ブラシ ●●●●●●●●



Point. 1

患者さんとの コミュニケーションで 選べる2つのアングル

指導のなかで使いやすさを実感してもらいヘッドの向きを選択



口腔内の状態や患者さんの器用さ、使い慣れなどを見極めながら指導


患者さんにとって、どちらのアングルが効果的で
使用しやすいかを指導しながら提案できる歯間ブラシです。
この患者さんはアウトターアングル？ インナーアングル？




どれが使いやすいかな？



1つのアングルで
使用する場合

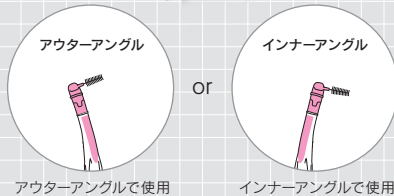

2つのアングルを
使用する場合

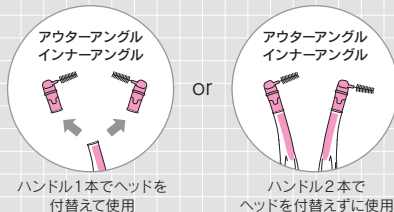

このヘッドの向きを「**アウトターアングル**」と呼びます

おすすめの方


- 従来のアングルタイプに慣れている方

このヘッドの向きを「**インナーアングル**」と呼びます


おすすめの方

- 従来のアングルタイプが苦手な方
- ストレートタイプに慣れているが、臼歯部の清掃が苦手な方
- 初めて歯間ブラシを使用される方

インナーアングルのひみつ

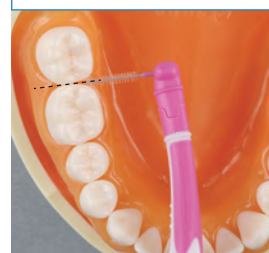

舌側からの挿入は口腔内に入れてただ
だけで歯間に入れやすい角度に設計。

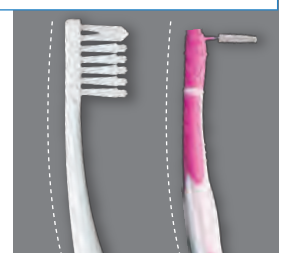

ネック部がルシェロ歯間ブラシと同様のカーブのため、歯列に沿って臼歯部へアプローチしやすい設計。

リスクの高い臼歯部への使いやすさを追求した歯間ブラシ

Point. 2

臼歯部に使いやすい ロングハンドル& ロングネック

臼歯部にも容易に届く
ロングハンドル&ロングネック



臼歯部に使用した時も口腔内に指が入りにくい設計。

ハンドル部にラバーを採用。またラバー部分を30mmにすることで男性でも女性でもしっかり保持できます。

成人の手の大きさを考慮して設計した、安定感のある握りやすいロングハンドル




グリップエンドが手にのせられるので、安定して動かせます。

高強度ワイヤー& ルートコーティングで 耐久性アップ


Point. 3

高強度のワイヤーを採用し、耐久性が従来比25%アップ

■ワイヤー折曲耐久性試験 (0.3mmワイヤー)

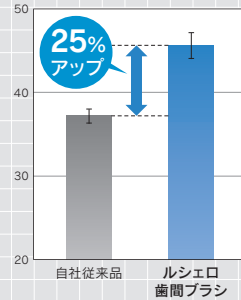

ルートコーティング樹脂がワイヤーの動きに合わせて柔軟にサポート。

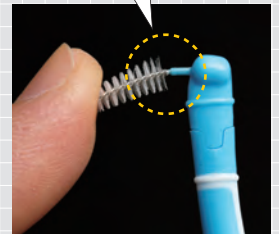

(ほぼ原寸大)
写真はSSS

替ブラシ交換が簡単な着脱ケース

着脱ケース



ヘッドの外し方



替ブラシ部分の空いているスペースに上からセットし、ふたを閉め、ハンドルを引き抜きます。


ヘッドの付け方



押しながら
カチッ

ハンドルの向きを確認し、ケースをしっかり押さえながら、**カチッ**と鳴るまでハンドルを差し込みます。

白いラインが隠れるまで確実に!

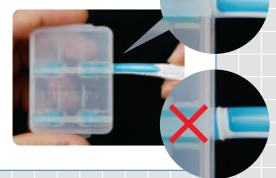

ルシェロ 歯間ブラシ (ハンドル付)

- 【包装・価格】
- ハンドル.....1本
 - 替ブラシ.....4個 (1個は、ハンドルにセット済)
 - キャップ.....1個
 - 着脱ケース.....1個
- 種類●7種(4S,SSS,SS,S,M,L,LL)
希望患者価格●1袋=¥500(税込)



ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ (4個入)

- 【包装・価格】
- 替ブラシ.....4個
 - キャップ.....1個
 - 着脱ケース.....1個
- 種類●7種(4S,SSS,SS,S,M,L,LL)
希望患者価格●1袋=¥260(税込)



近日発売予定!

『パリオブラシ』

前歯歯間部、審美補綴物周囲、歯周ポケットなどに。



特許出願中

※掲載の価格とジーシー研究所測定の見積データは、2013年2月現在のものです。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※ルシェロ歯間ブラシの院内指導用は近日発売を予定しています。

ご使用に際しましては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3-2-14

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286