

JMS

人と医療のあいだに…

JMS

舌トレーニング用具

ペコぱんだ



※原寸大です。

いつまでもおいしく、楽しく、
安全な食生活を送るために。

Orarize

Orarize

(オーラライズ)は株式会社ジェイ・エム・エスが患者様の「口腔機能向上」を願って、「Oral(口腔)」と「Rise(向上)」を合わせて作成した造語で、口腔機能向上関連製品に使用する登録商標です。

舌の運動機能は摂食・嚥下機能と深く関係しており、安全に食事をする上で重要な機能です。

舌トレーニング用具

ペコぱんだ は、舌の筋力を強化するために開発された自主訓練用トレーニング用具です。

食事中によくむせたり食べ物のがのどにつかえる感じがするなどの症状はありますか？




スムーズに食べ物を飲み込めるよう嚥下機能向上のため舌の筋力を強化しましょう。




構成



使用方法

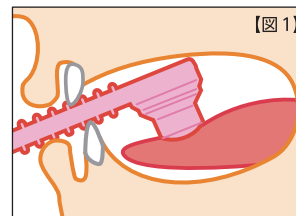


①ペコぱんだの持ち手部を持ち、トレーニング部を【図1】の向きになるように舌の方に向けて口の中に入れ、位置決め部を歯でくわえます。

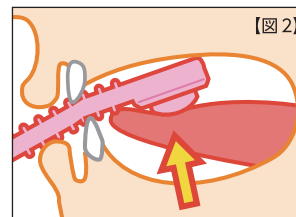

②トレーニング部を【図2】のように舌でしっかりととらえながら、舌を押し上げ押しつぶします。

硬さの選び方

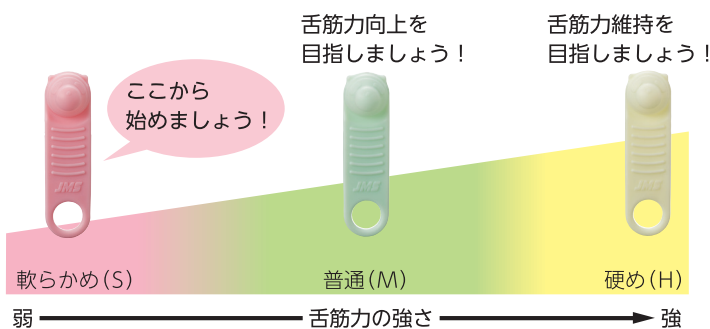

ペコぱんだ
【包装・価格】
種類●3種



S (ピンク)、M (グリーン)、H (イエロー)

硬度は3種類あり、患者さんの状態に合わせて選択可能。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

●使用方法については、「取扱説明書」に従ってください。●外観・仕様は予告なしに変更することがあります。



販売元
株式会社ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号

<http://www.jms.cc>

販売代理店

株式会社 ジーシー 東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m~5:00p.m.

(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286