


「歯肉と歯の間」のプラークを取り除こう！

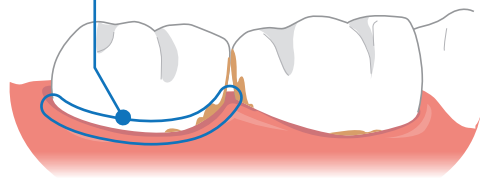

※プラークとは…
食べものに含まれる糖などを栄養源に繁殖した細菌のかたまりで、むし歯や歯周病の一番の原因です。

そのままにしておくと、むし歯や歯周病の原因に！

歯間ブラシ、デンタルフロス、フロッサーだけでは、「歯肉と歯の間」のプラークまでは取り除くことがむずかしい…

そこで「歯肉と歯の間」のプラークを取り除くために開発された

「ルシェロ ペリオブラシ」で
しっかりプラークを取り除きましょう。

『ルシェロ ペリオブラシ』の特徴

歯ブラシでは届きにくく
プラークがたまりやすいところへ
ペリオブラシならしっかり届く！

歯周ポケット等へ挿入しやすく、
歯肉にもやさしいテーパー毛

ブラシの色はプラークを
確認しやすいブルー

狭い部位にも挿入しやすい
毛の長さ：約8.5mm
タフト径：約2.4mm

歯列に沿って奥歯へ
アプローチしやすい
カーブネック

指が滑らない
ラバーグリップ

このヘッドの向きを
「アウターアングル」
と呼びます。

使いやすい
向きに変えられる！


このヘッドの向きを
「インナーアングル」
と呼びます。

アウターアングル

インナーアングル

2way

(イメージ)

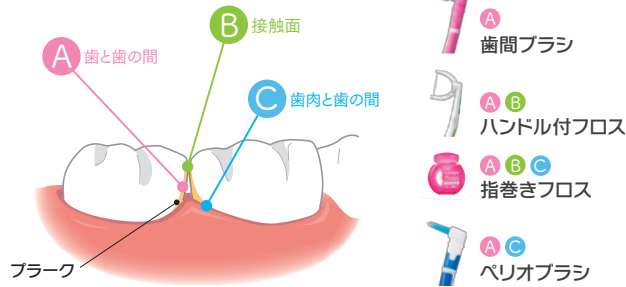

上

左

右

下



歯間清掃用具は、歯ブラシの補助的用具なので患者さんごとに種類や最適なサイズなどが違います。歯科医師・歯科衛生士の指導のもと適切に選んでもらい自分に合ったものを正しく使いましょう！

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

※掲載の情報は、2014年4月現在のものです。

ruscello

ruscello®

the perio brush on P4 concept

ルシェロ ペリオブラシ (ハンドル付) NO.1T

歯周病のリスクが高い
部位を集中ケア！

(イメージ)

発売元

株式会社 ジーシー

お客様窓口 ☎0120-179418

東京都文京区本郷3-2-14

受付時間 9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

PA097E1404

歯周病になりやすい部位のプラークを「ペリオブラシ」で取り除きましょう！

歯肉と歯の間

歯肉と歯の間のプラークは見えていないところも取り残しやすい...

実際には目に見えないところにプラークがこんなに溜まっている！

かぶせ物・ブリッジ

ブリッジと歯肉のすき間はプラークがたまりやすい...

歯と歯の間

歯と歯の間にある小さなすき間へ歯間ブラシを無理に入れると歯肉を傷めてしまう...

たまったプラークを取り除く！

インプラントの境目にも！

すき間にたまったプラークをしっかりとる！

歯肉にやさしくしっかり入る！



ペリオブラシ ルシェロ ペリオブラシ（ハンドル付）NO.1T



【包装】

ハンドル	1本
替ブラシ	2個
(1個は、ハンドルにセット済み)	
キャップ	1個
着脱ケース	1個

ルシェロ ペリオブラシ 替ブラシ NO.1T (4個入)




【包装】

替ブラシ	4個
キャップ	1個
着脱ケース	1個

※替ブラシは、「ルシェロ歯間ブラシ」のハンドルでも使用できます。

ヘッドは歯間ブラシと付け替えができます。

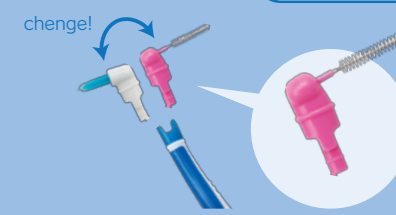

ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ (4個入)

【包装】

替ブラシ	4個
キャップ	1個
着脱ケース	1個

種類●7サイズ(4S,SSS,SS,S,M,L,LL)

磨き方のポイントと注意

●ブラシの挿入の仕方



歯肉と歯の間

歯に沿うように歯肉と歯のすき間にゆっくり挿入します。



ブリッジ

ブリッジのかたちに沿うようにゆっくり挿入します。



歯と歯の間

歯のかたちに滑り込ませます。

●ブラシの動かし方



サラッ


毛先が少し曲がる程度に動かさないでください。(適正圧:20~25g)



ゴシゴシ

強く擦るように動かさないでください。(適正圧:20~25g)

●ブラシの交換の目安

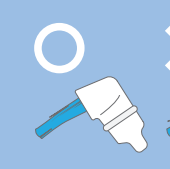


繰り返しの使用で毛先が痛んできた場合は交換してください。



繰り返しの使用で毛先が痛んできた場合は交換してください。

ご使用前に、歯科医師・歯科衛生士より、使い方（適した部位、挿入の仕方、動かし方、力の入れ方等）の指導を受けて正しくお使いください。

着脱ケースで簡単に替ブラシを交換！

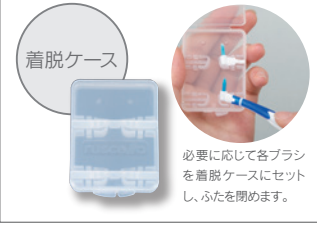

●ヘッドの付け方



PUSH

ハンドルの向きを確認し、ケースをしっかりと押さえながら、**カチツ**と鳴るまでハンドルを差し込みます。



白いライン(凸部)が隠れるまで確実に！



PULL

●ヘッドの外し方



替ブラシ部分の空いているスペースに上からセットし、ふたを開け、ハンドルを引き抜きます。

「ペリオブラシ」でのブラッシングに最適な薬用ジェル！

薬用ジェル 医薬部外品 <薬用ハミガキ> ルシェロ ポイントケアジェル

【販売名】ジーシー薬用ポイントケアジェル
フレーバー●ハーブミント
内容量●30g
包装●1本



歯頸部・歯肉ポケットの細菌を殺菌・歯肉炎の予防

塩化セチルピジニウム (CPC)

ペリオブラシ + ポイントケアジェルでさらに効果的にケア！

歯肉ポケットや露出した象牙質の知覚過敏症状を防止

乳酸 アルミニウム

歯周炎の予防

β-グリチルレチン酸

歯石沈着の防止

ポリリン酸 ナトリウム

エナメル質や歯肉のむし歯の発生と進行を予防

フッ化ナトリウム (950ppm)

垂れない程度の量でご利用ください