

ruscello®

ルシェロ 歯ブラシ・歯みがきペースト総合カタログ



./'CC./



Since 1921
100 years of Quality in Dental



誰でも簡単に効率よく磨ける歯ブラシ

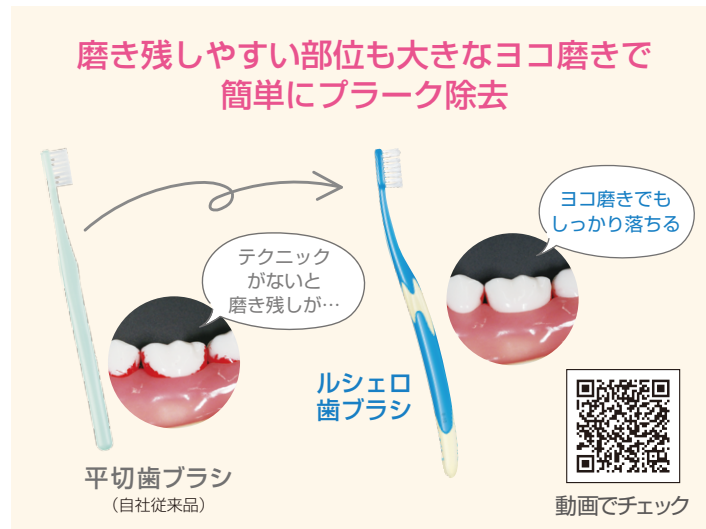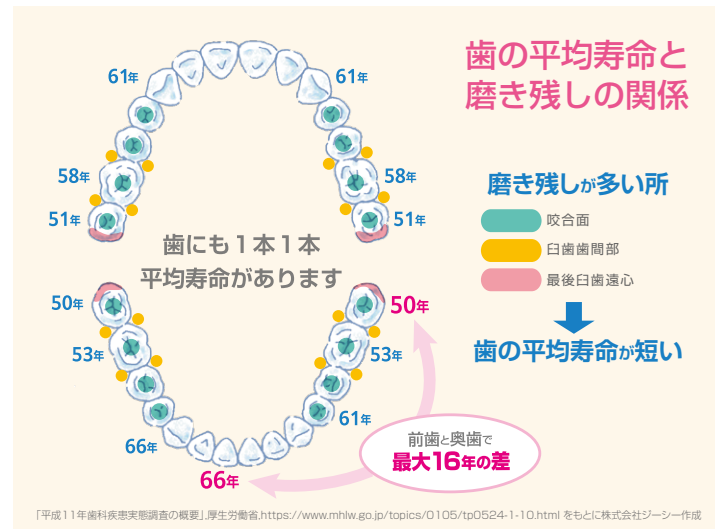


患者さんそれぞれに合ったものを「処方」できる

口腔内の状態に合わせて



生活背景やテクニックに合わせて

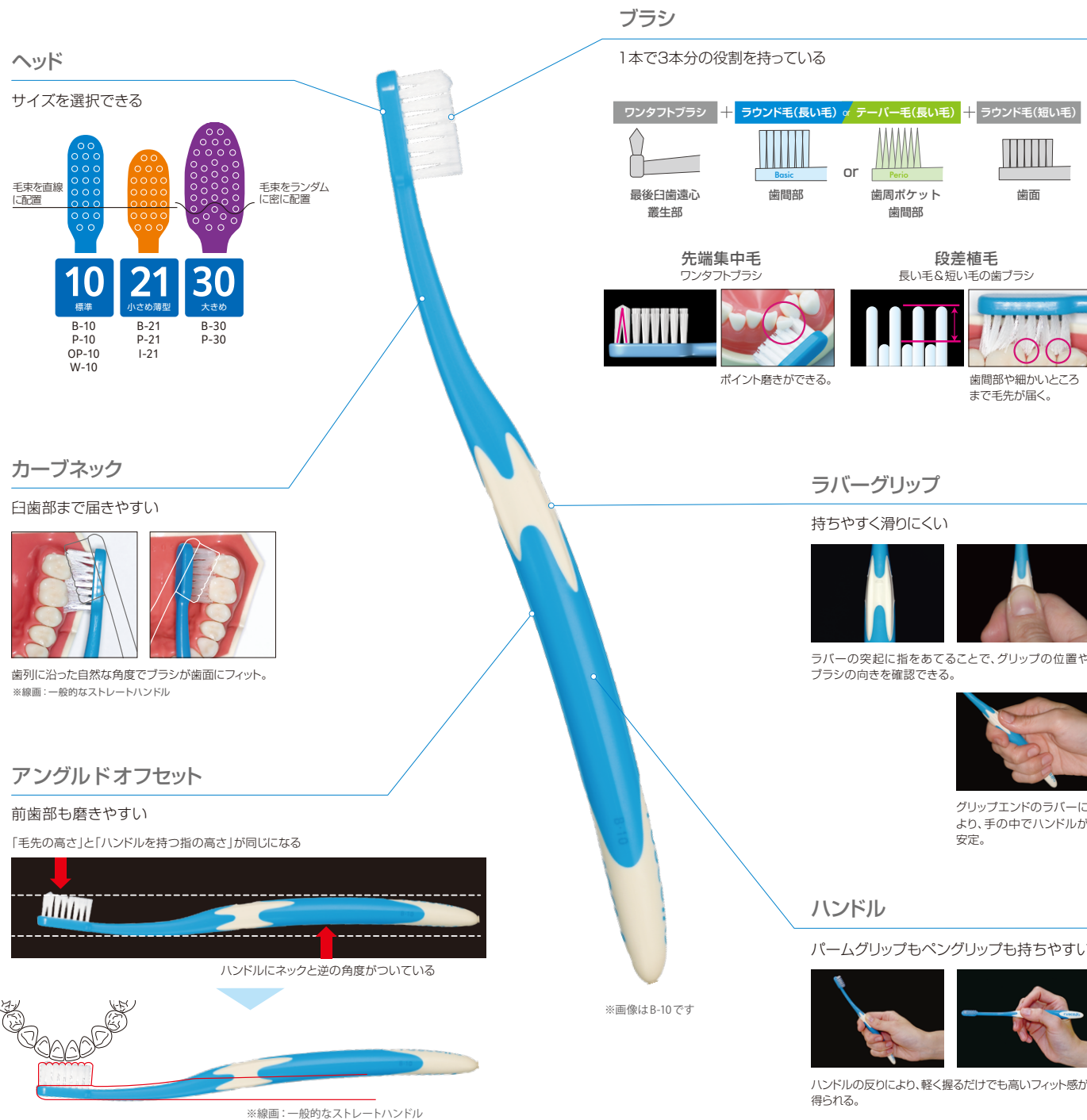



●B-10 M/S

磨き残しの多い『最後臼歯遠心』や『歯間部』が効率よく磨ける、
う蝕予防用歯ブラシ

- う蝕を予防したい方、健康な歯肉～歯肉炎の方



最後臼歯までスムーズに届く。



叢生部のポイント磨きができる。

毛の硬さ●2種=M(ふつう)、S(やわらかめ)
色調●ラバー1種=オフホワイト
ハンドル5種=ブルー●、グリーン●、イエロー●、
ピンク●、ブラック●
包装・希望患者価格●1本=¥390(税込)
5本セット=¥1,950(税込)

ruscello



●B-21 M/S

4列植毛で安定して磨ける、
10代から大人まで幅広く使える薄型コンパクト歯ブラシ

- う蝕を予防したい方、混合歯列期の方、健康な歯肉～歯肉炎の方
- 最後臼歯遠心までしっかりアプローチしたい方



ポイント磨きができる。



ブラシを咬合面と頬側面にかぶせるように当てることで安定して磨ける。



自社従来品



B-21

61が舌側傾斜している影響で最後臼歯へのアプローチが難しい。

B-21を使うことで遠心までブラシを当てることができた。

毛の硬さ●2種=M(ふつう)、S(やわらかめ)
色調●ラバー5種=ブルー●、グリーン●、オレンジ●、
ピンク●、ネイビー●
ハンドル1種=ホワイト
包装・希望患者価格●1本=¥340(税込)
5本セット=¥1,700(税込)

※B-20 M/Sも同様の仕様(ヘッドの厚みのみ異なります)
・価格です。


picella!



●P-10 M/S

細かい部分へ毛先が届く、歯周病対策用歯ブラシ

- M 歯周病を予防したい方、健康な歯肉～軽度歯周炎の方、メンテナンス期の方
- S 歯肉が腫れて痛みや出血がある方、中等度～重度歯周炎の方

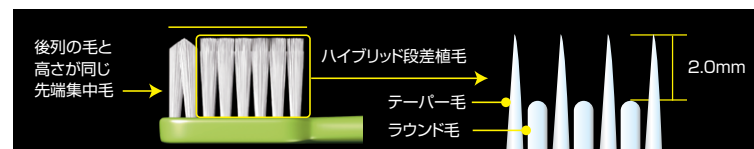

中等度歯周炎で、ブラッシング時に痛みと出血がある。



P-10Sを処方。炎症がひどく、出血や痛みが強いケースでもやさしく磨ける。

毛の硬さ●2種=M(ふつう)、S(やわらかめ)
色調●ラバー1種=ネイビー
ハンドル5種=ブルー●、グリーン●、イエロー●、
ピンク●、ホワイト○
包装・希望患者価格●1本=¥390(税込)
5本セット=¥1,950(税込)


ruscello



●P-21 M/S

4列植毛で安定して磨ける、歯周病対策用薄型コンパクト歯ブラシ

- M 歯周病を予防したい方、健康な歯肉～軽度歯周炎の方、メンテナンス期の方
- S 歯肉が腫れて痛みや出血がある方、中等度～重度歯周炎の方
- M S 最後臼歯遠心までしっかりアプローチしたい方

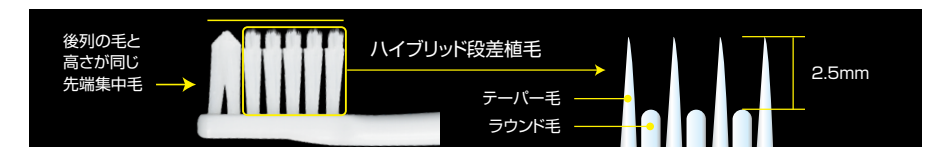

歯間部まで毛先が届く。



頬側転位している最後臼歯にブラシが届いていなかった。



P-21Mを処方。



1か月後にはきれいにプラークを落とせるようになった。

毛の硬さ●2種=M(ふつう)、S(やわらかめ)
色調●ラバー5種=パープル●、ピンク●、グリーン●、
イエロー●、ブルー●
ハンドル1種=ホワイト
包装・希望患者価格●1本=¥340(税込)
5本セット=¥1,700(税込)

※P-20 M/Sも同様の仕様(ヘッドの厚みのみ異なります)
・価格です。

picella!



ルシェロ 歯ブラシキャップ

種類●2種=歯ブラシキャップ(B-10、W-10共用)
歯ブラシキャップL(B-10、P-10、OP-10、W-10共用)
色調●5種=ブルー●、グリーン●、イエロー●、ピンク●、ブラック●
包装・希望患者価格●1個=¥70(税込)




●OP-10

歯肉への刺激を抑える超極細毛の歯ブラシ

- 外科処置後の方、重度歯周炎の方

毛の硬さ●1種=やわらかめ
色調●1種=ホワイト
包装・希望患者価格●1本=¥390(税込)

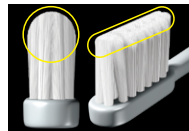

ドーム型にカットされた毛先で、痛みの強い箇所も傷つけにくくなっています。



フラップオペ1週間後、歯肉の状態を確認しOP-10を処方。



洗口剤を含ませ、そっと当てるようにブラッシングすることで痛みなく磨ける。

rusce//o



●W-10




ステイン除去性に優れた美白のための歯ブラシ

- ルシェロ歯みがきペースト ホワイトシリーズをご使用の方、ステインが気になる方、タバコのやにが沈着している方、白さを持続したい方

毛の硬さ●1種=やわらかめ
色調●ラバー1種=ホワイト
ハンドル2種=パールゴールド●
パールホワイト●
包装・希望患者価格●1本=¥450(税込)



※写真は製品の効果を保証するものではありません。

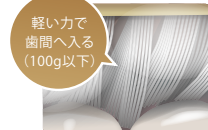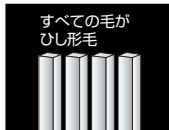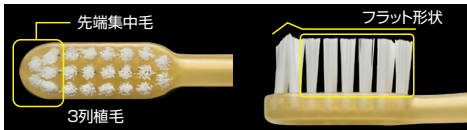

ひし形毛の毛先とエッジ部が、歯面・歯間に付着したステインを効率的に除去。

white
rusce//o



●I-21インプラント

インプラント特有の構造にも対応した
インプラントのセルフケア用薄型コンパクト歯ブラシ

- インプラント周囲粘膜炎を予防したい方、インプラント周囲炎の進行を抑制したい方

毛の硬さ●1種=やわらかめ
色調●ラバー1種=ホワイト
ハンドル2種=レッド●、ブルー●
包装・希望患者価格●
1本=¥390(税込)
5本セット=¥1,950(税込)



I-21インプラント部の歯頸部と歯間部に磨き残しがみられる。






I-21を処方。歯頸部や歯間部まで毛先が入り込んでいる。



I-21のみできれいにプラークを落とすことができた。

※I-20も同様の仕様(ヘッドの厚みのみ異なります)・価格です。

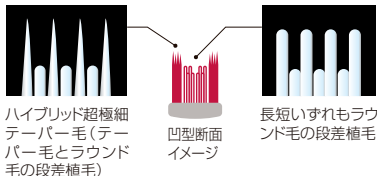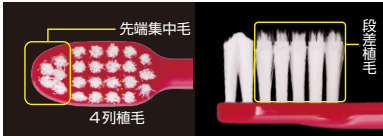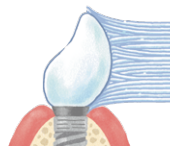

ハイブリッド超極細テーパー毛(テーパー毛とラウンド毛の段差植毛)
長短いずれもラウンド毛の段差植毛

IMPLANT



●B-30 グラッポ

短時間で・効率よく・おおまかに歯面全体のプラークを落とす、
患者さんの背景をサポートするう蝕予防用歯ブラシ

- う蝕を予防したい方、健康な歯肉～歯肉炎の方



B-10Mを処方したが、全体的にプラークが付着し、PCRは常に70%前後。




B-30を処方。




基本的には患者さん自身に自由に磨いてもらったが、幅広ヘッドで接触面積も広いため、全体的にある程度磨けるようになった。

毛の硬さ●1種=やわらかめ
色調●ラバー5種=クリアレッド●、クリアパープル●、
クリアグリーン●、クリアイエロー●、
クリアブルー●
ハンドル1種=ホワイト
包装・希望患者価格●1本=¥390(税込)
5本セット=¥1,950(税込)

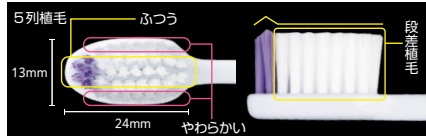

上下の歯を同時に磨けるようにヘッドの幅を広く設計。

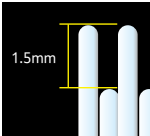

長短いずれもラウンド毛の段差植毛



●P-30 グラッポ

短時間で・効率よく・おおまかに歯面全体のプラークを落とす、
患者さんの背景をサポートする歯周病対策用歯ブラシ

- 歯周病を予防したい方、メンテナンス期の方



中等度～重度歯周炎。歯肉は線維性で厚みがあり、ブラッシングは熱心だが、上手く狙って磨けないので歯頸部に磨き残が多い。




P-30を処方。




幅広ヘッドで、咬合面と舌側面をかぶせて磨くことで安定して磨けるようになった。歯肉辺縁までフィットし大半のプラークを落とせるようになった。

毛の硬さ●1種=やわらかめ
色調●ラバー5種=ピンク●、レッド●、ブルー●、
イエロー●、ネイビーブルー●
ハンドル1種=ホワイト
包装・希望患者価格●1本=¥390(税込)
5本セット=¥1,950(税込)

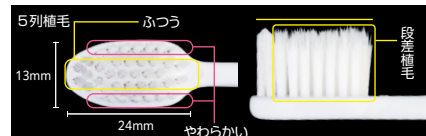

上下の歯を同時に磨けるようにヘッドの幅を広く設計。

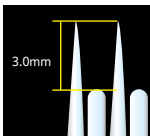

テーパー毛とラウンド毛のハイブリッド段差植毛

■処方の目安表

		Basic 〔ベーシック〕		Basic picella! 〔ベーシック・ピセラ薄型〕		Perio 〔ペリオ〕		Perio picella! 〔ペリオ・ピセラ薄型〕		OPERATION 〔オペレーション〕	WHITE 〔ホワイト〕	IMPLANT 〔インプラント薄型〕
症状	目的	B-10M	B-10S	B-21M	B-21S	P-10M	P-10S	P-21M	P-21S	OP-10	W-10	I-21
健康な歯肉	う蝕予防	◎	◎	◎	◎	○		○				
	歯周病予防	○	○	○	○	◎		◎				
歯肉炎	進行抑制・改善		○		○	◎		◎	○	△※1		○
	軽度					◎	○	◎	◎	△※1		◎
	中等度						◎	◎	◎	◎		◎
辺縁性歯周炎	進行抑制						◎		◎	◎		◎
	重度						◎		◎	◎		◎
歯肉退縮	進行抑制・歯槽外傷予防					○	◎	○	◎			◎
外科処置後	患部周辺の清掃									◎		
歯周治療後のメンテナンス	歯周病予防					◎		◎				○
	根面う蝕予防					◎		◎				
永久歯萌出途中	う蝕予防			○	◎							
	歯肉炎				◎							
インプラントのメンテナンス	周囲粘膜炎予防											◎
	周囲炎進行抑制											◎
ステインの付着	ステインの除去										◎	

※1 急性症状の場合に適応可

薬用歯みがきジェル

ルシェロ おとなのトータルケア歯みがきジェル

【医薬部外品】 【販売名】 ジーシーオン歯みがきジェル

複数の口腔内リスクを全部まとめてシンプルケア

イソプロピルメチルフェノール (PMP) 歯肉炎予防、口臭予防	塩化セチルピリジニウム (CPC) 歯肉炎予防、口臭予防
グリチルリチン酸ジカリウム 歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防	フッ化ナトリウム (1450ppmF) う蝕の発生と進行予防
硝酸カリウム 知覚過敏症状予防	ポリリン酸ナトリウム 歯石の沈着を防ぐ、タバコのやに除去

※6歳未満の子供の手の届かない所に保管し、使用させない。 製造販売元 日本ゼット株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

歯科医院用



ホワイト

薬用歯みがき類

ルシェロ 歯みがきペースト ホワイトプレミアムケア

【医薬部外品】 【販売名】 ルシェロ歯みがきペースト ホワイトP

ホワイトニング前後の+αケアに

弱アルカリ性 ステインを分解して浮かせる	Lime粒子® (清掃剤) ステインをやさしく落とす
ポリエチレングリコール (PEG) 400 タバコのやにを溶解除去	乳酸アルミニウム 知覚過敏症状予防
モノフルオロリン酸ナトリウム (1450ppmF) う蝕の発生と進行予防	

成分●[清掃剤] 炭酸カルシウム (Lime粒子) [溶剤] 精製水 [湿潤剤] 濃グリセリン [薬用成分] ポリエチレングリコール400、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム (フッ素 1450ppm) [甘味剤] キシリトール [pH調整剤] 水酸化ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム [粘度調整剤] カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース [香味剤] 香料 (グリーンシトラスタイプ) [保存剤] 安息香酸ナトリウム [増粘剤] 無水ケイ酸
内容量●100g 香味●グリーンシトラス
包装・希望患者価格●1函:1本=¥2,200 (税込)

※6歳未満の子供の手の届かない所に保管し、使用させない。
※本製品に配合している原料に由来してペーストが部分的に黄色に見える場合がございますが、品質に問題はございません。
製造販売元 日本ゼット株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



歯科医院用

ステイン:着色汚れ

薬用歯みがき類

ルシェロ 歯みがきペースト ホワイト

【医薬部外品】 【販売名】 ルシェロ歯みがきペースト ホワイト

日々のステインケアに

弱アルカリ性 ステインを分解して浮かせる	Lime粒子® (清掃剤) ステインをやさしく落とす
ポリエチレングリコール (PEG) 400 タバコのやにを溶解除去	モノフルオロリン酸ナトリウム (950ppmF) う蝕の発生と進行予防

成分●[清掃剤] 炭酸カルシウム (Lime粒子) [溶剤] 精製水 [湿潤剤] 濃グリセリン [薬用成分] ポリエチレングリコール400、モノフルオロリン酸ナトリウム (フッ素) [甘味剤] キシリトール [粘度調整剤] カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース [香味剤] 香料 (ビュアミントタイプ) [pH調整剤] リン酸水素二ナトリウム、水酸化ナトリウム [増粘剤] 無水ケイ酸 [保存剤] バラベン
内容量●100g 香味●ビュアミント
包装・希望患者価格●1函:1本=¥1,980 (税込)

※バラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。
製造販売元 日本ゼット株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



歯科医院用

ステイン:着色汚れ

ベーシック

歯科用フッ素入り歯みがき

ルシェロ パースト

【医薬部外品】 【販売名】 プロスペック* 歯みがきペーストL

う蝕・歯周病*予防に

フッ化ナトリウム (900ppmF) う蝕の発生と進行予防
グリチルリチン酸ジカリウム 歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防
塩酸クロルヘキシジン 歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防

成分●[有効成分] フッ化ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、塩酸クロルヘキシジン [研磨剤] 無水ケイ酸 [湿潤剤] 濃グリセリン、プロピレングリコール [発泡剤] ラウリル硫酸ナトリウム [乳化剤] ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 [粘度調整剤] カルボキシメチルセルロースナトリウム [防腐剤] バラベン [甘味剤] キシリトール、サッカリンナトリウム [着香剤] 香料 (ラ・フランス) [溶剤] 精製水
内容量●65g 香味●ラ・フランス&ハーブ
包装・希望患者価格●1函:1本=¥600 (税込)

※バラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。
製造販売元 TOA株式会社 大阪市中央区北浜三丁目5番29号 日本生命淀屋ビル17階



薬用歯みがき

ルシェロ パースト マスデントF

【医薬部外品】

ナチュラル処方で歯周病*対策

※合成甘味料、発泡剤、防腐剤は使用しておりません。

フッ化ナトリウム (900ppmF) う蝕の発生と進行予防	グリチルリチン酸二カリウム 歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防
マスティックエッセンシャルオイル 口中の浄化 (清浄剤)	

成分●[清掃剤] 無水ケイ酸、軽質無水ケイ酸 [湿潤剤] 濃グリセリン、ソルビット液 [溶剤] エタノール [粘度調整剤] ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガム [着香剤] 香料 [着色剤] 酸化チタン [薬用成分] フッ化ナトリウム、グリチルリチン酸二カリウム [pH調整剤] クエン酸ナトリウム [清浄剤] マスティックエッセンシャルオイル
内容量●60g
包装・希望患者価格●1函:1本=¥1,900 (税込)

製造販売元 ゼリア新薬工業株式会社 東京都中央区日本橋小舟町10-11

*歯周病は歯周炎・歯肉炎の総称です。



※掲載情報は2026年7月現在のものです。
※希望医院価格には消費税は含まれておりません。
※掲載の症例写真は製品の効果を保証するものではありません。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東北 (022)785-8040 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store
Google Play
どちらもこちらのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

