


新・発・想

今までにない全く新しい発想から、
新しい機能をもって誕生。
その名も新しい“サムフレンド8020”
(ハチマルニイマル)
歯間ブラシと歯ブラシ……
その機能性を見事に合体。

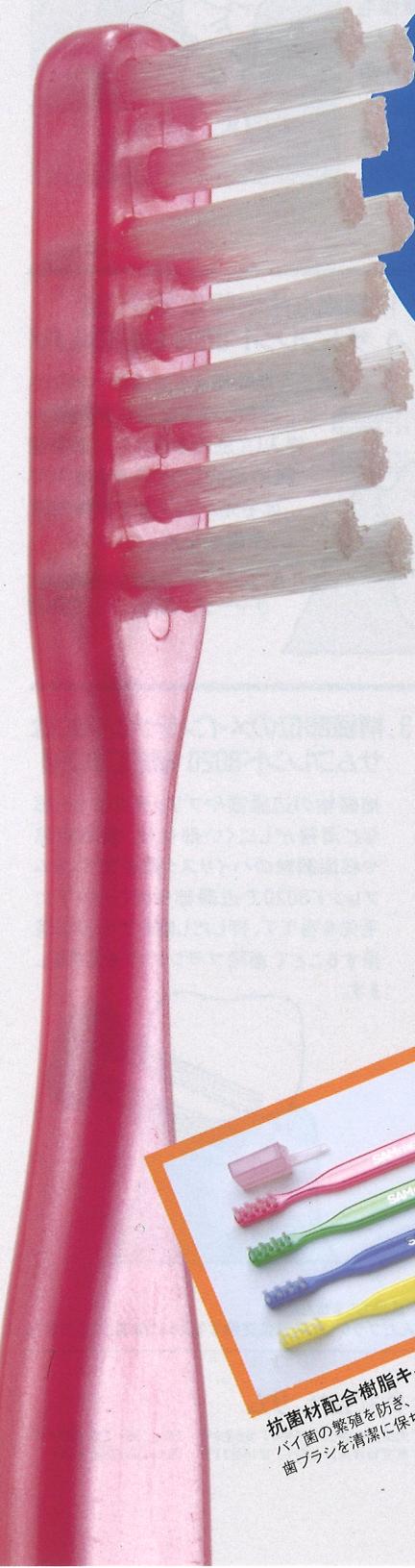


抗菌材配合樹脂キャップ付
バイ菌の繁殖を防ぎ、
歯ブラシを清潔に保ちます。


8020
SAM
FRIEND

80歳において20本の歯が保てるよう…そのよ
うな願いを込めて考案された、成人向きの歯科
医院専用歯ブラシ。1列と2列の利点を活かした
8020ブラシは、「歯を磨く」と言う概念を変える
に違いありません。症状に応じた指導ができる
ように、MEDIUM、SOFTの2種類を用意しました。

8020
SAM
FRIEND

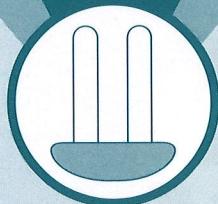


ラウンドエンド

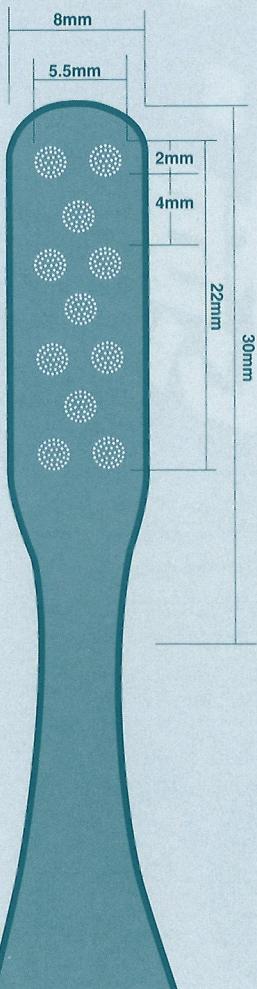

成人の齲蝕や歯周疾患の好発部位は歯間部です。


「歯周ポケットの清掃」「歯間部の清掃」に、特殊植毛が施された“サムフレンド8020”は、これまでの歯ブラシになかった清掃効果を発揮します。2列部分が歯間部に挿入されて、歯間ブラシに変わる働きをして、他の1列部分は頬舌側の歯面と歯周ポケットの清掃をし、「歯肉炎の予防」「根面齲蝕の予防」に効果的です。

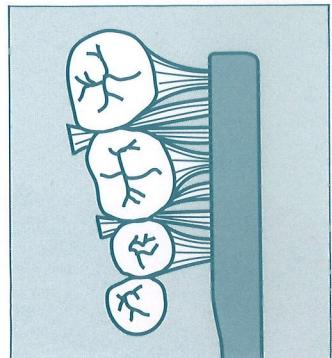

1. 健康な歯間部の清掃には サムフレンド8020 MEDIUM

毛先を切端部から歯頸部へ移動させ、歯軸にほぼ直角に歯間部へ挿入して圧迫を加えます。歯間空隙の拡大しつつある中高年では毛先が突き出て食物残渣や歯垢を押しだします。


- ゴッドリープ垂直法あるいはチャーターズ法に準じて使用

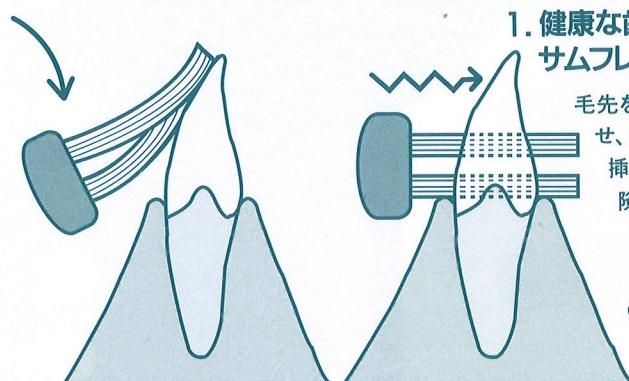

2. 炎症歯肉の治療用には サムフレンド8020 SOFT

歯肉に炎症のある人の歯周ポケットの清掃には、根尖方向に毛先を挿入して、振動を加えて歯垢を除去します。


- バス法に準じて使用

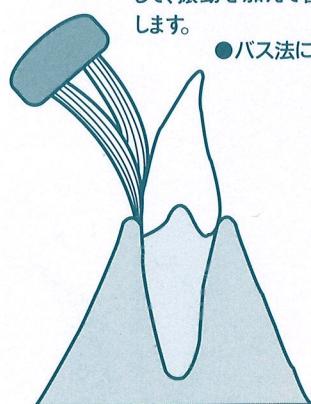

- 歯ブラシが長持ちする人は、歯が長持ちしません。
患者さんには、押しだし磨きで痛んだブラシは、早目に交換するように指導してください。

3. 補綴部位のメインテナンスには サムフレンド8020 MEDIUM

補綴物の辺縁部やブリッヂのダミー部など清掃がしにくい部位は、歯周疾患や根面齲蝕のハイリスク部位です。サムフレンド8020で辺縁部やダミーの下に毛先を当てて、押しだし磨きで十分に清掃することで歯間ブラシに代る働きをします。

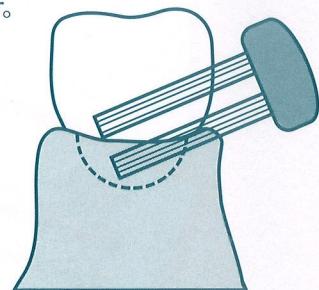

代理店

SAM 株式会社 サム

本社／大阪市中央区南船場4丁目8番9号 TEL. (06) 245-0950(代)
東京営業所／東京都台東区上野1丁目18番11号 TEL. (03) 3836-9347