

ウォーターピック®再び。今度はヨシダから新登場!

ウォーターピック®ウルトラ



ジェットチップおよびピックポケットチップはどちらも歯肉縁下に効果的に作用します。



ジェットチップ

歯肉溝・浅い歯周ポケット、
口腔内全体の洗浄に
使用します。



ピックポケットチップ

歯肉縁下洗浄用チップ。
水圧調整ダイヤルは
最小に設定して使用します。



歯列矯正用チップ

矯正装置や歯ブラシ等の
届きにくい部位のブラッシング
および洗浄用。



タンゲクリーナー

口臭予防用の舌クリーナー。
水圧調整ダイヤルを最小設定にし、
徐々に水圧を上げ、奥から手前へ向けて洗浄します。

ジェット水流口腔内洗浄補助装置

ウォーターピック®ウルトラ

waterpik®

treat yourself better™



やっぱり「ウォーターピック」っていいよね!

デンタルフロスに代わる新たな口腔内洗浄のカタチ。口腔内をジェット水流で洗浄。歯肉縁下にも浸透して付着細菌を洗い流します。ソニックアーとの併用でさらに効果が期待できます。

バイオフィームの違い

付着の場所によってさまざまなバイオフィームが存在します。



直接洗浄域と洗浄域

「直接洗浄域」では水圧によって洗浄し、「洗浄域」では水が歯肉縁下に浸透し、歯肉縁下のバイオフィームを洗い流します。



水圧コントロールシステム

10段階の水圧コントロールが行えます。使用する目的に併せた水圧調整を行います。



チップ収納付きタンク

使いやすいチップ収納部。水タンク上部に各チップを収納できるようになっています。



コンパクト

コンパクト設計ですので洗面所など限られたスペースで使用できます。



使用の手順

1

タンクに注水する



2

ハンドルにチップをセットする



3

ダイヤルで水圧を設定する



4

口腔内の使用部位にチップを当てる



5

ハンドルのボタンを放して洗浄



●セット内容:本体、水タンク、ハンドル、チップ(ジェットチップ3本・ピックポケットチップ1本・歯列矯正用チップ1本・タンククリーナー3本) ●患者様価格:14,175円(税込)

●チップ単品患者様価格:◎ジェットチップ(2本入)◎ピックポケットチップ(2本入)◎歯列矯正用チップ(2本入)◎タンククリーナー(2本入)各1,418円(税込)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで



Waterpik® デンタル・ウォーター・ジェットは、 3秒間当てるだけでプラークバイオフィルムの99.9%を除去します。

デンタル・ウォーター・ジェットでのバイオフィルムの除去

Gorur A, Lyle DM, Schaudinn C, Costerton JW. デンタル・ウォーター・ジェットでのバイオフィルムの除去. Compend Contin Educ Dent 2009; 30(Suppl 1):1-6

監修 和泉 雄一 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野 教授 翻訳 竹内 康雄 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野 助教

方法

歯周病に罹患した8歯を抜歯した。4歯から薄切標本を10枚作製し、唾液中で4日間培養することで、さらにプラークバイオフィルムを増殖させた。切り出した10枚のうち4枚をジェットチップ、4枚を歯列矯正用チップで処置し、残りの2枚は対照とした。残りの4歯は、歯列矯正用チップで処置を行ない、石灰化したプラークバイオフィルムの除去について評価した。全ての歯について3秒間、中程度の水圧で処置を行った後、SEMにより評価した。


結果

8歯の薄切標本に対し3秒間処置し、SEMで観察をおこなった結果、ジェットチップでは、バイオフィルムの99.9%が除去され、歯列矯正用チップでは99.8%が除去された。歯列矯正用チップでは、肉眼的にも、SEMでの観察においても、4歯の表面から石灰化されたバイオフィルムが顕著に除去されていた。

術前
プラークバイオフィルム



ジェットチップによる
プラークバイオフィルムの除去

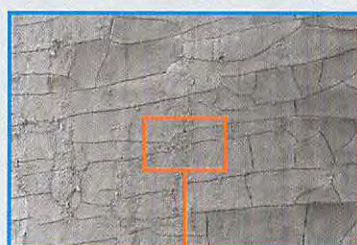

歯列矯正用チップによる
プラークバイオフィルムの除去



ジェット水流で口腔内を洗浄。
ウォーターピック®にコードレスタイプも新登場。

waterpik



コードレス
タイプ
新登場!



ジェット
チップ

ピックポケット
チップ

歯列矯正用
チップ

タング
クリーナー



ジェット水流口腔内洗浄補助装置

ウォーターピック®シリーズ

ウォーターピックウルトラ®コードレス

ウォーターピック®ウルトラ

使い方に合わせてお選びください。卓上タイプとコードレスタイプのウォーターピックです。

水圧を10段階でコントロール、口腔内をきめ細かく洗浄できます。



水圧コントロールシステム

使用する目的に合わせて10段階の水圧コントロールが行えます。



チップ収納付きタンク

水タンク上部に各チップを収納できるようになっています。



ハンドピースコード収納

かさばりがちなコードをスッキリ収納できます。



使用の手順



ウォーターピック®ウルトラ

- セット内容:本体、水タンク、ハンドル、チップ(ジェットチップ3本・ピックポケットチップ1本・歯列矯正用チップ1本・タングクリーナー3本) ●患者様価格:14,175円(税込)
- チップ単品患者様価格:◎ジェットチップ(2本入)◎ピックポケットチップ(2本入)◎歯列矯正用チップ(2本入)◎タングクリーナー(2本入)各1,418円(税込)

コードレス&ハンディタイプで設置場所を選びません。



コードレスで軽いフットワーク

コードレスなので使用場所を選びません。



ハンディタイプ

手のひらに収まる握りやすい形状です。



水圧は2段階

LOWは卓上タイプの2~3程度、HIは卓上タイプの5~6程度の2段階。



使用の手順



ウォーターピック®ウルトラコードレス

- セット内容:本体、充電器、チップ(ジェットチップ・ピックポケットチップ・歯列矯正用チップ・タングクリーナー各1本) ●患者様価格:12,075円(税込)
- チップ単品患者様価格:◎ジェットチップ(2本入)◎ピックポケットチップ(2本入)◎歯列矯正用チップ(2本入)◎タングクリーナー(2本入)各1,418円(税込)


※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●お問い合わせは下記まで

禁無断転載

株式会社ヨシダはISO9001とISO13485を取得しています。詳しくはヨシダホームページをご覧ください。http://www.yoshida-dental.co.jp

◎発売元:

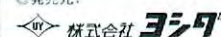

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931 (器材営業本部)

◎製造元:Water Pik, Inc



2010年4月/日/30/®40/改 (01)02747937007969