


Your tongue is gross.

あなたの舌は汚れています。

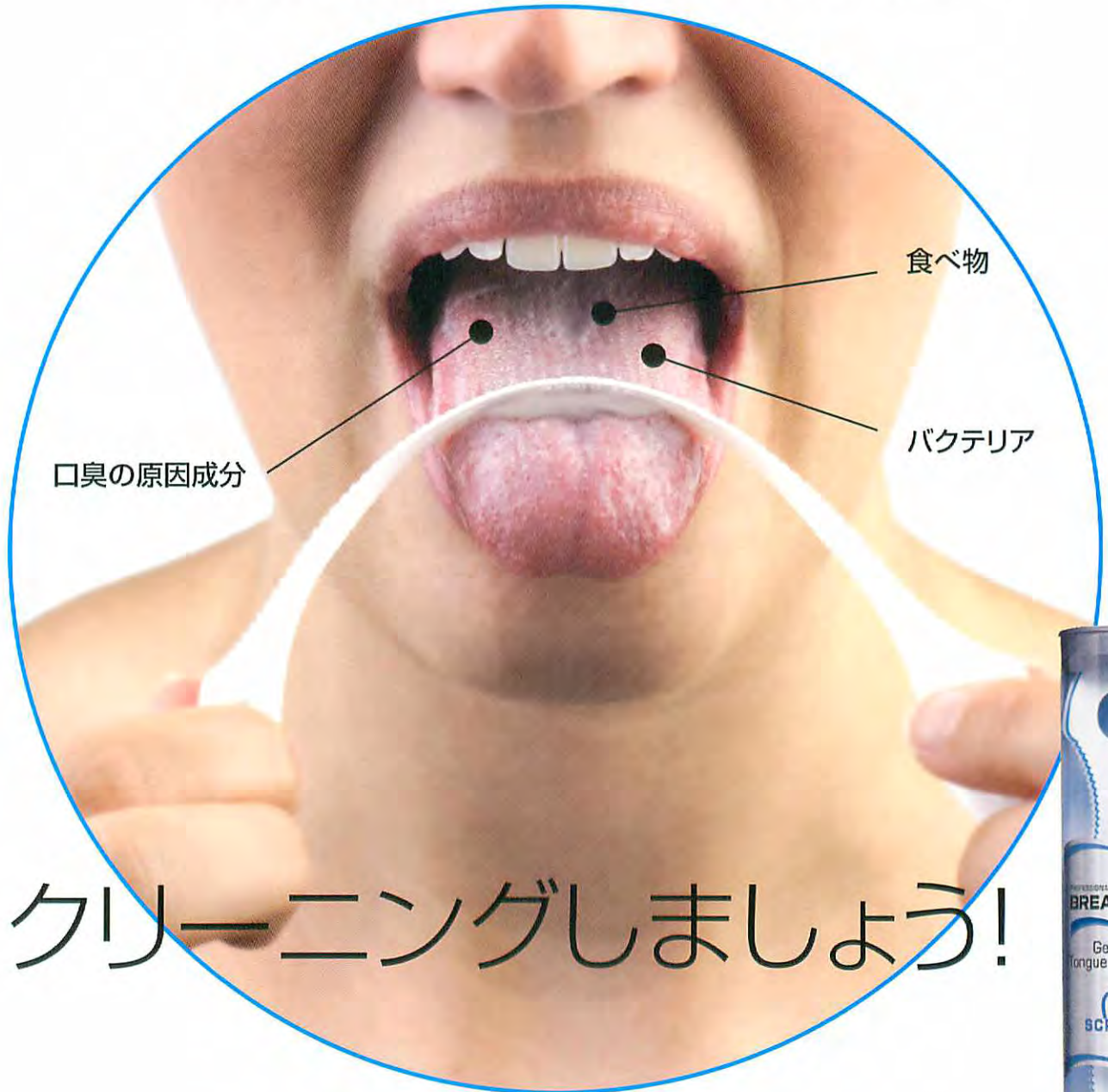

クリーニングしましょう!

BREATHRx[®]
Fresh Breath System






ブレスRX タンスクレーパー

米国プロフェッショナルケアメーカー「ディスカスデンタル」社の製造販売するブレスケアライン「ブレスRX」の舌ブラシ「ブレスRXタンスクレーパー」です。

この製品は、歌手の郷ひろみさんがフジテレビ番組「HEY!HEY!HEY!」や日本テレビ番組「おしゃれイズム」で愛用していると紹介された携帯用舌ブラシ製品です。

口臭の原因の85%以上は、舌にあるとされています。舌の表面は口臭の原因となる細菌が最も繁殖する場所です。舌の表面のポケットをやさしくこするお手入れはシンプルではありますが、口臭を軽減する効果を発揮します。

<システムの説明>

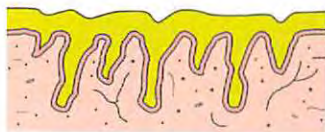

舌の表面には揮発性硫黄化合物とグラム陰性菌が繁殖しています。





歯ブラシでは、部分的に菌を除去するだけです。



タンスクレーパーは、グラム陰性菌をほとんど除去することができます。

HOW TO USE <使用方法>

1. スクレーパーを「U」の字に折り曲げて、そのまま両端をしっかり持ち、スクレーパーの弧を舌の表面に当てます。
2. 「U」の字にしたスクレーパーを気持ち悪くならない程度に舌のできるだけ奥へと持っていき、そこから舌の先へとやさしくこすります。
3. この要領で舌の表面を繰り返してこすりますが、こする度にスクレーパーをすすいでください。
(スクレーパーは、1か月毎に1本の交換が必要です。)
4. このタンスクレーパーには、レギュラー (Regular) 側とソフト (Soft) 側がありますので、お好みの強さを選択して、ご自身にあったこすり方ができます。



- 製品内容：タンスクレーパー(舌ブラシ)1ケース3本入り
- 材質：ポリプロピレンホモポリマー 耐熱温度60度

■製造販売元

ブライトスマイルジャパン株式会社
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-6-6
TEL:06-6371-0031 FAX:06-6371-0032

■製造元

ディスカスデンタル社(米国)

DISCUS DENTAL®

