

歯ぎしりセンサー

BiteStrip


バイトストリップ



ブラキシズムの際に起こる咬筋の活動電位を手軽に計測 補綴物やインプラント埋入前のスクリーニングに


ブラキシズムを計測するEMG記録装置

バイトストリップは分析ソフトと永く表示ディスプレイを内蔵したEMG記録装置です。咬筋の活動電位を感知し、4段階でディスプレイに表示します。

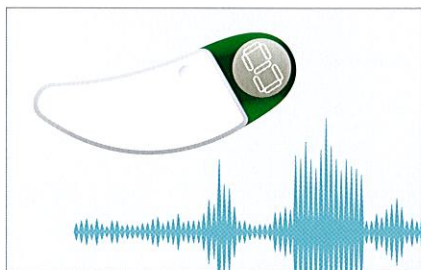

患者さんの負担が少なく、自宅で簡単計測


ブラキシズムの検査には従来、病院などの検査施設に依頼するなど患者さんへの負担を強いる方法が一般的でしたが、家庭で簡単に計測する事ができるバイトストリップなら自然な就寝環境で、計測する事が可能です。

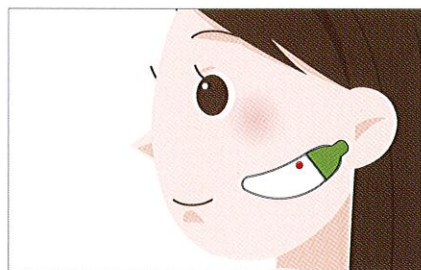

結果表示は4段階

計測値がディスプレイに表示されます。

L	無し～低度	30回以下のブラキシズムに相当
1	軽度	31～60回のブラキシズムに相当
2	中度	61～100回のブラキシズムに相当
3	重度	101回以上のブラキシズムに相当

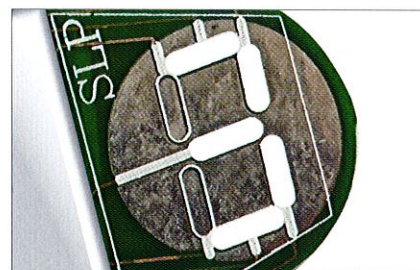

使用方法

就寝中に頬に貼りつけておくだけで計測できるので、患者さんの負担も少なく手軽に使用できます。


※詳しくは製品添付の取扱説明書をお読みください。



バイトストリップを正しい位置に貼り付けます。




そのまま普段どおりに就寝します。(最低5時間貼り付けます)

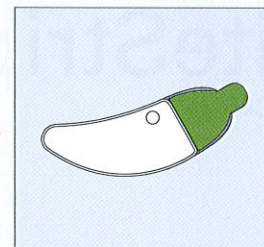

起床後、バイトストリップを頬から外し、歯科医院へ持参します。

歯ぎしりによる影響

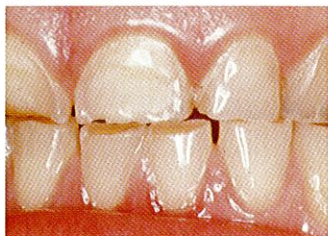

ブラキシズムによりエナメル質が咬耗した歯の一例



歯ぎしりセンサー

バイトストリップ

標準価格 4,900円 **649010**

付属品 バイトストリップ 1個
グリーンステッカー 1枚
アルコールパッド 2個
木製スパチュラ 1本
ストリップリーダー 1枚

単回使用

有限会社 マルヤマ歯科商店

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2013年6月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

製造 ビクセルタウン

発売

株式会社モリタ

大阪本社
東京本社

大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161

www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB No.M207.1869-1-000.1306.65.000Y-SU