



常温重合レジン

プロビナイス フロー


PROVINICE

SELF-CURING ACRYLIC RESIN

Flow

流し込みに特化した常温重合レジン


専用だからこそ操作性

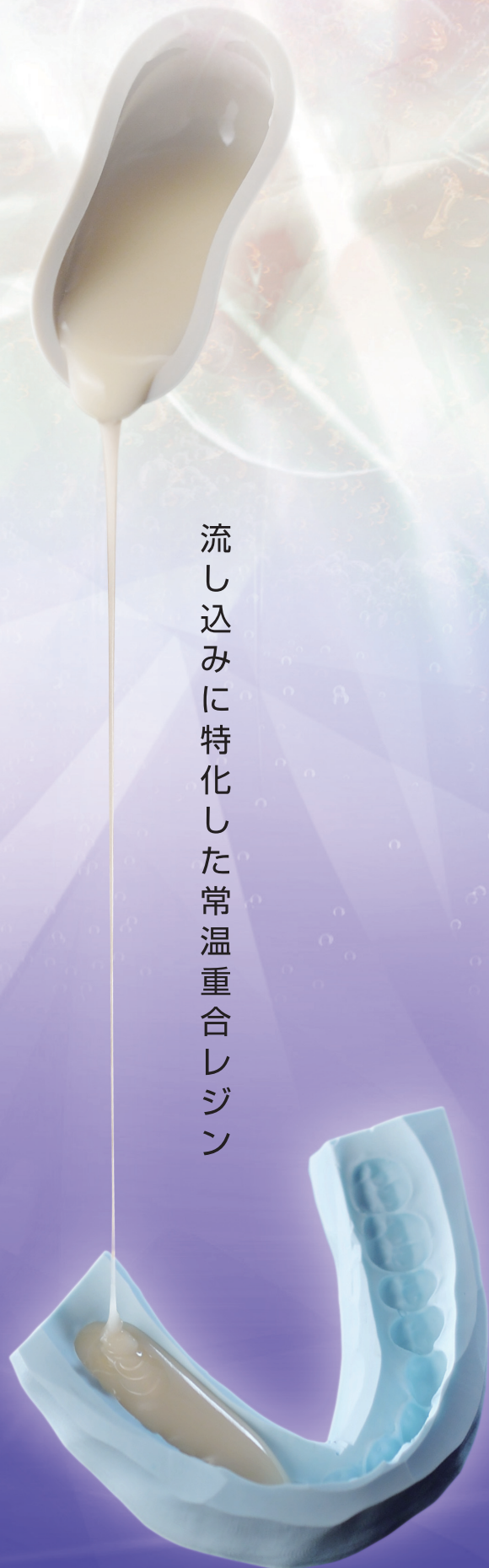

SHOFU INC.

「すぐれた流動性」

流し込み専用のプロビナイス フローなら
ロングスパンブリッジでも難なく流し込めます

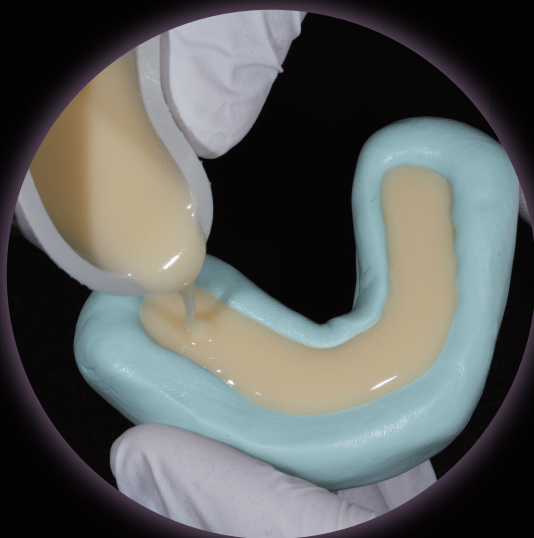

色ムラ、気泡混入も少なく
美しい仕上がり



インプラントプロビジョナルの製作

色ムラが少ない

粉液のなじみがよく、軽い混和でも色ムラが少ない設計です。



混和なし



混和5秒後



混和10秒後

※混和時間は10～15秒が推奨時間です。

歯肉色もラインアップ


歯肉色もご用意しており、
インプラントプロビジョナル、
コピーデンチャーの製作も可能です。



[ゆとりある操作時間] & [シャープな硬化]

feature

フロー状態を長く維持できるため、余裕をもって操作していただけます。

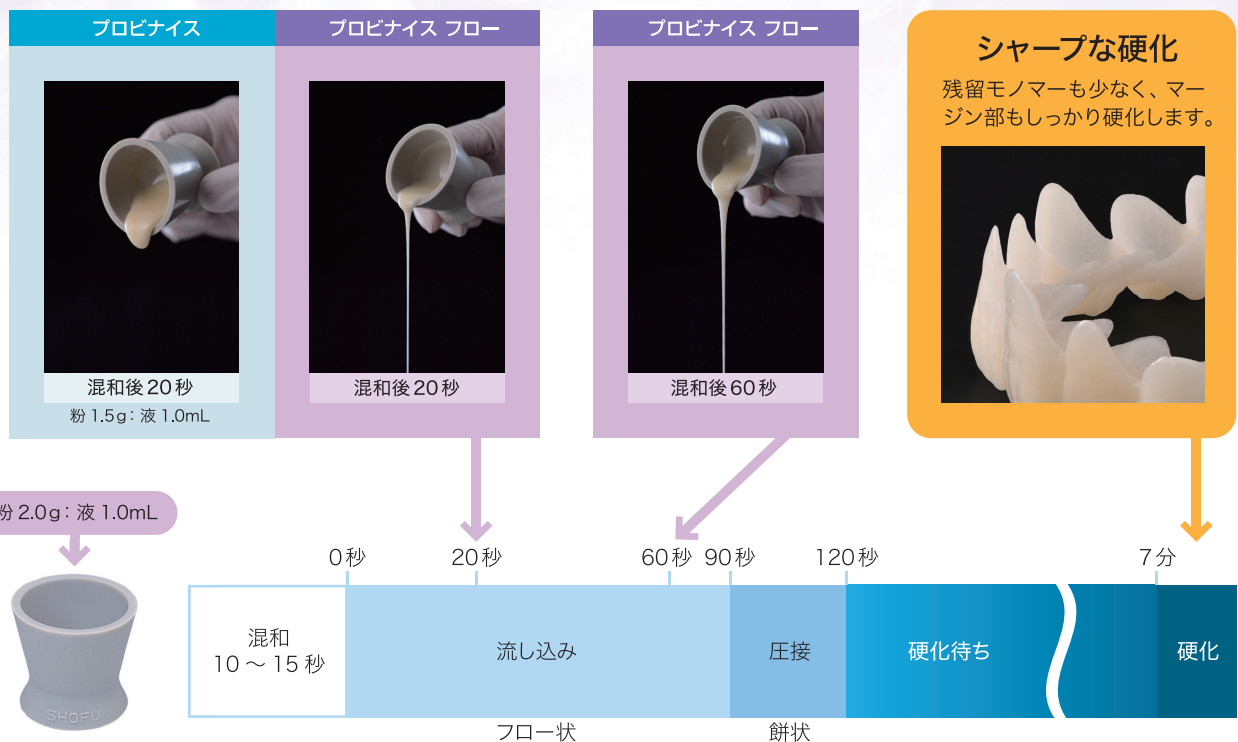


feature

ロングスパンブリッジなど大きな補綴装置に適した
すぐれた物性を発現します。


物性

曲げ強さ (代表値)

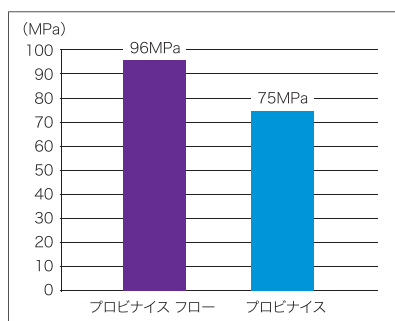


試験方法 JIS T 6518 : 2011 アクリル系歯冠用レジン

ビッカース硬さ (代表値)

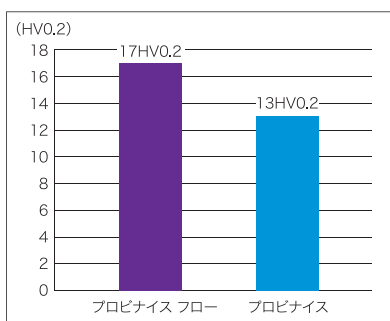

(自社独自試験方法)

線収縮率 (代表値)

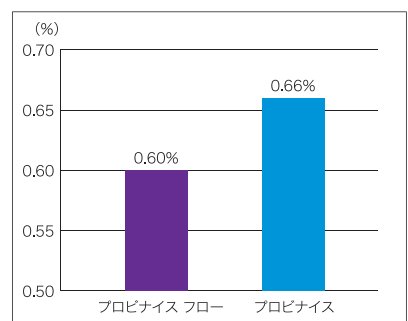

(自社独自試験方法)

プロビナイス フローは粉 2.0g : 液 1.0mL、プロビナイスは粉 1.5g : 液 1.0mL (混和注入法の粉液比) で評価しています。

販売名・一般名称

販売名	一般名称	承認・認証・届出番号
プロビナイス フロー	歯科汎用アクリル系レジン	管理医療機器 医療機器認証番号 228AFBZX00119000
プロビナイス	歯科汎用アクリル系レジン	管理医療機器 医療機器認証番号 21400BZZ00451000


流し込み用



常温重合レジン
プロビナイス フロー 粉
50g(粉量計付)
250g(粉量計付)

●色調：3色

歯冠色 歯肉色

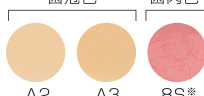

印刷のため色調は
実物とは異なります。

プロビナイス フロー / プロビナイス 共用液



プロビナイス 液
100mL(液用ワンタッチキャップ、液量計、スポイト付)
250mL(液用ワンタッチキャップ、液量計、スポイト付)

液は
**プロビナイス フロー・プロビナイス
で共用です**
プロビナイス ファストの液は使用できません。

筆積み・混和用



常温重合レジン
プロビナイス 粉
50g(粉量計付)
250g(粉量計付)

●色調

歯冠色6色 A1、A2、A3、A3.5、
Inc(インサイザル)、56
歯肉色4色 U2※、U3※、8S※、3S

※は繊維入りの色調です。

関連製品

硬化時間が短くチェアタイムの短縮に貢献

管理医療機器 認証番号
219AIBZX00084000



常温重合レジン
プロビナイス ファスト
50g(粉量計付)
250g(粉量計付)

液用ワンタッチキャップ、スポイト付
液 100mL
液 250mL

※液はプロビナイス ファスト専用です。



シリコンゴム混和器
包装 3個

一般医療機器 届出番号
26BIX00004000213



技工用シリコン印象材(パテ状)
歯科複模型用ゴム質弾性印象材料
松風ラボシリコン



分離材
ハイゾール
包装 80g

管理医療機器 認証番号
21400BZZ00224000



金属接着性プライマー
歯科金属用接着材料
メタルリンク
包装 5mL

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595