

OralStudio

recommend




口腔内チェックアップ用 ライト

SP Light

スプライト

Search the Problem

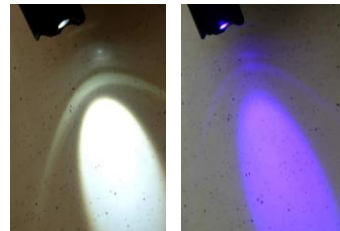

白色ライト
モード

特定波長
モード

成熟
プラークを
可視化※

レジン など
修復・充填物を
識別

う蝕病変
の
可視化※

細菌の代謝産物〔ポルフィリン〕に特定波長の光を照射すると蛍光発光
この原理〔光誘導蛍光定量法〕を応用したのが SP Light

※ 当製品は、各種診査・診断の補助具であり、治療方針や処置内容を決定するものではありません

■ ラインナップは2種類

SP Light (歯科医療従事者向け)




- ・焦点調節が可能
- ・白色&特定波長の2モードでの照射

院内、往診でご活用

販売するSP Lightはシルバー色・簡易防湿で消毒可能・充電式

Dental Light (患者さん用)

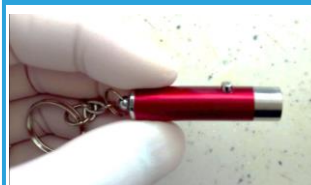

SP Lightに採用している特定波長モードのみ照射

患者さんへの販売やプレゼントにご活用頂けます

■ 使用方法

特定波長モードで照射⇒成熟したプラーク・CR・う蝕病変を可視化



成熟したプラークが蛍光を発するため、歯垢染出し液の結果とは一致しません

こんな使い方されています！💡

- ・検診でのCRやカリエスのチェック
- ・充填や合着時の余剰分の確認
- ・患者との除去すべき汚れの共有
- ・往診等における口腔ケア指導
- ・医院の洗面台にさりげなく…

口腔内チェックアップ用ライト

SP Light

OralStudio.
recommend

より詳しい情報は
OralStudioで公開中

<https://www.oralstudio.net/labo/article/100>



SP Light 1本：8,000円（税別）



簡易防水で消毒可能、充電式で経済的に運用
写真は試作器で、製品はシルバーとなります

Dental Light 10個セット：8,000円（税別）



患者さん向け希望小売価格：医院様で設定
くまモン認定製品です



■ オンラインショップ 以下のQRコードよりご注文



オンライン注文に限り
通常1,000円の送料・手数料が無料



<https://oralstudio-light-shop.square.site/>

■ FAX 011-787-0034 へFAX

		ご注文日	年	月	日
貴施設名		TEL			
〒・ご住所					
メール	納期はメールでご連絡致します				
ご注文内容	SP Light () 本、 Dental Light () セット				

ご注文毎に送料・手数料として1,000円発生致します

ご注文月の翌月に**ご請求書を(株)デンタルアローより送付**致しますので、ご対応ください

現在、多数のご注文を頂いており、発送までしばらくお時間を頂く可能性がございます、何卒ご容赦ください