

ワンボディタイプ用陶材

GC Initial® IQ L-O-Zr **NEW**

Layering-over-Zircon

イニシャル®IQ レイヤリング オーバー ジルコニア


GC Initial® IQ L-O-M

Layering-over-Metal

イニシャル®IQ レイヤリング オーバー メタル



# One-Body Concept

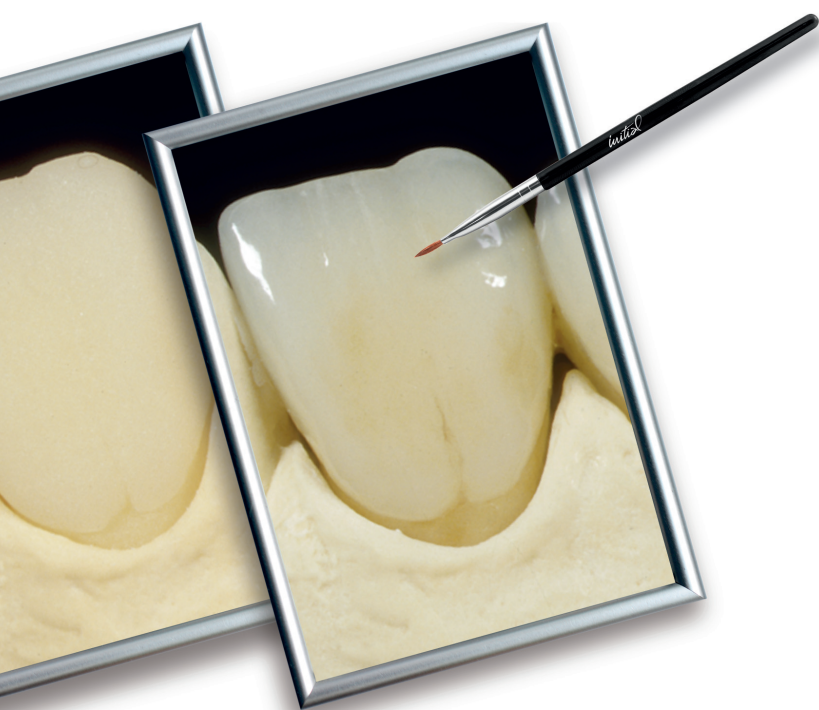

**全く新しいコンセプト誕生。**  
One-Bodyで深みのある色調を創出。

「One-Body Concept」

それはジーシーが提唱する

全く新しいセラミック修復法です。

わずか一層のワンボディパウダーと  
色の深みや透明感、繊細な色表現ができる  
ラスターペーストを塗布するだけで  
VITAクラシカルシェードを再現できます。

「One-Body Concept」に基づく

レイヤリング・マテリアルは、

ジルコニア用「L-O-Zr」とメタル用「L-O-M」の2タイプ。

ごく短時間で審美的なセラミック修復が可能な

「イニシャルIQ」をぜひ一度お試しください。

*initial*



わずか一層の築盛によってシンプルかつ効率的にVita クラシカルシェードを再現

# イニシャル IQ「One-Bodyコンセプト」

## テクニカルエラーとコストの低減

IQは形態と咬合に集中して築盛を行えるため、ハンドリングが簡単になり、築盛に起因するエラーを低減します。また、余分な在庫を持たずコストの低減も可能になります。ワンボディパウダーは、焼成による収縮の低減と高強度を併せ持ち、口腔内で長期にわたり維持します。

## ジルコニアフレームワーク



調整後のジルコニアフレーム。



イニシャルIQ L-O-Zr ライナーでフレームレベルの色調整を行う。



イニシャルIQ L-O-Zrワンボディパウダーでフルカントゥアレイヤリング。



一次焼成、形態修正を経てラスターペーストで仕上げ塗布を行う。



イニシャルIQ L-O-Zr「ワンボディ コンセプト」の完成。

## メタルフレームワーク



ディギャッシング後のメタルフレーム。



イニシャルMCペーストオベークで築盛しメタル色を遮蔽。



イニシャルIQ L-O-Mワンボディパウダーでフルカントゥアレイヤリング。



一次焼成、形態修正を経てラスターペーストで仕上げ塗布を行う。



イニシャルIQ L-O-M「ワンボディ コンセプト」の完成。

## 【ジルコニア用陶材】

### Initial IQ L-O-Zr Set

#### イニシャルIQ レイヤリング オーバー ジルコニア セット

NEW

イニシャル IQ L-O-Zr  
(ワンボディA、B、C、D、BL)各50g 1本、  
Zr-FSモデリングリキッド25mL 1本、  
ライナー (L-1、L-2、L-3、L-4、L-5、L-6、  
L-BL)各3g 1本、  
ライナーリキッド8mL 1本



#### 主な単品価格

| イニシャル IQ L-O-Zr        |              |     |      |
|------------------------|--------------|-----|------|
|                        | 色調           | 50g | 250g |
| IQ L-O-Zr ワンボディ        | A、B、C、D、BL   |     |      |
| IQ L-O-Zr ライナー 3g      | L-1～L-6、L-BL |     |      |
| IQ L-O-Zr ライナーリキッド 8mL |              |     |      |

## 【キャラクタライズ用ペーストセラミック】

### Initial IQ Lustre Pastes Set

#### イニシャルIQ ラスターペーストセット

イニシャルIQラスターペーストニュートラル  
(L-N) 4g 1本、ボディ (L-A、L-B、L-C、L-D) 4g各  
1本、エナメルエフェクト (L-1、L-2、L-3、L-4、  
L-5、L-6、L-7、L-8、L-V) 4g 各1本、  
ディルーテイングリキッド8mL 1本、  
リフレッシュリキッド8mL 1本、  
IQラスターペーストカラーガイド、  
ブラシ(00、2) 各1本、  
ミキシングディッシュ 1個、  
ミキシングディッシュ用プラスチックカバー 1個



#### 主な単品価格

| イニシャル IQ ラスターペースト            |             |  |    |
|------------------------------|-------------|--|----|
|                              | 色調          |  | 4g |
| IQ ラスターペースト ニュートラル           | L-N         |  |    |
| IQ ラスターペースト ボディ              | L-A、B、C、D   |  |    |
| IQ ラスターペースト エナメルエフェクト        | L-1～L-8、L-V |  |    |
| IQ ラスターペースト ディルーテイングリキッド 8mL |             |  |    |
| IQ ラスターペースト リフレッシュリキッド 8mL   |             |  |    |

ジーシー イニシャル IQ L-O-Zr 管理医療機器 223AFBZX00016000  
ジーシー イニシャル IQ L-O-M 管理医療機器 222AFBZX00143000

※色調は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。  
※製品の仕様・外観は、予告なく変更になる場合があります。  
\*VitalはVita Zahnfabrik、Bad Säckingenのトレードマークです。

## 適用部位に応じたベスト・セクション

レイヤリング・マテリアルは、熱膨張係数(CTE)の異なるジルコニア用とメタル用の2タイプ。いずれも良好な適合性が得られます。また、イニシャルIQラスターペーストは、オベークモディファイヤー、各種エナメル、エフェクトパウダーなど部分的なキャラクタライズの他、追加塗布ができる新感覚のペーストです。

## 【メタル用陶材】

### Initial IQ L-O-M Set

#### イニシャルIQ レイヤリング オーバー メタル セット

イニシャル IQ L-O-M  
(ワンボディA、B、C、D)各50g 1本、  
MCモデリングリキッド25mL 2本、  
イニシャルMCペーストオベーク (O-A2、  
O-A3、O-B2、O-C2、O-D2)各3g 1本、  
オベークガラスプレート 1枚、  
オベークブラシ 1本



#### 主な単品価格

| イニシャル IQ L-O-M |         |     |      |
|----------------|---------|-----|------|
|                | 色調      | 50g | 250g |
| IQ L-O-M ワンボディ | A、B、C、D |     |      |

## 【キャラクタライズ用ステイン】

### Initial Stain Set <IN vivo/IN situ>

#### イニシャル ステイン セット

IN vivo 13色 (IV-1～IV-13)各3g 1本、  
IN situ 3色 (IS-B ブラウンブラック、  
IS-R レッドブラウン、IS-C キャメル)各3g 1本、  
グレース (GL) 10g 1本、  
グレースリキッド25mL 1本、  
シェードガイド 1個



(MC/LF/PC用)  
(Zr/AL/Ti用)があります。

#### 主な単品価格

| イニシャル ステイン                                       |                                                     |  |    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----|
|                                                  | 色調                                                  |  | 3g |
| イニシャルステイン IN vivo (MC/LF/PC用)、(Zr/AL/Ti用)        | IV-1～13                                             |  |    |
| イニシャルステイン IN situ (MC/LF/PC用)、(Zr/AL/Ti用)        | IS-B、R、C                                            |  |    |
| イニシャルステイン インサイジオ (MC/LF/PC用)、(Zr/AL/Ti用)         | INC                                                 |  |    |
| イニシャルステイン IN over (MC/LF/PC用のみ)                  | IOA～IOD                                             |  |    |
| イニシャルステイン グレース 10g (MC/LF/PC用)、(Zr/AL/Ti用)       | GL                                                  |  |    |
| イニシャルステイン グレースリキッド 25mL (MC/LF/PC用)、(Zr/AL/Ti用)  |                                                     |  |    |
| IN vivo (内部外部共用蛍光性ステイン)<br>IN situ (外部用非蛍光性ステイン) | IN over (ベースカラー用内部外部ステイン)<br>IN cisio (切縁周辺の深い透明効果) |  |    |

ご使用に際しては、必ず製品添付の  
説明書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**

東京都文京区本郷3-2-14

製造販売元 **株式会社 ジーシー**

東京都板橋区蓮沼町76-1

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

http://www.gcdental.co.jp

支 店

●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東 北(022)207-3370 ●九 州(092)441-1286