

EyeMag Light が軽量化、
さらに使いやすく



LED照明システム EyeMag Light Saphiro²

※写真は EyeMag Smart Sports frame (別売)に装着


EyeMag シリーズに装着して使用する移動型 LED 照明システムが新しくなりました。
幅広い光量調整機能により使いやすさが向上し、鮮明な術野のもと観察できます。

青みを抑えた自然な色調を再現する LED 照明



自然光と同程度の色温度により、快適な視野を実現します。

幅広い光量調整機能

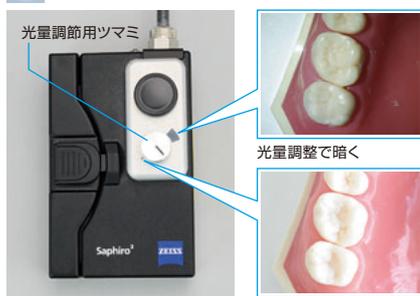

コントロールユニット
LED 照明システムはほぼ無段階で、思いのままに光量調整が行えます。

専用バッテリーが付属



左:専用バッテリー 右:バッテリーチャージャー
フル充電で3~4時間使用できます。
スベアのバッテリーとの併用で1日の診療をサポートします。

※写真は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。
※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがあります。
※本カタログに記載されている会社名・製品名等は各社の登録商標または商標です。
※掲載の参考データは、2013年6月現在のものです。

※製品の詳しい内容は弊社までお問い合わせください。

すべてのEyeMagシリーズに装着可能



EyeMag Smart



EyeMag Smart Sports frame (スポーツフレーム)



EyeMag PRO (Fタイプ)



EyeMag PRO (Sタイプ)
EyeMagシリーズは本製品に含まれません。

光源	LED
照度	35,000 lux (照射距離 250 mm)
色温度	5,500 K (自然光と同程度)
ライトヘッドの大きさ	直径 25 mm
ライトヘッドの重量	11 g
ケーブル長	1.2 m
充電式専用バッテリー	リチウムイオン電池 2,600 mAh、3.7 V ※スベアバッテリー付
点灯時間	3~4 時間(フル充電時) ※時間はバッテリー使用回数や光量によって変化します。
充電時間	約 3 時間

販売名: LED 照明システム EyeMag Light Saphiro²
一般医療機器: 13B1X00119004070

ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **カール ツァイス メディテック 株式会社**
東京都文京区本郷3-2-14 東京都新宿区本塩町22番地

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286