

マイジンガーコブラ (FG用)

歯科用高硬度ダイヤモンドバー



マイジンガーリムーバルキット

歯科用除去キット

ジルコニア補綴物の除去に最適な

ダイヤモンドライクカーボン

DLCコーティングダイヤモンドバー

マイジンガーコブラ (FG用)



ジルコニア、セラミックス、メタル等
あらゆる補綴物の除去に対応

マイジンガー リムーバルキット

マイジナーコブラ (FG用)

ジルコニア補綴物の除去に！

DLCコーティングによる 高い切削力・耐久性

DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コーティングにより、硬度に優れ砥粒が剥がれにくいダイヤモンドバーを実現しました。従来のダイヤモンドバーにはない高い切削力と耐久性を有しています。

発熱しにくいスリット構造

ダイヤモンド砥粒部の間に設けた螺旋状のスリットが、切削中のバー作業部に水流を巻き込み、ダイヤモンドバー全体を冷却します。これにより、硬度の高い補綴物除去時の発熱、ジルコニア除去時に発生する火花の発生を抑制します。



形態番号	DMB850	DMB850	DMB852	DMB855
シャング種類 ISOコード	FG 018	FG 021	FG 018	FG 018
最大許容回転数/分	250,000	210,000	250,000	250,000
長さ [mm]	8.5	8.5	10.0	6.5
注文コード	89409	89410	89411	89412
用途	クラウン (ジルコニア、セラミックス) 除去			
推奨除去部位	標準タイプ ・基本的などの部位でも	ロングタイプ ・上顎切歯 ・犬歯の長い 歯冠	ショートタイプ ・最後臼歯 ・クリアランス が少ない部位	
ダイヤモンド粒子	コース (粗目)			

形態 ● 4種
シャング ● 1種=FG*
包装 ● 5本1パック (各形態)

歯科技工用カーバイド切削器具 / 歯科用ダイヤモンドバー
一般医療機器 13B1X00155000275

*マイジナーコブラのシャングには FG の他に HP (カーバイドバー) もあります。

歯科用除去キット


マイジナーリムーバブルキット

切削性、耐久性に優れたダイヤモンドバー「マイジナーコブラ」4形態「DMB850 (FG 018 / FG 021)」「DMB852 (FG 018)」「DMB855 (FG 018)」に加え、ストレート形状のダイヤモンドバー「DMZ838L (FG 014)」とカーバイドバー「HM23RX (FG 012)」を1セットにしたキットです。このキットでジルコニアはもちろんセラミックス、メタル等、あらゆる補綴物の除去に幅広く対応することができます。

形態番号	DMB850	DMB850	DMB852	DMB855	DMZ838L	HM23RX
シャング種類 ISOコード	FG 018	FG 021	FG 018	FG 018	FG 014	FG 012
最大許容回転数/分	250,000	210,000	250,000	250,000	300,000	160,000
長さ [mm]	8.5	8.5	10.0	6.5	6.0	4.1
注 文 コ ー ド	キット	89408				
	単品	89409	89410	89411	89412	81985
用途	クラウン (ジルコニア、セラミックス) 除去					メタル 除去
ダイヤモンド粒子	コース (粗目)				メディアム	— (カーバイドバー)

*掲載の価格とジーシー研究所測定の見積データは、2019年11月現在のものです。
*価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれておりません)。
*色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

【マイジナーリムーバブルキット構成】

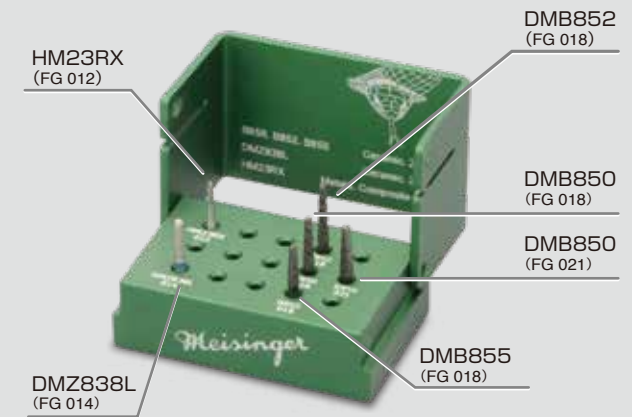

形態 ● 6種 =
DMB850 (FG 018)、DMB850 (FG 021)、DMB852 (FG 018)
DMB855 (FG 018)、DMZ838L (FG 014)、HM23RX (FG 012)
シャング ● 1種=FG
包装 ● キット1函 (各形態1本)
キット注文コード: 89408

歯科用ダイヤモンドバー / 歯科用カーバイドバー / 歯科技工用カーバイド切削器具
一般医療機器 13B1X00155000300

ご使用に際しましては、必ず添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎ 0120-416480
受付時間 9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286