

# ジーシー パターンレジンXF

パターン用常温重合レジン



**PATTERN** **RESIN** **XF** **Fine**  
**Fix**  
**Fast**



# さらに使いやすく 進化した“パターンレジンXF”

## XFine 操作性がさらに向上

優れた操作性と適合性でご評価いただいているジーシー パターンレジンがさらに進化。ポリマーをより微細化することで、築盛時には粘性があり、連結時には間に流しやすく、操作性のバランスを最適化いたしました。





筆No.4を使用



筆No.10を使用(別売)

## XFix 低重合収縮


進化したポリマー技術により、従来品を超える低重合収縮を実現。重合時の変形やズレが起こりにくく、より精密なパターンが作製できます。

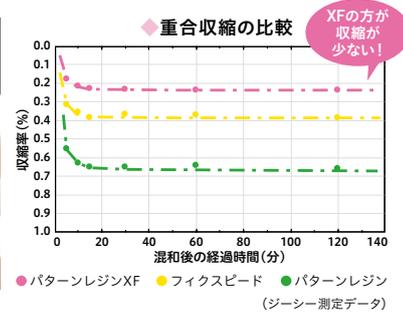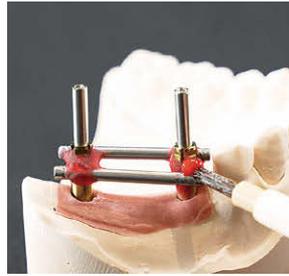



## XFast ヒートショック対応&低焼却残渣

焼却時の熱膨張を大幅に抑えたことで鋳型へのダメージを与えることなくパターンの焼却が可能となり、単冠(約0.3g以下)の急速加熱(ヒートショック)での鋳造を可能にしました。

さらに、新規流動性改質剤により、ノンシリカを実現。鋳造後も美しい面性状が得られ、焼却残渣によるキャストエラーも防ぎ、スピーディーな作業を可能にしました。

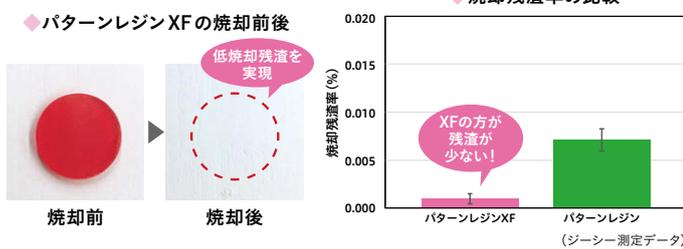

### ◆焼却時の膨張比較

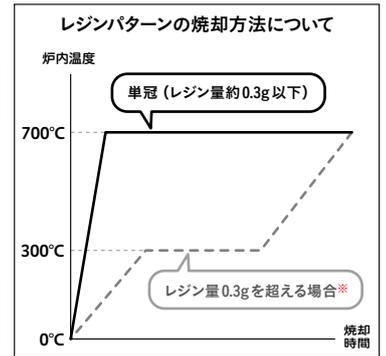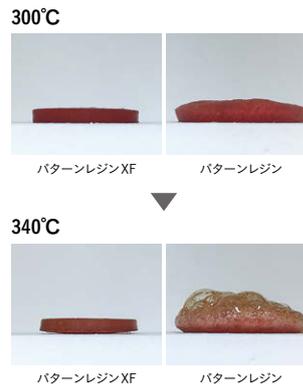

※大型のパターンの場合は300°Cで1時間係留後、炉内温度を上昇させてください。

### ■製品仕様



### パターン用常温重合レジン ジーシー パターンレジンXF

色調 ●1色=レッド  
 包装 ●1歯セット=粉末100g1本、液100g1本、ラバーカップ2個、ポリスポイト(No.3)1本、筆(No.4)1本  
 単品包装  
 包装 ●粉末100g1本  
 液100g(108mL)1本、ポリスポイト(No.3)  
 歯科用/パターンレジン  
 一般医療機器 23B2X00038000049

### ■関連製品



歯科鋳造用石こう系埋没材  
**ジーシー クリスタクイックⅢ SF**  
 包装 ●シンブルパック1歯=3kg(1.5kg×2)  
 一般医療機器 27B2X0008000066  
 製造販売元: 大成歯科工業株式会社  
 大阪府交野市星田北4丁目38番7号



筆(No.10)  
 包装 ●No.10 1本

※掲載情報と参考データは、2019年1月現在のものです。  
 ※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 ※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**  
 東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

DIC(デンタルインフォメーションセンター) 支店  
 お客様窓口 ☎0120-416480 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)  
 http://www.gcdental.co.jp

営業所  
 ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
 ●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286