

スチームクリーナー ST-IV

歯科用蒸気洗浄器



Since 1921
100 years of Quality in Dental



コンパクトなデザイン性と
使いやすさを両立



壁掛けにも
対応

歯科用蒸気洗浄器

NEW

ジーシー スチームクリーナー ST-IV



一式

包装 ●
本体1台、ハンドピースホース組(860mm)
1本、ハンドピースハンガー1個、フットペダル
1個、給水タンク1個、給水チューブ1本、
イオン交換器1個

壁掛け仕様 一式

包装 ●
本体1台、ハンドピースホース組(1,200mm)
1本、ハンドピースハンガー1個、フットペダル
1個、給水タンク1個、給水チューブ1本、
イオン交換器1個、壁掛けブラケット1個

※取り付けは必ず施工業者へご依頼ください。

【取付条件】

- ・耐荷重10kg以上の壁に固定すること。
- ・引抜き力0.7kN/本以上のアンカーボルトまたは木ネジで必ず3ヶ所固定すること。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1,450VA
ボイラー形式	貫流式
使用水質	一般水道水
設定蒸気圧力	0.4～0.45MPa
安全製品	ブレーカー(メインスイッチ兼用、15Aで動作) 温度センサー断線検出機構 温度ヒューズ×2
給水タンク容量	4L
外形寸法	253mm(幅)×181mm(奥行)× 350mm(高さ) [ホース含む高さ650mm]
製品重量	6.8kg
保管環境条件	湿度 30% RH～75% RH

【オプション】



ハンドピース
with ロングホース
包装 ● 1本(1,500mm)



スプラッシュガード
包装 ● 1個



スチームクリーナー ST-IV
水受けトレイ
包装 ● トレー、ガード、網

【別売】

イオン交換器
(ST-II、III、IV用)
包装 ● 1個

※イオン交換器交換ランプが点滅、もしくは使用後1年経過したら交換してください。

スチームクリーナー ST-IV
ハンドピースハンガー
包装 ● 1個



あらゆるシーンでの洗浄作業を快適に

強力なスチームでスピード洗浄

石膏模型

● 洗浄前



● 洗浄



● 洗浄後



義歯

● 洗浄前



● 洗浄



● 洗浄後



CAD/CAM冠等、さまざまな補綴装置の研磨や試適後の洗浄にもお使いいただけます。





優れた耐久性

シンプルな構造の加熱装置と、水道水のスケール*成分を除去するイオン交換器により、長期間快適に洗浄作業を行えます。

● ボイラー配管内(直径7mm) スケール*付着比較

ST-IV (ST-II/III共用) イオン交換器使用	自社従来品 (ST-I) イオン交換器使用
---------------------------------	--------------------------

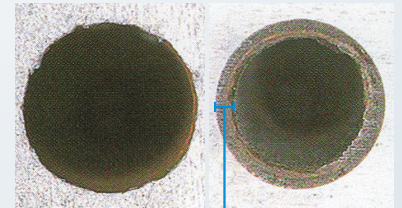

*水に含まれるミネラル分(カルシウムや塩分)が乾燥し、結晶化したもの。

幅広い設置環境

従来品よりコンパクトかつ、壁掛け仕様の追加により、幅広い設置環境でのセッティングが可能です。

据置き仕様



253mm
350mm
181mm

壁掛け仕様

壁掛けブラケットのスリット部分に本体背面のディスクを接続



壁掛けブラケット
本体背面

50mm
181mm

自社従来品 (ST-III) 290mm

● 奥行きがコンパクトに

● マグネットにより着脱可能なハンドピースハンガー



使いやすい位置に設置できます

● ロングホース(オプション)も選択可能

据置き仕様	壁掛け仕様
 <p>86cm 1m50cm (オプション)</p>	 <p>1m20cm 1m50cm (オプション)</p>

直感的に認識できる操作パネル



水切れランプ

● イオン交換器交換ランプ ● モード切替スイッチ

● エア抜きスイッチ ● HAND/FOOTスイッチ

※掲載情報は、2022年11月現在のものです。
 ※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 ※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の使用説明書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
 東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
 お客様窓口 ☎0120-416480
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
 ●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
 営業所
 ●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
 ●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!
 推奨OS/バージョンはiOS:13.7以上、Android:9.0以上です。