

グリーンインパルス

S-ML / S-SL

高速エアタービンハンドピース



Since 1921
100 years of Quality in Dental

Green Impulse

時代のニーズ変化に対応した
「切削能力と機能性の高い」
エアタービン



26Wの高出力
トルクヘッド
S-SL



23Wの
スタンダードヘッド
S-ML

高速エアタービンハンドピース グリーンインパルス

S-ML

- S-ML ●パワー23W
- ヘッドサイズφ10.6×H12.4mm
- 回転数380,000-450,000min⁻¹ ※スタンダード/ ショートシャンクバー専用



S-SL

- S-SL ●パワー26W
- ヘッドサイズφ12.1×H13.3mm
- 回転数325,000-430,000min⁻¹ ※スタンダードシャンクバー専用



歯科用ガス圧式ハンドピース グリーンインパルス 管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00044A01

■共通仕様: 使用可能な給気圧: 0.25~0.3MPa / ステンレス製ボディ / セラミックボールベアリング / グラスロッドライト / 4点注水スプレー / クリーンヘッドシステム / クイックストップ / 90°アングルヘッド / プッシュボタン式チャック / カートリッジ交換可能 / 135℃までのオートクレーブ滅菌可能 / 熱水洗浄可能
※パワーおよび回転数はドライブエアにより異なります。

グリーンインパルス S-ML/S-SL 共通

包装●ハンドピース本体1本、ヘッドキャップレンチ1個、クリーニングワイヤ1本、CJ用Oリング式、ジーシータービンスプレーノズル1個

※予備カートリッジは添付されておりません。
※タービン装着にはカプリングが必要となります。弊社までお問い合わせください。

High-Power ハイパワー

26W*のハイパワーで

力強い切削力を実現 *SLのみ

ローターの羽根の形状・給気口・排気溝の3カ所のデザイン変更により従来の「グリーンインパルス」と同等の切削能力を実現します。小さなヘッドでもスムーズな切削感が得られます。

	ヘッド直径 (mm)	
グリーンインパルス	S-ML φ10.6	S-SL φ12.1
	Z-ML φ10.8	Z-SL φ12.5
出力 (W)		
S-ML/Z-ML	S-SL/Z-SL	
23W	26W	



[高トルクを実現する給排気システム]

- 給気口** 空気のロスを低減し、空気の力を高効率で回転力に変換する突出円筒型ノズルを採用。
- ローターの形状** バケット形状を最適化し、スムーズな排気により高トルクを実現。
- 排気溝** 拡大した排気溝でスムーズな排気をし、低回転速度域のトルクが向上。

Safety 安全性


ヘッド部への血液、異物等の侵入を防止

[クイックストップ機能]

クイックストップ機能により高速回転から約1秒で惰性回転を停止します。口腔内での巻き込みや、サックバックのリスクを低減させ診療の安全性、操作性向上に貢献します。

[クリーンヘッドシステム]

独自のラビリンス機構により、口腔内の血液・異物などの侵入を防ぎます。

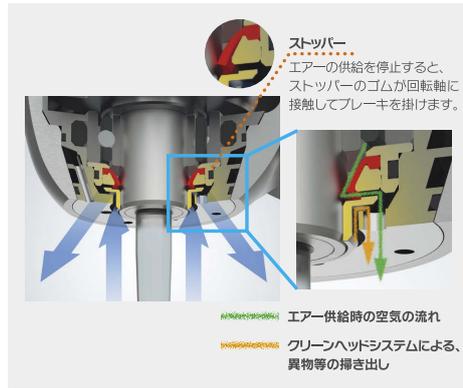

Stress-free ストレスフリー

修理によるタイムロスを抑え 治療へのストレスを軽減

[簡単に交換可能なカートリッジ]

エアータービンのカートリッジは、ご自身で簡単に交換できる仕様になっています。修理に出す時間のロスを抑え、良好な状態での施術が可能です。




押しやすいプッシュボタン

ワンタッチでバーの脱着が可能なロック機構。より少ない力でバーの交換が可能。



持ちやすいボディシェイプ

人間工学に基づいたボディシェイプにより、口腔内のあらゆる部位へのアプローチ性が向上。

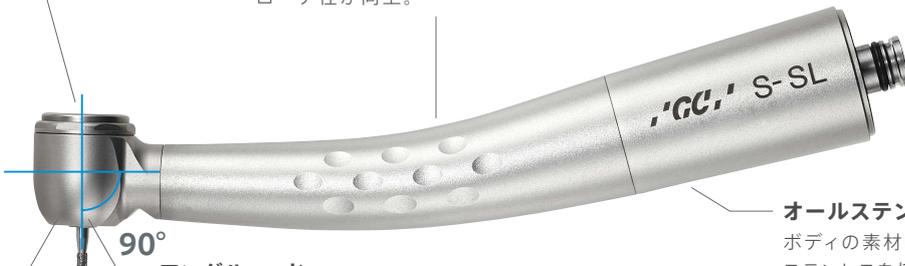


オールステンレス製ボディ
ボディの素材にはサビに強く頑丈なステンレスを採用。

4点注水スプレー

バー全体に効率よくスプレーすることで高い冷却効果を実現。

セラミック製ボールベアリング

スチール製より約25%硬く、約1/2の重量のセラミック製ボールは、摩耗を抑えカートリッジの長寿命化を実現。

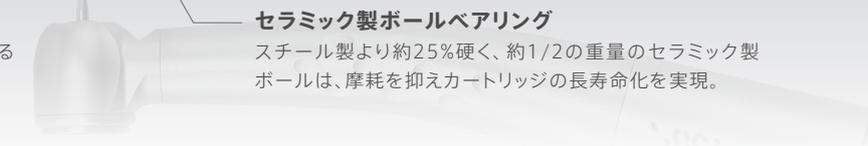

※掲載情報は2022年11月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の使用説明書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ナカニシ**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 栃木県鹿沼市下日向700

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store からダウンロード
Google Play からダウンロード
どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:13.7以上、Android:9.0以上です。