

歯科咬合採得用材料(付加型シリコーン)

リアルバイト




口腔内
保持時間
45秒

ショアA
硬度90



速い + 硬い
||

精度の高いバイト採得

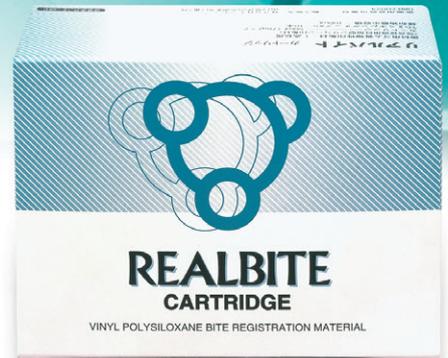

リアルバイト

特長

硬化が早い《口腔内保持時間45秒》

硬化がシャープなので、咬合採得時の咬合位のずれを抑えることができます。

硬度が高い《ショアA硬度90》

硬化体の硬度が高いことにより変形が少なく、精度の高いバイト採得が行えます。また、彫刻刀などで容易にトリミングできます。

高いチキントロピー性

練和物はクリーム状で軟らかく垂れません。軟らかいことにより、咬合採得時に噛む感覚が少なく、中心咬合位に容易に誘導できます。また、垂れないことにより、精度の高いバイト採得が行えます。

軽い押出し


ペーストは軽い力で押し出せますので、形状の小さいTDⅡミキシングチップXSでも楽に使用でき、無駄も少なくできます。

●TDⅡミキシングチップXS



残量 1.4g

■リアルバイトの所要時間

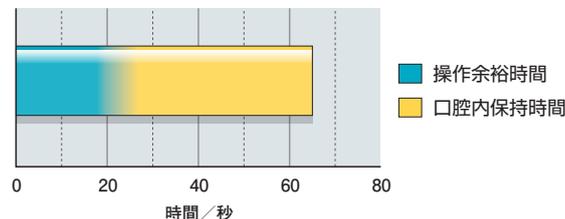

記載のデータは弊社つくば研究所測定によるものです。

■物性表

項目	試料	リアルバイト
操作余裕時間		20秒
口腔内保持時間		45秒
弾性歪み(%)		1
永久歪み(%)		0.5
寸法変化(%)		-0.1
細線再現性(μm)		50

記載のデータは弊社つくば研究所測定によるものです。

製品構成

歯科咬合採得用材料(付加型シリコーン)

リアルバイト

■セット内容

- ペーストカートリッジ
…………… 50mL (76g) × 2
- TDⅡミキシングチップXS
…………… 10本



(一般医療機器)届出番号08B2X00011000017

関連製品

歯科用練成器具

TDⅡミキシングチップ サイズ … XS/S/M

50本入り ……………

(一般医療機器)届出番号08B2X00011000003



歯科用練成器具

トクヤマディスペンサーⅡ ……………

リアルバイトにはトクヤマディスペンサーⅡ(別売)をお使い下さい。従来のトクヤマミキシングディスペンサーはお使いになれません。

(一般医療機器)届出番号08B2X00011000004



※このパンフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00 (土・日祝日は除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <http://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ご用命は