




Noritake

ノリタケデンタルスキャナー SC-3

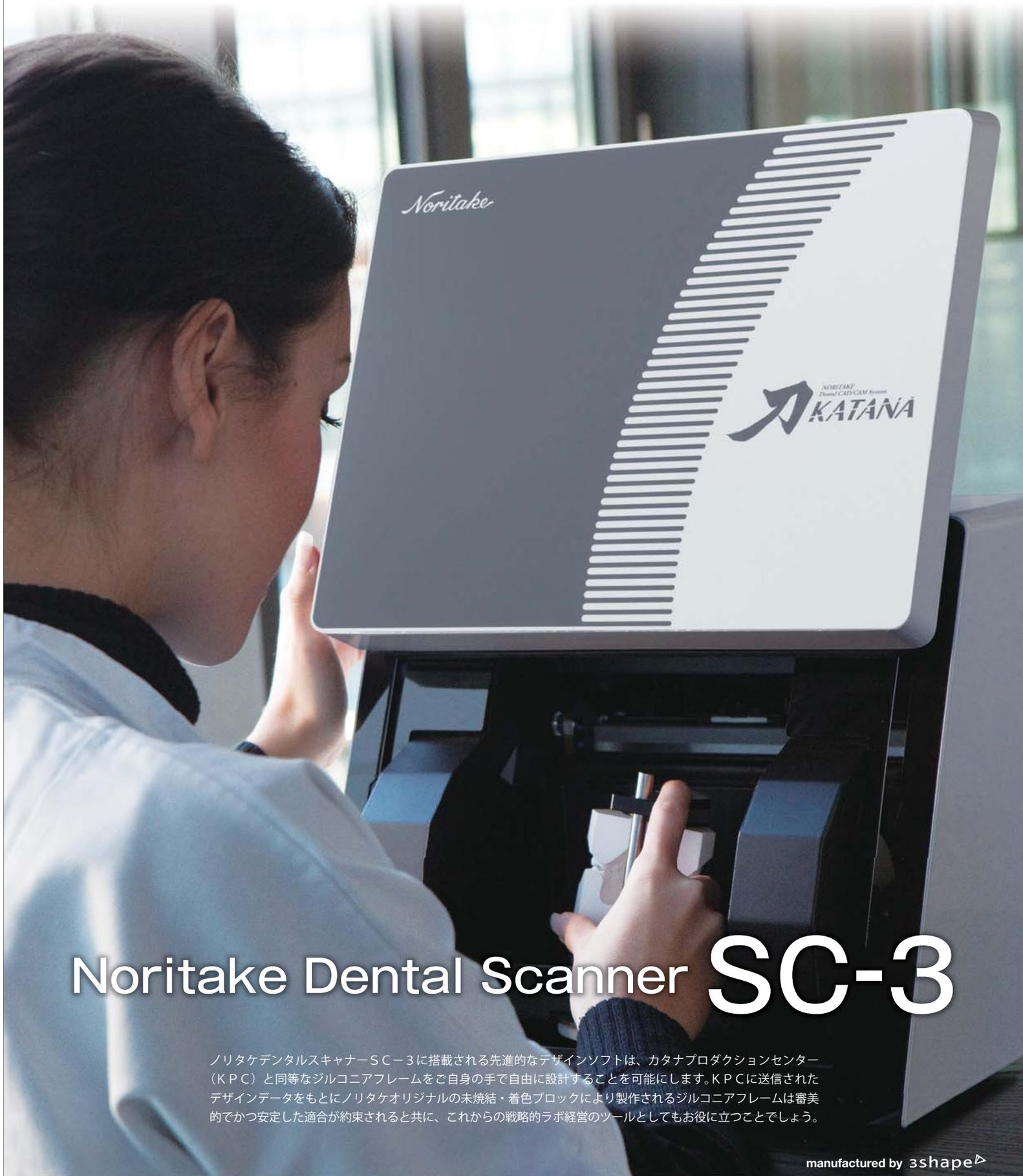

Noritake Dental Scanner SC-3

ノリタケデンタルスキャナーSC-3に搭載される先進的なデザインソフトは、カタナプロダクションセンター（KPC）と同等なジルコニアフレームをご自身の手で自由に設計することを可能にします。KPCに送信されたデザインデータをもとにノリタケオリジナルの未焼結・着色ブロックにより製作されるジルコニアフレームは審美的でかつ安定した適合が約束されると共に、これからの戦略的ラボ経営のツールとしてもお役に立つことでしょう。

manufactured by 3shape

思いどおりのデザインと、さらなる納期短縮を実現。



ノリタケデンタルスキャナー SC-3

(株)ノリタケデンタルサプライは、デンマーク・3shape社と共同で、カタナジルコニアフレーム設計用CADとして、ノリタケデンタルスキャナー SC-3を誕生させました。

■寸法 W340 X H290 X D330 mm	■スキャン方法 1レーザー+2カメラ方式	■設置模型の動き 回転、傾斜、水平移動
■重量 14Kg	■スキャン時間 約30秒(単冠)	■デザインソフト Dental Designer™
■付属 デスクトップPC(モニターレス)		



ノリタケデンタルスキャナー SC-3
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：23B2X10014290003
医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)


思い通りのデザインと、さらなる納期短縮を実現。

石こう歯列模型をスキャンし、高精度3Dデータとして専用PCに取り込みます。その後、専用のデザインソフト Dental Designer™でフレーム形状をデザインします。「シュリンク」、「リングサポート」、「Dスキャン」などの機能を活用することで、簡単な操作で作業が可能となります。出来上がったデータをカタナプロダクションセンターに送信すれば、切削および焼成が完了したジルコニアフレームを速やかにお届けします。プロダクションセンターへの模型送付作業がなくなり、納期短縮が実現できます。



適合精度

KATANAジルコニアブロックはノリタケオリジナルテクノロジーとして未焼結状態のブロックを切削加工し、かつ最適化された焼成条件により安定した焼成収縮を実現しました。これによりカタナジルコニアフレームの適合精度は、単冠からロングスパンブリッジまで高いレベルを実現します。

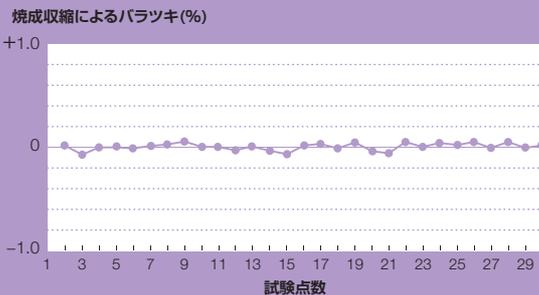

カラードブロック

全9色からの選択が可能です。ジルコニアパウダーに色付けをしておりますので、焼成後に形態調整などの加工を行っても、色調の変化や色むらは起こりません。またジルコニア専用陶材「セラビアンZR」とのコンビネーションにより、目的とするシェードを的確にコントロール出来ると共に、天然歯と同様な深みのある色調再現が可能となります。

フレームカラー	KT10	KT11	KT12	KT13	KT14	KT15	KT16	KT17	KT18
C/N対応シェード	EW00 EW0 EW 全ての色調(+SB)	NW0	EWY NW0.5 A1 NP1.5 B1 B2	A2 A3 NP2.5	A3.5 A4 (+SBA)	C1 D2 (B1) (B2)	B3 B4	C2 C3 C4 (+SBC)	D3 D4 (+SBD)

※SB:シェードベース



ノリタケカタナH-18(加工機)



ノリタケカタナF-1(焼成炉)

ノリタケカタナH-18
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：14B3X00019000007
医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)

ノリタケカタナF-1
歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器届出番号：25B2X10003000008
医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)

※ノリタケカタナジルコニアフレームをご発注いただくためには事前登録が必要となります。登録についてはお出りの歯科商店様、または最寄りの(株)モリタにご連絡いただき、登録用紙をご請求ください。

発売・製造販売	株式会社 ノリタケデンタルサプライ 愛知県みよし市三好町東山300 〒470-0293	製造販売	SKメディカル株式会社 滋賀県長浜市七条町305番地の1 〒526-0817	デジタルプロセス株式会社 神奈川県厚木市中町2-9-6 厚木会田ビル 〒243-0018
---------	--	------	---	---

販売	株式会社モリタ	■大阪本社/大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525 ■東京本社/東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
----	---------	---

www.dental-plaza.com