


管理医療機器
歯科用セメントキット

パナビア® V5

パナビア® V5で実現する

ワンランク上の補綴修復*

* 当社従来品と比較して

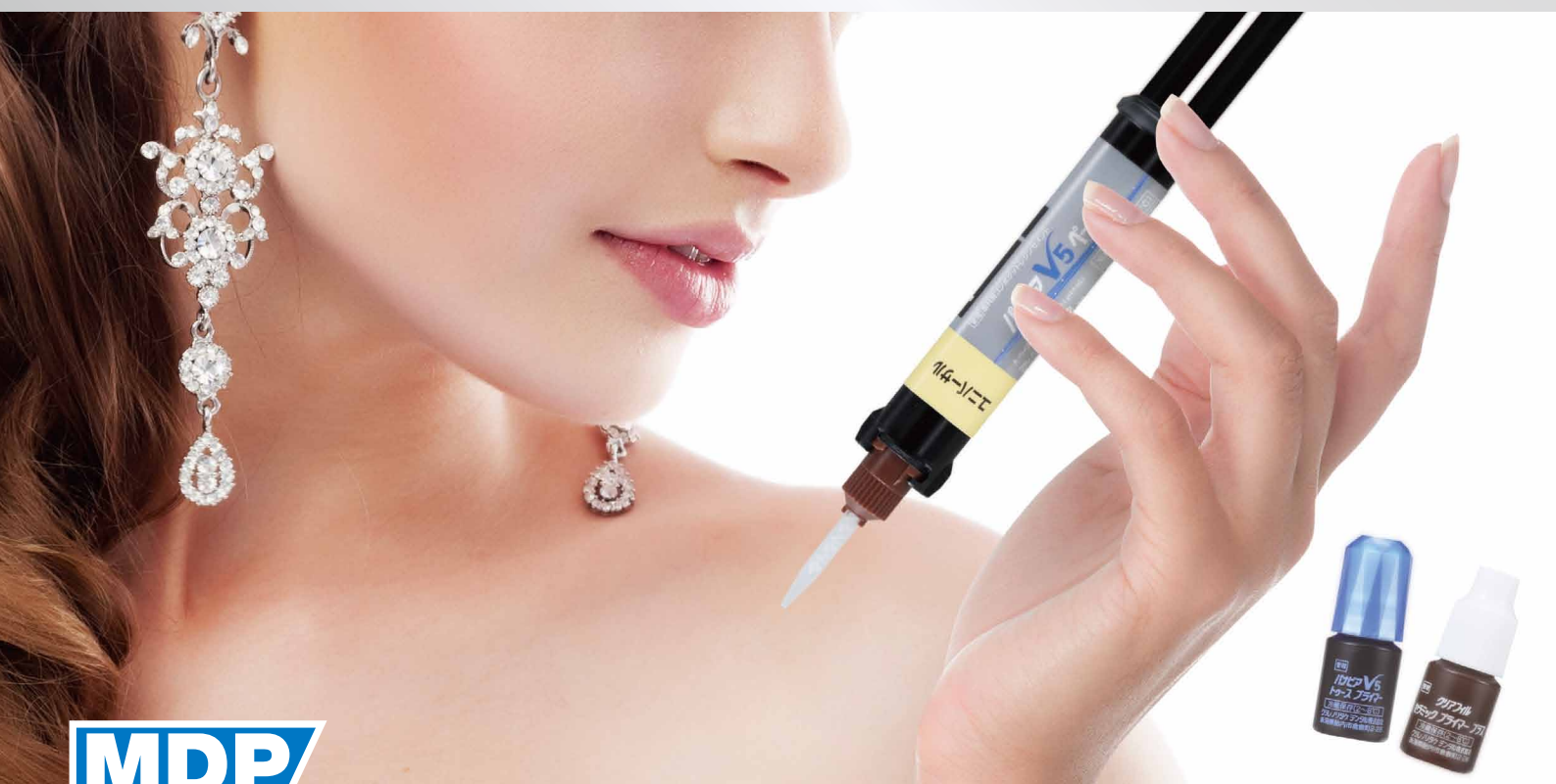




色調安定性に優れた5色の セメントペースト



“アミンフリー”の新規化学重合触媒※¹を導入。
BPO-アミン系触媒を採用した当社従来製品と比較して、
優れた色調安定性を発現します。

硬化物の色調安定性

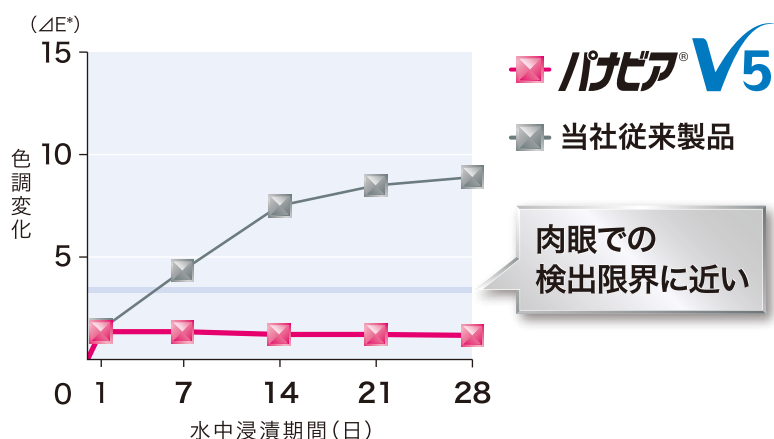

測定条件: 厚さ0.25mm、70℃水中浸漬後、白背景で測定
測定装置: 分光色差計 SE6000 (日本電色)、光源: D65/2
クラレノリタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。


審美修復におすすめです。



写真提供: 高輪歯科
加藤 正治 先生

① 1 ② ブリッジの接着

ユニバーサルを中心とした5つのシェードバリエーション

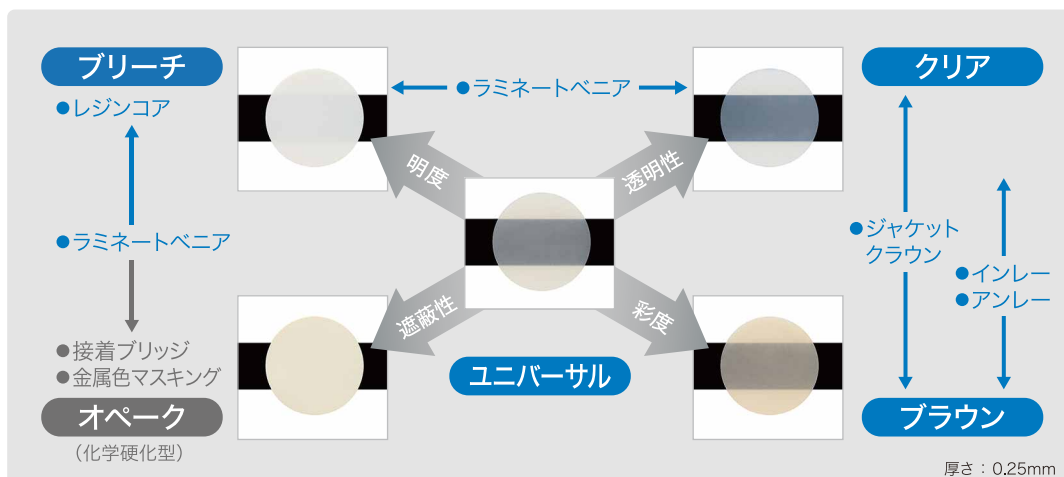

5色

● トライイン ペースト
接着前の試適で
色調確認が行えます。



の発売から30年


パナビア® V5”の誕生です。

高接着

パナビア® F2.0の 3倍の象牙質接着を実現※2

高活性な新規化学重合触媒※1の採用により、優れた歯質接着性を実現しました。特に象牙質接着性は、当社従来品と比べて大幅に向上。※2
パナビア® F2.0の**3倍の象牙質接着力**を有します。

歯質への接着強さ (牛歯、引張)

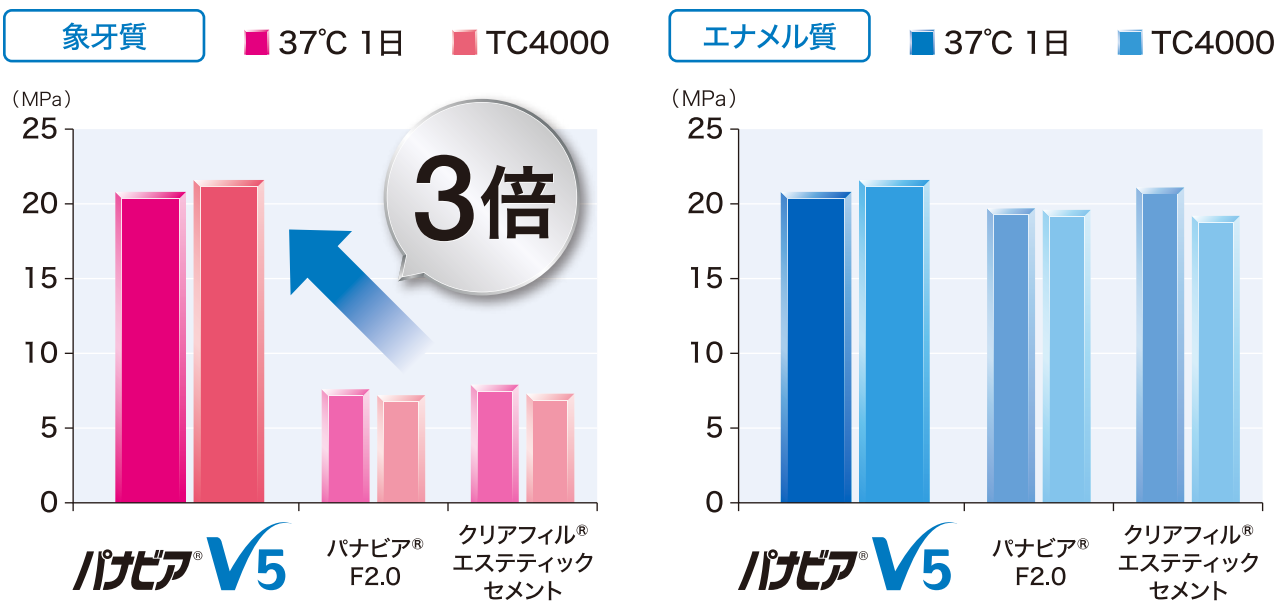

写真提供: 山手通り歯科 森田 誠 先生



ポスト、コアの接着
においても性能を
発揮します。

シンプル
な構成

2液だったセルフエッチングプライマーが1液に

» パナビア® V5 トゥース プライマー

新しい重合促進剤の採用により、
1液化を達成しました。



2本のボトルを
1本に!



支台歯には、
(歯質、レジンコア)
これ1本!!

クリアフィル® セラミック プライマー プラス

+ 金属の前処理にも適用可能
となりました。

シランカップリング剤に加え、リン酸エステル系モノマー (MDP®) も含有することから、
1本で下記の補綴物に適用可能です。

- 陶材
- ガラスセラミックス
- CAD/CAMレジン
- ハイブリッドセラミックス
- ジルコニア/アルミナ
- 金属



補綴物には、
これ1本!!

シンプルな操作ステップ

(使用用途 1) クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着。詳しくは添付文書をご確認下さい。

写真提供：高輪歯科 加藤 正治 先生



1 試適



2 補綴物の前処理



3 窩洞/支台歯の
処理



4 装着



5 余剰セメントを小筆等で
除去後マージン部を光照射



6 最終硬化

POINT 装着後はすみやかに余剰セメントを除去して下さい。

管理医療機器
歯科用セメントキット

パナビア® V5

医療機器認証番号：226ABBZX00106000



コンプリートキット

- ・パナビア® V5 ベースト(ユニバーサル)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 ベースト(クリア)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 ベースト(ブラウン)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 ベースト(ブリーチ)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 ベースト(オペーク)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ユニバーサル) 2.4 g (1.8 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(クリア) 2.4 g (1.8 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ブラウン) 2.4 g (1.8 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ブリーチ) 2.4 g (1.8 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(オペーク) 2.4 g (1.8 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL × 1本
- ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL × 1本
- ・K エッチャント シリンジ 3 mL × 1本
- ・付属品：ミキシングチップ(合着用) 30個、ミキシングチップ(エンド用) 10個、ガイドチップ(エンド用細) 10個、ニードルチップ(E) 20個、アプリケーションブラシ(ファイン<シルバー>) 50本、ディスクブラシ(黒) 50個、小筆ホルダー(黒) × 1本、混和血(FPN) × 1個

スターターキット (ユニバーサル)

- ・パナビア® V5 ベースト(ユニバーサル) 8.1 g (4.6 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ユニバーサル) 2.4 g (1.8 mL) × 1本
- ・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL × 1本
- ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL × 1本
- ・K エッチャント シリンジ 3 mL × 1本
- ・付属品：ミキシングチップ(合着用) 15個、ミキシングチップ(エンド用) 5個、ガイドチップ(エンド用細) 5個、ニードルチップ(E) 20個、アプリケーションブラシ(ファイン<シルバー>) 50本、ディスクブラシ(黒) 50個、小筆ホルダー(黒) × 1本、混和血(FPN) × 1個



関連製品

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント

パナビア® V5 ベースト

(ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク)

医療機器認証番号：226ABBZX00102000

・ 8.1 g (4.6 mL) × 1本

ミキシングチップ(合着用)

・ 20個

ミキシングチップ(エンド用)

・ 20個

ガイドチップ(エンド用細)

・ 20個

管理医療機器 歯科用エッチング材

K エッチャント シリンジ

医療機器認証番号：226ABBZX00089000

・ 容量：3mL

管理医療機器 歯科用色調適合確認材料

パナビア® V5 トライイン ベースト

(ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク)

医療機器認証番号：226ABBZX00103000

・ トライインベースト 2.4 g (1.8 mL) × 1本



管理医療機器 歯面処理材

パナビア® V5 トゥース プライマー

医療機器認証番号：226ABBZX00104000

・ 容量：4mL



管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料

クリアフィル® セラミック プライマー プラス

医療機器認証番号：226ABBZX00105000

・ 容量：4mL

●データは全てクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。●印刷のため実際の色調と異なる場合があります

●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

「パナビア® F2.0」 管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：224ABBZX00029000 「クリアフィル® エステティック セメント キット」 管理医療機器 歯科用セメントキット 医療機器認証番号：218ABBZX00095000



製品・各種技術
に関する
お問い合わせ

» クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 www.kuraraynoritake.jp

製造販売元

クラレノリタケデンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元

株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18

TEL.(06)6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15

TEL.(03)3834-6161

お客様相談センター：0800-222-8020

http://www.dental-plaza.com

連絡先

クラレノリタケデンタル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)

フリーダイヤル：0120-330-922