

KENDA®

DENTAL POLISHERS



義歯用アクリルレジン研磨材

チェアサイドでハイクラスな仕上げ磨きが可能
義歯の細部に届く形状

KENDA PLANUS

KENDA プラヌス

歯科用ゴム製研磨材

2ステップポリッシャー

- * ルージュ使用前の仕上げに
- * マウスピースのバリ取りに
- * 柄部2種類から選択可能 (RAタイプ、HPタイプ)
- * オートクレーブ可能

商品名 KENDA プラヌス

- RA 0600 アソート 12本入
- HP 6700 アソート 6本入



0601×3本 / 0608×3本 コース
0611×3本 / 0618×3本 ファイン

標準価格 4,200円 (税別)



6715×2本 / 6720×2本 コース
6815×1本 / 6820×1本 ファイン

標準価格 2,800円 (税別)

商品名 KENDA プラヌス

- RA コース 0601
- RA コース 0608
- RA ファイン 0611
- RA ファイン 0618

標準価格 2,200円 (税別) 単品 各6本入

- HP コース 6715
- HP コース 6720
- HP ファイン 6815
- HP ファイン 6820

標準価格 2,800円 (税別) 単品 各6本入

医療機器届出番号：13B1X00133000049

記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止

使用例



HPコース 6720 で荒研磨
小帯部に届きやすい形状



HPファイン 6820 で仕上げ研磨
ヘッドは取り回しが良いサイズで歯間乳頭も磨きやすい




RA コース 0608 を用いて内面を調整
ヘッドが小さいため細部まで届きやすい



HP コース 6720 でマウスピースのバリ取りに

写真提供：たかはし歯科 (東京都墨田区) 院長 高橋 和晃

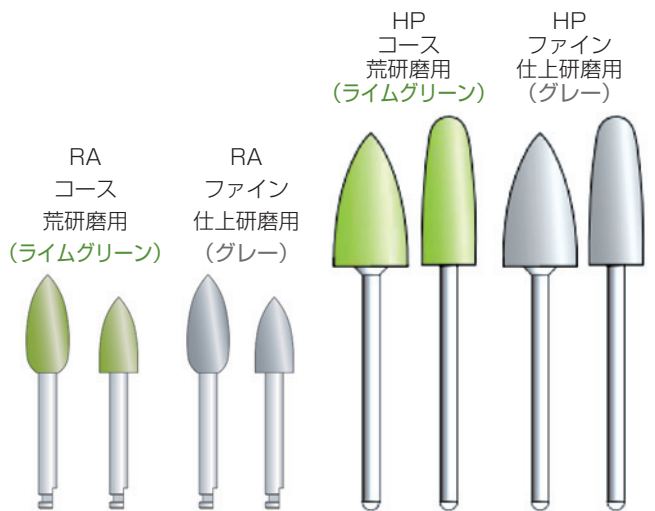

品番	0601	0608	0611	0618	6715	6720	6815	6820
推奨回転数	7,500 - 10,000rpm		5,000 - 7,500rpm		10,000 - 15,000rpm		10,000 - 15,000rpm	
最高許容回転数	10,000rpm		10,000rpm		15,000rpm		15,000rpm	



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL: <http://www.crossf.com> E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-3631-2204 FAX 03-3635-1060

お問い合わせは