

歯科接着用レジンセメント
スーパーボンド



Super-Bond

Dental Adhesive Resin Cement

Super-Bond is a self-cure dental adhesive resin cement based on MMA.

It contains a high performance bonding monomer, "4-META", and a catalyst, "TBB".

It shows excellent bond strength to tooth (enamel and dentin), metal, porcelain and dental resins.

For two decades it has been used extensively in a wide range of dental applications.

During this long period it has earned an excellent reputation for pulpal safety.

Super-Bond is widely known for its formation of a sound hybrid layer (resin impregnated layer) in both enamel and dentin.

This layer reinforces the tooth surface against recurrent caries and prevents the postoperative hypersensitivity.

高性能をさらに使いやすく。

スーパーボンドの操作性

もっと**筆積**を簡単に!!

主に動揺歯固定や矯正用途で使用しやすいように、筆積法に特化したセットができました。

New

筆積法専用のポリマー粉末で筆積操作が簡単に。



ポリマー粉末
筆積クリア



簡単ボトルタイプ

計量スプーンを使用せずに、ポリマー粉末を出せます。



簡単採取

ポリマー粉末の液馴染みを良くすることで、**ポリマー玉**の採取がより簡単になりました。

New

簡単にエッチングができる「高粘度レッド」。



表面処理材 高粘度レッド
＜エナメル質用＞



ピンポイントエッチング

流れずとどまる高粘度レッドは、ノズルから**直接ピンポイントエッチング**ができるシリンジタイプになりました。

クイックモ
チェアタイム



クイックモノマー液

New

より使いやすく、改良された**充実**

用途や好みに応じて使い分けができる「ディスポチップ」シリーズ。



ディスポチップ筆積S(緑)



ディスポチップ筆積L(ピンク)



ディスポチップ筆積LL(紫)



ディスポチップ混和(青)

ディスポチップの装着方法

ケース上部を右方向(または左方向)へスライドさせ、直接筆柄に装着します。
手で触れることがないので衛生的です。



が大幅にアップしました!

もっと混和を簡単に!!

主に補綴物・ポストコアセット用途で使用しやすいように、
混和法に特化したセットができました。

New


混和法専用のポリマー粉末なら冷却なしで、余裕の操作時間。



ポリマー粉末
混和ティースカラー



ポリマー粉末
混和ラジオオペク

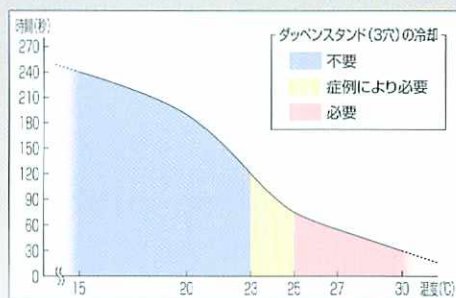

混和ティースカラーの操作時間

25℃以下の室温なら、ダッペンスタンド(3穴)を、冷却することなく使用できるので、余裕を持って操作できます。

ミキシングステーションで冷却すれば、更に操作時間が長くなります。

また、従来のポリマー粉末より**余剰セメントの除去がしやすくなりました。**

ノーマー液が
を短縮します!

New

簡単にエッチングができる「高粘度グリーン」。

クイックモノマー液
でシャープに硬化。
硬化待ち時間が大幅
に短縮します。



表面処理材 高粘度グリーン
＜象牙質用(研削エナメル質を含む)＞




簡単アクセス

高粘度レッドより緩めの操作感で広い
範囲に直接エッチングできます。


**スポンジで塗布しにくかった窩洞、ポスト
ホール等もエッチングしやすいシリンジ
タイプになりました。**

の付属品ラインナップ。

粉材が投入しやすい「計量スプーン Standard」。

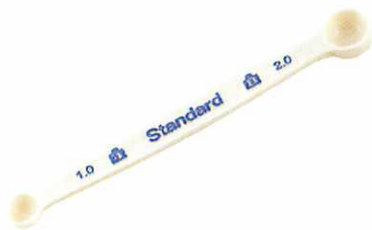

計量スプーン Standard

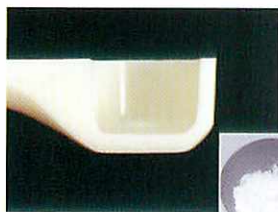

従来品



新製品

カップ内面の形状を円形状に改良
することで、粉材の投入時の飛散
が軽減されました。

また、モノマー液の滴下量をイ
ラストで表示しました。




「ダッペンスタンド(3穴)」と「ディスポダッペンカップ」でらくらくメンテナンス。



ディスポダッペンカップが操作後の
片付けをスムーズにします。

各種前処理材が
滴下できます。

筆が置けます。

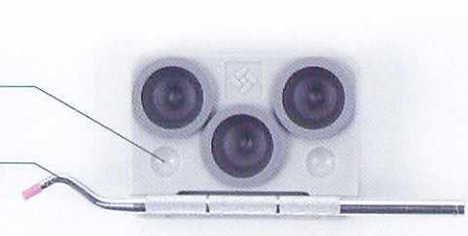

スーパーボンドの4大特長

1 優れた接着性

キャタリスト(TBB)により、**水・空気(酸素)のあるところから固まる**ため、良質な樹脂含浸層を形成し、高い接着力と接着耐久性を発揮します。

2 衝撃に強い

スーパーボンドの**硬化体は柔らかく粘り強いクッション**となり、衝撃を柔軟に吸収します。

3 歯髄の保護

良質な樹脂含浸層が**細菌や外部刺激をシャットアウト**し、歯髄を保護します。

4 多目的に使える

矯正・動揺歯固定・補綴物・築造体のセト・裏層等、**接着面積や症例に合わせて、多目的に使用**できます。

多目的に使用することを考えて
収納性もアップしました!

スーパーボンド 収納例

筆積セットと混和セットをまとめて収納ができます。



ディスプレイも収納できます。

このような収納もできます。

スーパーボンドシリーズ<セット>

筆積

スーパーボンド 筆積セット

標準価格 ¥20,000




筆積法に特化したセット構成になっています。

筆積専用の粉材によりポリマー玉の採取がより簡単になり、矯正や動揺歯固定に最適です。

クイックモノマー液	1本(10mL)	ディスボチップ筆積LL(紫)	1ケース
キャタリスト	1本(0.7mL)	ニードルチップ(23G)	5個
ポリマー粉末筆積クリア	1本(3g)	ニードルキャップ(赤)	1個
表面処理材 高粘度レッド	1本(3mLシリンジ)		
ダッペンスタンド(3穴)	1個		
ディスボダッペンカップ	20枚		
ディスボ用筆柄(曲)	1本		
ディスボチップ筆積L(ピンク)	1ケース		

キャタリストの代わりにキャタリストVを組み込む場合があります。

筆積法での操作ステップと臨床応用例(動揺歯固定)

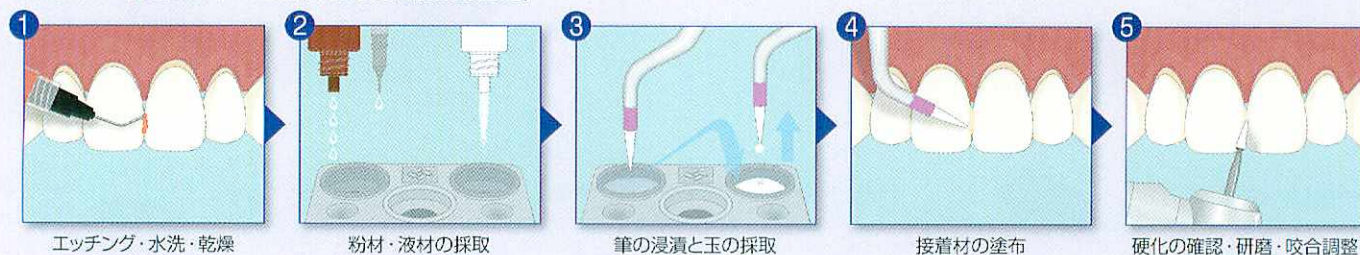

混和

スーパーボンド 混和セット

標準価格 ¥22,000



混和法に特化したセット構成になっています。

混和専用の粉材により、ダッペンディッシュを冷却しなくても常温(25℃以下)で使用できるようになりました。

クイックモノマー液	1本(10mL)	ディスボ用筆柄(曲)	1本
キャタリスト	1本(0.7mL)	ディスボチップ混和(青)	2ケース
ポリマー粉末混和ティースカラー	1個(3g)	ニードルチップ(23G)	5個
ポリマー粉末混和ラジオパーク	1個(5g)	ニードルキャップ(緑)	1個
表面処理材 高粘度グリーン	1本(3mLシリンジ)		
ダッペンスタンド(3穴)	1個		
ディスボダッペンカップ	20枚		
計量スプーン Standard	1本		

キャタリストの代わりにキャタリストVを組み込む場合があります。

混和法での操作ステップと臨床応用例(金属ポストコアセット)



C&B

スーパーボンド C&Bセット

標準価格 ¥29,000



従来の構成をそのまま継承しています。

モノマー液	1本(10mL)	計量スプーン Standard	1本
キャタリスト	1本(0.7mL)	計量スプーン Small	1本
ポリマー粉末クリア	1個(3g)	ディスボ用筆柄(直)	1本
ポリマー粉末ティースカラー	1個(3g)	ディスボ用筆柄(曲)	1本
表面処理材レッド	1本(5mL)	ディスボチップ筆積S(緑)	1ケース
表面処理材グリーン	1本(5mL)	ディスボチップ筆積L(ピンク)	1ケース
ダッペンディッシュ(陶器)	1個	ディスボチップ混和(青)	2ケース
スポンジ(L・S)	1箱		

キャタリストの代わりにキャタリストVを組み込む場合があります。

スーパーボンド<構成品・付属品・関連製品>

スーパーボンドの構成品及び単品

重合触媒



キャタリスト 0.7mL
¥14,700

液材



モノマー液 10mL
¥6,900



クイックモノマー液 10mL
¥6,900

ポリマー粉末

New



筆積クリア 3g
¥2,400

New



混和ティースカラー 3g
¥2,600

New



混和ラジオパーク 5g
¥3,300

クリア 3g
¥2,400



オパークアイボリー 3g
¥2,400

ティースカラー 3g
¥2,400



オパークピンク 3g
¥2,400

アイボリー 3g
¥2,400



ラジオパーク 5g
¥3,100

表面処理材

歯 面

エナメル質



表面処理材レッド 5mL
¥2,400

New



New

表面処理材 高粘度レッド 3mL
¥2,400



ニードルチップ(23G) 50個
ニードルキャップ(赤) 2個
¥1,500

象牙質(研削エナメル質を含む)



表面処理材グリーン 5mL
¥2,400

New



New

表面処理材 高粘度グリーン 3mL
¥2,400



ニードルチップ(23G) 50個
ニードルキャップ(緑) 2個
¥1,500

付属品及び単品

New



ダッペンスタンド(3穴)
¥1,000

New



ディスボダッペンカップ 40枚
¥800



ダッペンディッシュ(陶器)
¥2,800



スポンジ(L・S)
¥930

New



ディスボチップ混和(青) 10本
¥850

New



ディスボチップ筆積S(緑) 10本
¥850

New



ディスボチップ筆積L(ピンク) 10本
¥850

New



ディスボチップ筆積LL(紫) 10本
¥850

New



計量スプーン Standard
¥300



計量スプーン Small
¥300



計量スプーン Large
¥300



ディスボ用筆柄(曲)
¥850



ディスボ用筆柄(直)
¥850

関連製品

金属面(金合金・Pd合金・白金加金等)



V-プライマー 3mL
¥3,200

陶材面(ジルコニア・ポーセレン・硬化した硬質レジン)



ポーセレンライナー M A液 5mL/B液 5mL
¥9,800

ダッペンディッシュ冷却器



ミキシングステーション
¥4,000

歯科接着用レジセメント スーパーボンド (管理医療機器) 医療機器認証番号 221AABZX00115000

歯科金属用接着材料 V-プライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号 20600BZZ00452000


歯科セラミックス用接着材料 ポーセレンライナー M (管理医療機器) 医療機器認証番号 20600BZZ00290000

歯科用エッチング材 表面処理材 レッド (管理医療機器) 医療機器認証番号 21600BZZ00588000


歯科用エッチング材 表面処理材 高粘度レッド (管理医療機器) 医療機器認証番号 21200BZZ00294000

歯科用エッチング材 表面処理材 グリーン (管理医療機器) 医療機器認証番号 21600BZZ00589000

歯科用エッチング材 表面処理材 高粘度グリーン (管理医療機器) 医療機器認証番号 21600BZZ00590000

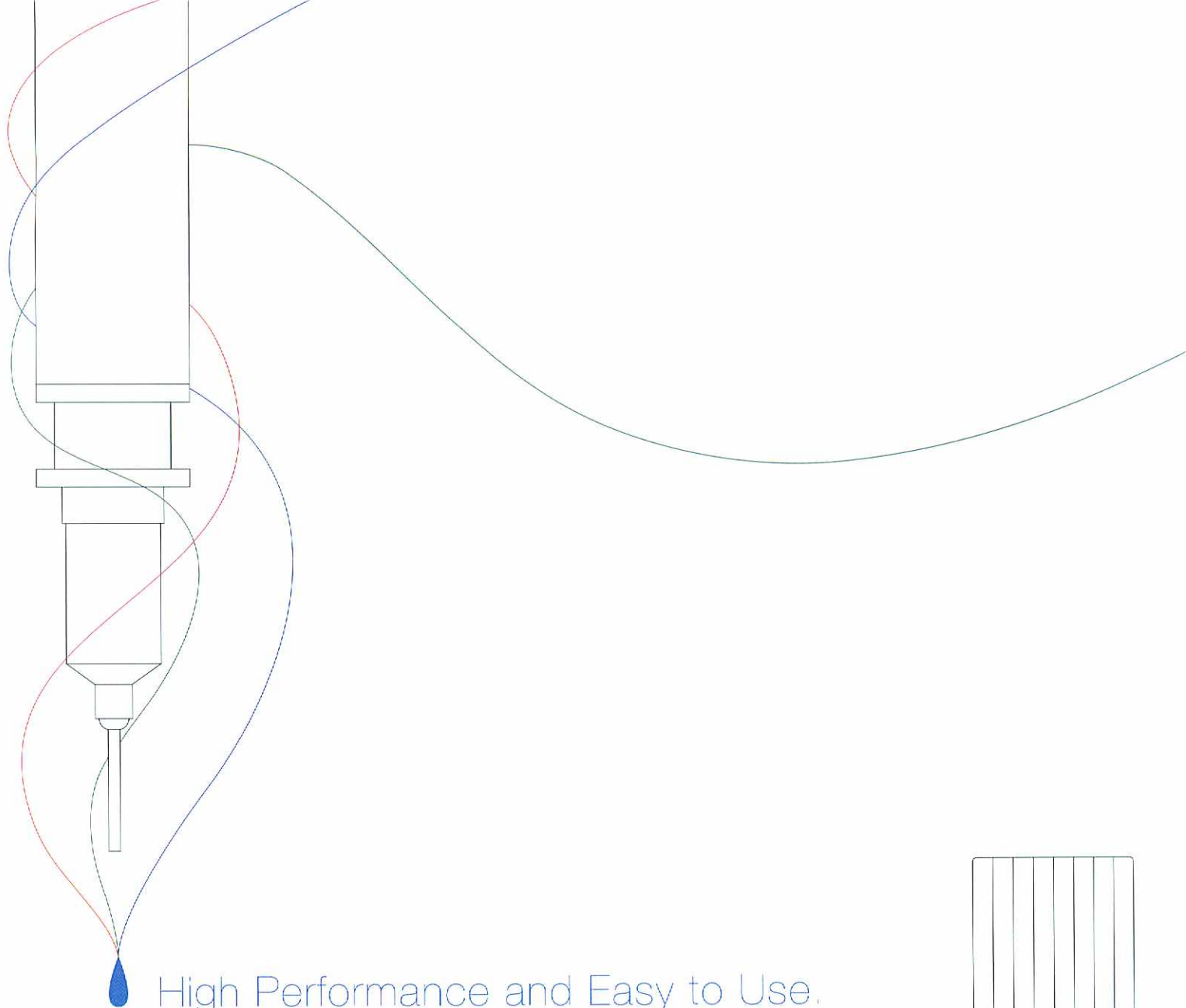

High Performance and Easy to Use.

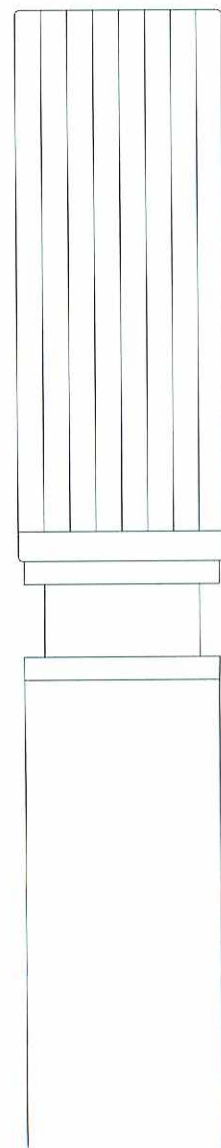

資料請求・お問い合わせ先

 サンメディカル株式会社

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 TEL:077-582-9980

東京オフィス / 〒113-0034 東京都文京区湯島3-13-8 TEL:03-3835-9089

☎ 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間: 月~金(祝日を除く) 午前9:00~午後5:30

<http://www.sunmedical.co.jp>

■ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

■印刷のため色調は実物と異なります。

■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。

■標準価格・表示記載は2009年11月24日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。