

For better dentistry

DENTSPLY
SANKIN

Cavitron Plus
Implant version



インプラント・メンテナンス専用

キャビトロン プラス

マグネット方式だからインプラントにやさしい超音波スケーラー

✿ フィクスチャー、アバットメントを傷つけない

✿ インプラント体や補綴物にやさしい

✿ 適切なパワーでスケーリングを継続

デンツプライ三金株式会社
<http://www.dentsply-sankin.com>

※ キャビトロン プラス インプラント バージョン

主な特徴

※ フィクスチャー、アバットメントを傷つけない


専用インサートとプラスチックチップを使用することにより、傷つきやすいインプラントを傷つけずにメンテナンスができます。

※ インプラント体や補綴物にやさしい

マグネット方式なのでチップが楕円運動を描き、振動がチップの側面から発振されるためインプラントにかかる衝撃が分散されます。

※ 適切なパワーでスケーリングを継続

歯肉縁下のスケーリングに使用する安定した弱いパワーのブルーゾーンに設定することで、適切なインプラント・メンテナンスが行えます。

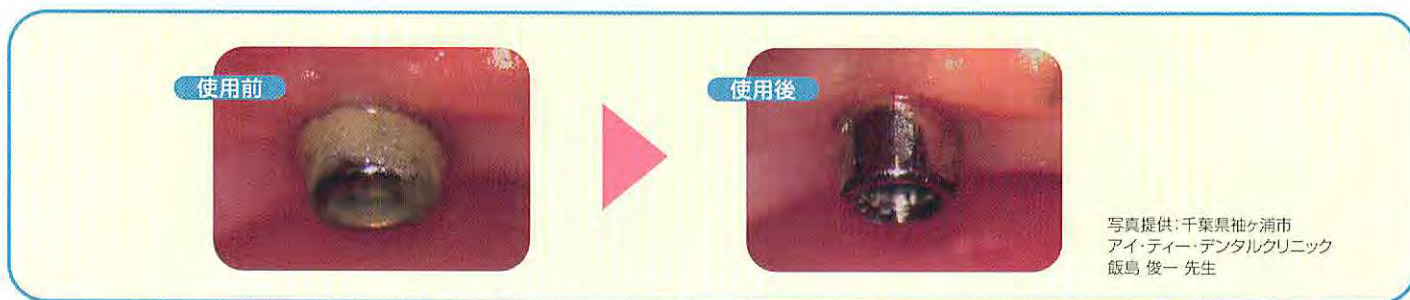

写真提供：千葉県袖ヶ浦市
アイ・ティール・デンタルクリニック
飯島 俊一 先生

※ ご注意


※インプラント・メンテナンスの際は2から3の弱いパワーでご使用下さい。
※効能効果、使用方法、使用上の注意等は、添付文書または使用説明書でご確認下さい。

製品紹介




キャビトロン プラス インプラントバージョン
希望小売価格：198,000 円

※330 ケーブルローテーション システム、SWC(スマート・ウォーター・コントローラ)採用

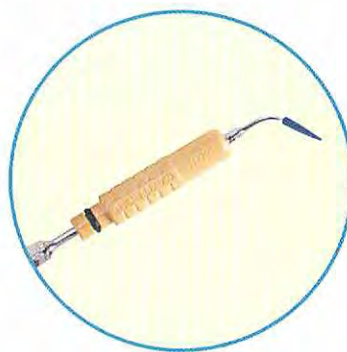

インプラントインサート
30K(1本)
希望小売価格：20,000 円

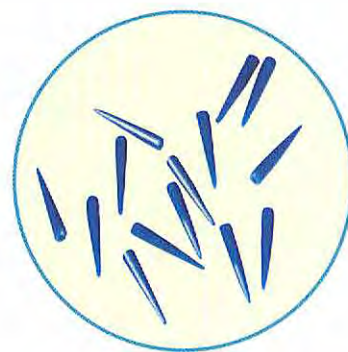

ディスポーザブルチップ
ソフトチップ(100個入り)
希望小売価格：15,000 円

医療機器認証番号：219AGBZX00091000

表示価格は、2010年8月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造
販売元

デンツプライ三金株式会社

那須工場 / 〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382 番 11

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10

札幌 / TEL:011-222-4101 FAX:011-222-2344 名古屋 / TEL:052-452-2151 FAX:052-452-2155
仙台 / TEL:022-373-5700 FAX:022-373-5133 大阪 / TEL:06-6386-9350 FAX:06-6386-9374
東京 / TEL:03-5114-1002 FAX:03-5114-1036 福岡 / TEL:092-411-6326 FAX:092-472-3880
関東 / TEL:03-5114-1003 FAX:03-5114-1036 登録号 / TEL:03-5114-1025 FAX:03-5114-1041

カスタマー・サービス・センター  0120-789-123 FAX:0120-789-129
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

<http://www.dentsply-sankin.com>