

air N GO

BEAUTY N HEALTH

歯を美しく 健康に

歯面清掃器

エア N ゴー (アンド)



ストレスフリーの予防ケア

患者に優しい 出血や痛みが少ない

ターゲットを外さず確実にスプレー 診療室内のパウダー飛散を防ぐ

安定したスプレー噴射 一定量のパウダーを安定的に供給します。

ポリッシング・・・スケーリング後の仕上げ、ホワイトニングの前
クリーニング・・・歯間部、小窩裂溝、エッチングや矯正ブラケット装着前の歯面
除去・・・・・・・・バイオフィルム、プラーク、ステイン、暫間セメントの残渣



臨床写真提供: E. Normand博士



フレーバーが選べる
クリーニング
パウダー



CLASSIC

PEARL



装着簡単なパウダータンク

- パウダータンクはバイオネット型装着システムを採用。素早く簡単に装着可能。
- パウダータンクは透明なのでパウダーの残量が一目でわかります。



手にしっかりと馴染むフォルム

- 正確・迅速な処置:エア N ゴーのハンドピースは軽量で360°回転可能なのでアクセスしづらい部位も簡単にケア。



- ハンドピースには滑り止めシリコンリングがついているので握りやすく、誤って滑り落とす危険性が減り、疲れにくく安心して使用できます。



- ハンドピースヘッドのパーツを付け替えることにより大きな手にも小さな手にも対応。



- タンクのキャップにあるストップパウダー機能によりパウダーの供給をストップし、エアと水だけを噴射することができます。術部の洗浄だけでなく、ハンドピース滅菌前に内部を洗浄することができます。



衛生的

エア N ゴーのノズル、ヘッド、フロントプラスチックボディはオートクレーブ滅菌が可能。全てのパーツは清掃可能なので目詰まりを防止できます。



お掃除も簡単!


エア N ゴー (アンド)

専用パウダー


エナメル質、歯肉、歯根面を傷つけないエア N ゴー専用パウダーは“クラシック”パウダー 5種類と“パール”パウダー 1種類があります。

“クラシック”パウダー

- 100%天然アロマやエッセンシャルオイルをベースにしたフレーバー付なので塩辛さがなく、爽やかな使用感です。
- 重炭酸ナトリウムを主成分としており、詰まりにくく疎水性があります。
 - 水に触れると微粒子が僅かに収縮し、研磨力が増します。
 - 次に、パウダーがゆっくりと溶け出すので周辺組織を傷つけず、目詰まりも防ぎます。
- 痛みや出血を軽減するために研究開発された粒子サイズと形状。
- 包装形態はボトルタイプとスティックタイプがあります。

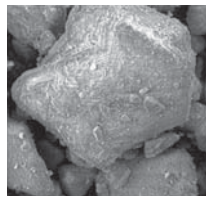

▲ 丸みを帯びたエアNゴー クラシックパウダーの粒子形状 ×1000

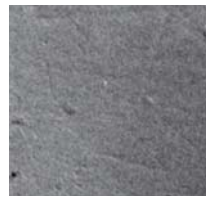

▲ パウダー使用後のエナメル質無傷 ×300



無香料

コーラ

ラズベリー

ミント

レモン

[容量:250g/1本]



[容量:20g X50本入]


“パール”パウダー

炭酸カルシウムをベースにした無味の“パール”パウダーは敏感な組織に優しい高分子微粒子でできており、プラークやステインを素早く除去します。

- エナメル質を傷つけない
- 痛みを軽減
- 塩分摂取制限のある患者さんにも安心して使えるナトリウムフリー



[容量:250g/1本]

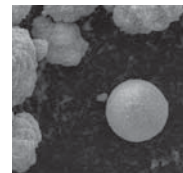

▲ パールパウダーの粒子 ×1000

写真提供:フランス国立科学研究センター ボルドー固体材料化学研究所

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020224008

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020224013

セット内容

■ エア N ゴー キャリングケース



- エア N ゴー 本体 1
- アダプタータービンコード 1
- [カボマルチフレックス、ピアンエア、NSK、W&H、シロナ、ミッドウエスト4ホールのいずれか1本]
- ショートヘッド 1
- ロングヘッド 1
- 歯肉縁上用ノズル(120°) 1
- パウダータンク(ブルー) 1
- スティック状クラシックパウダー 4
- スティック状パールパウダー 1
- クラシックペパーミントボトル 1

仕様



- ハンドピース寸法
 - ロングヘッド装着時 205mm
 - ショートヘッド装着時 193mm
- 水流量 15mL/分 ± 5mL/分
- 駆動空気圧 最高4bar

オプション

■ 90°ノズル



管理医療機器 医療機器認証番号 224ALBZX00036000



サテレック社
アクテオングループ

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス2F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>