

# MANI<sup>®</sup> NiTiハンドインスツルメント

## NiTi HAND INSTRUMENTS

Root canal enlargement  
Lateral condensation of root canal filling  
Vertical condensation of root canal filling



MANI, INC.


FOR ADVANCED TREATMENT — 高度な治療のために —

**NiTi フレアファイル**

**NiTi Hファイル**

**NiTi フレアフィンガースプレッター**

**NiTi プラガー**

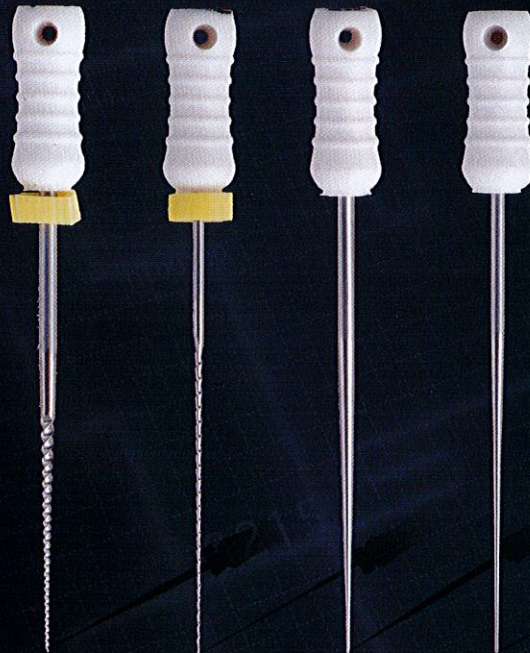

**NiTi**  
Nickel Titanium

# NiTi 特性により、湾曲根管への追従をさらに可能に!

## NiTi フレアーファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011110  
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル  
販売名 マニーフレアーファイルNiTi

形状記憶特性を  
プラス!

形状記憶特性をプラスしたことにより柔軟性が増し、ファイル先端へのプレカーブ付与を可能に。横断面形状を三角形にすることで、更に柔軟性、切削性を高めました。

より少ない本数で根管口から  
根尖孔に至るフレアー形成を可能に!


根管充填には6/100~7/100テーパの根管形態が望ましいと報告されており、フレアーファイルによる形成で5/100テーパ以上の形態が容易に得られます!

驚きの切削力!


テーパ: 5/100  
規格: #15, #20, #25, #30, #35, #40, ASS  
長さ: 21mm, 25mm

理想的なテーパ  
6/100~7/100


症例 不可逆性歯髄炎

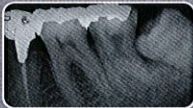


〈症例提供〉  
岐阜県恵那市開業  
林 正規 先生

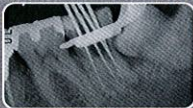

試適  
NiTi フレアーファイル  
(#20)

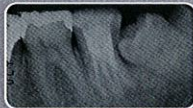

根充直後  
NiTi フレアーフィンガー  
スプレッター (#20)

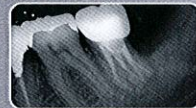

11ヶ月予後

標準価格  
(6本入/ケース)

4,700円


## NiTi フレアーフィンガー スプレッター

医療機器届出番号 09B1X00006006030  
一般医療機器 一般的名称: 歯科用根管スプレッダ  
販売名 マニスプレッター-NiTi

形状記憶特性を  
プラス!

ファイルと同じハンドルの仕様の為、  
回転や加圧方向の調整や  
挿入操作が容易に!

5/100のテーパの為、  
軽い加圧によりアクセサリポイント  
の必要な空隙を確保!

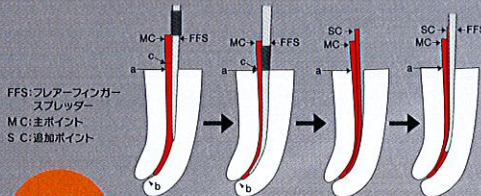

側方  
加圧充填

標準価格  
(6本入/ケース)


4,000円

テーパ: 5/100  
規格: #15, #20, #25, #30, #35, #40, ASS  
長さ: 21mm, 25mm

## NiTi Hファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011100  
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル  
販売名 マニーフレアーファイルNiTi

エンジンファイルでは得られにくい、  
ハンドファイルならではの感覚を!  
特に湾曲根管、根尖付近の切削に有効!

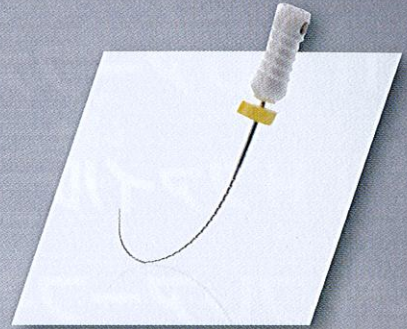

標準価格  
(6本入/ケース)

4,000円


テーパ: 2/100  
規格: #15, #20, #25, #30, #35, #40, ASS  
長さ: 21mm, 25mm

## NiTi プラグー

医療機器届出番号 09B1X00006007020  
一般医療機器 一般的名称: 歯科用根管プラグ  
販売名 マニープラグー-NiTi

2/100に比べ  
垂直に圧が伝わりやすい  
3.5/100テーパを採用!

ハンドファイルにより、  
圧の調整や操作が容易に!

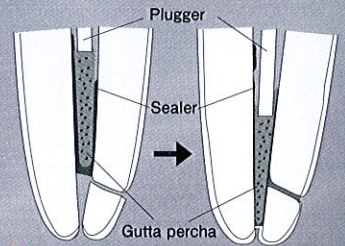

垂直  
加圧充填

標準価格  
(6本入/ケース)

4,000円

テーパ: 3.5/100  
規格: #15, #20, #25, #30, #35, #40, ASS  
長さ: 21mm, 25mm

⚠ 製品ご使用前に添付文書を必ずお読みください

有限会社 マルヤマ歯科商店

製造販売 **MANI**  
MANI, INC. マニ株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 TEL:028-667-1811(代)  
【歯科営業】TEL:028-667-8591/FAX:028-667-8593  
URL: <http://www.mani.co.jp>

発売 株式会社モリタ

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL:06-6380-2525  
東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 TEL:03-3834-6161



D05910