

MANI® NiTiハンドインストゥルメント

NiTi HAND INSTRUMENTS

Root canal enlargement
Lateral condensation of root canal filling
Vertical condensation of root canal filling



MANI, INC.

FOR ADVANCED TREATMENT — 高度な治療のために —

NiTi フレアーファイル

NiTi Hファイル

NiTi フレアーフィンガースプレッター

NiTi プラガー



NiTi

Nickel Titanium

NiTi 特性により、湾曲根管への追従をさらに可能に!

NiTi フレアーファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011110
一般医療機器 一般的名称:歯科用ファイル
販売名 マニーFファイルNiTi

形状記憶特性を
プラス!

形状記憶特性をプラスしたことにより柔軟性が増し、ファイル先端へのプレカブ付与を可能に。横断面形状を三角形にすることで、更に柔軟性、切削性を高めました。

より少ない本数で根管口から
根尖孔に至るフレアー形成を可能に!

根管充填には6/100~7/100テーパの根管形態が望ましいと報告されており、フレアーファイルによる形成で5/100テーパ以上の形態が容易に得られます!

驚きの切削力!

テーパ:5/100
規格:#15、#20、#25、#30、#35、#40、ASS
長さ:21mm、25mm

理想的なテーパ
6/100~7/100

症例 不可逆性歯髄炎



術前

〈症例提供〉
岐阜県恵那市開業
林 正規 先生


標準価格
(6本入/ケース)
4,700円



試適
NiTiフレアーファイル
(#20)



根充直後
NiTiフレアーフィンガー
スプレッター (#20)

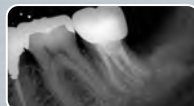

11ヶ月後

NiTi フレアーフィンガー スプレッター


医療機器届出番号 09B1X00006006030
一般医療機器 一般的名称:歯科用根管スプレッダ
販売名 マニースプレッターNiTi

形状記憶特性を
プラス!

ファイルと同じハンドルの仕様の為、
回転や加圧方向の調整や
挿入操作が容易に!

5/100のテーパの為、
軽い加圧によりアクセサリポイント
の必要な空隙を確保!

FFS:フレアーフィンガー
スプレッター
M C:主ポイント
S C:追加ポイント

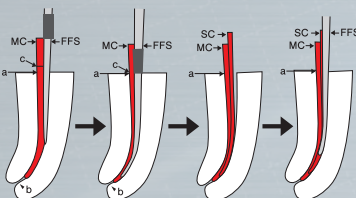

側方
加圧充填


標準価格
(6本入/ケース)
4,000円

テーパ:5/100
規格:#15、#20、#25、#30、#35、#40、ASS
長さ:21mm、25mm

NiTi Hファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011100
一般医療機器 一般的名称:歯科用ファイル
販売名 マニーHファイルNiTi

エンジンファイルでは得られにくい、
ハンドファイルならではの感覚を!
特に湾曲根管、根尖付近の切削に有効!

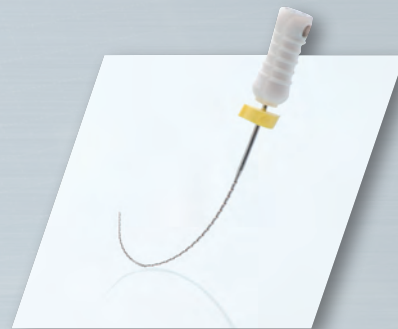

標準価格
(6本入/ケース)
4,000円


テーパ:2/100
規格:#15、#20、#25、#30、#35、#40、ASS
長さ:21mm、25mm

NiTi プラグー

医療機器届出番号 09B1X00006007020
一般医療機器 一般的名称:歯科用根管プラグ
販売名 マニープラグーNiTi

2/100に比べ
垂直に圧が伝わりやすい
3.5/100テーパを採用!

ハンドファイルにより、
圧の調整や操作が容易に!

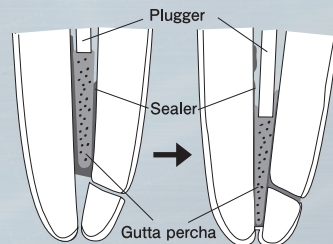

垂直
加圧充填

標準価格
(6本入/ケース)
4,000円

テーパ:3.5/100
規格:#15、#20、#25、#30、#35、#40、ASS
長さ:21mm、25mm

⚠ 製品ご使用前に添付文書を必ずお読みください

製造販売 **MANI**
MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 TEL:028-667-1811(代)
【歯科営業】TEL:028-667-8591 / FAX:028-667-8593
URL: <http://www.mani.co.jp>

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL:06-6380-2525
東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 TEL:03-3834-6161



D05910