

YOSHIDA

洗練されたタッチ操作で
高精度なレーザー診療を

OPELASER

— Tokyo - Innovating since 1985 —



未来へ進み続けるオペレーターブランド

OPELASER

PRO-X

無断転載禁止

©発売元：株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

©製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

コンタクト
センター **0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金9:00～17:30 土9:00～17:00 (日曜・祝祭日を除く)



C02700/2025年5月/◎120/新

Design concept

診療室に溶け込み 高精度なレーザー診療をサポート

先進的かつスタイリッシュなデザインで、
新たなオペレーターの佇まいを表現しました。

Cutline

直線ラインを効かせた診療室に溶け込む
スタイリッシュなデザイン

Centerpress

ボディをコンパクトに見せる
視覚的効果と先進性を表現

Flatpanel

洗練された全面タッチパネルで
操作性と清掃性を向上

Highpower
最大出力
15W




Focused
焦点スポット径
 $\phi 0.32\text{mm}$




連続照射(CWモード)

オペレーターPRO-Xは、
最大出力15Wのハイパワー。
チェアタイムの短縮をサポートします。

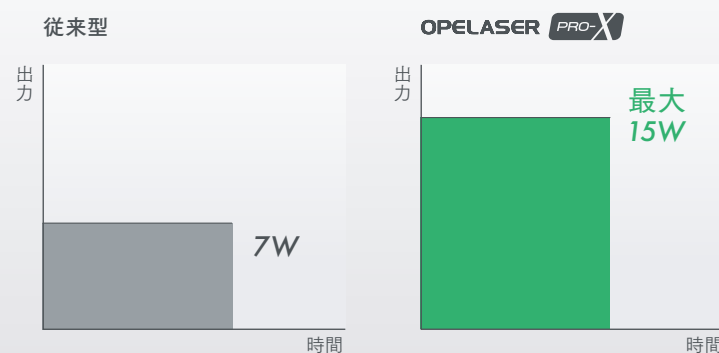

照射範囲


■ フォーカス照射範囲[切開・蒸散]
□ デフォーカス照射範囲

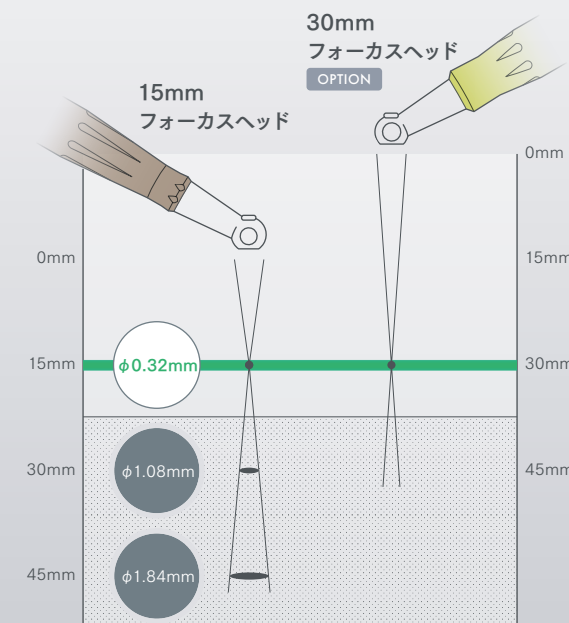

YOSHIDA
Technology

焦点スポット径


集光性の高いマニピュレータータイプのオペレーター
PRO-Xは、焦点スポット径 $\phi 0.32\text{mm}$ 。

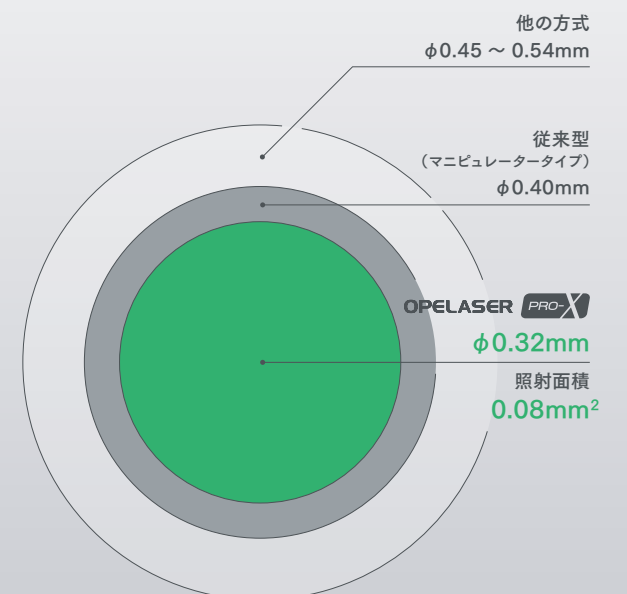

YOSHIDA
Technology

ブランド伝統の マニピュレーター

関節内部に配置した6枚のミラーがレーザー光を反射し、シャープに導きます。例えるなら、1.6m先の針穴に糸を通すような繊細さを要する高度な組み立て技術が、高精度なレーザー照射を実現しています。

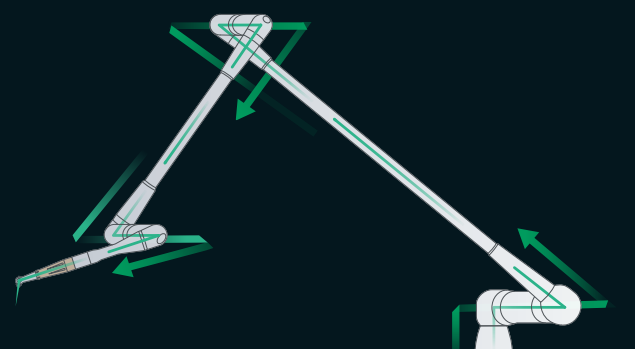


Scanning

円形スキャン機能



Ergonomic


人間工学に基づく快適な操作性

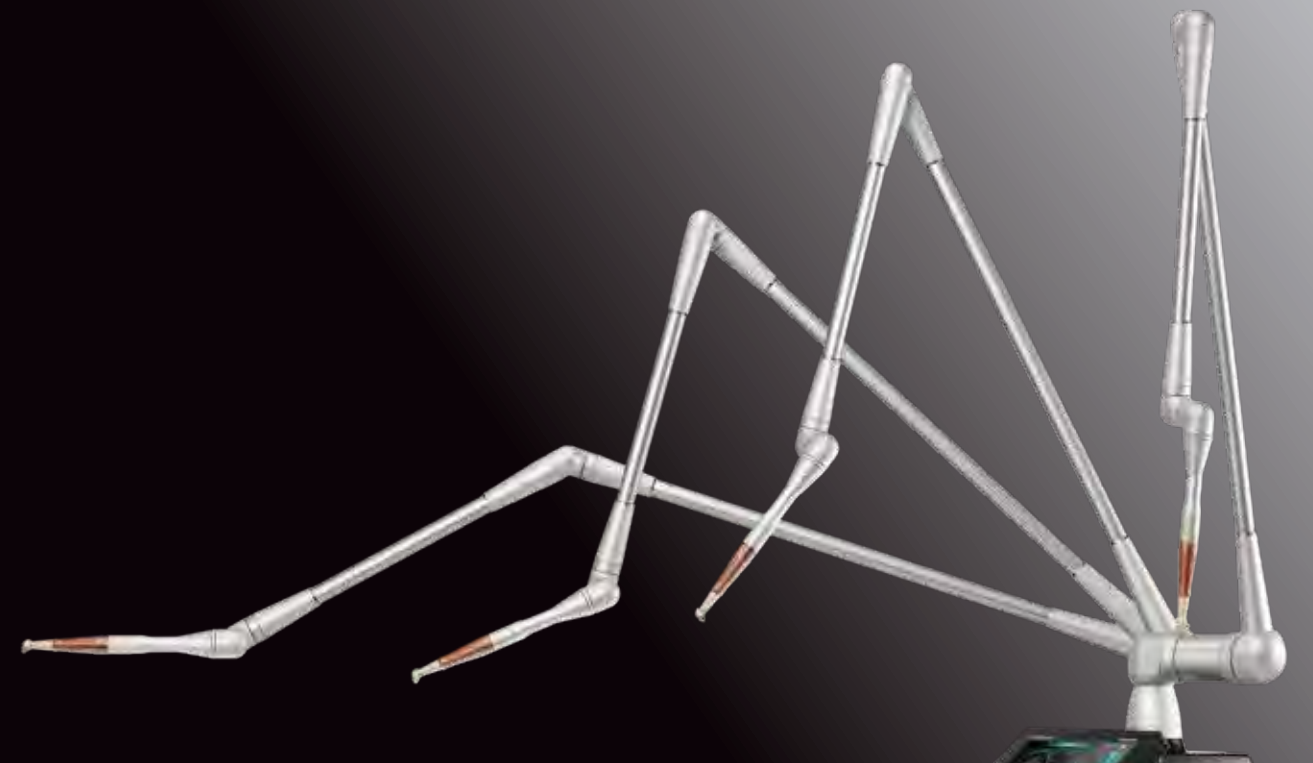


スーパーパルス(SPモード)

オペレーターPRO-Xは、3段階のスーパーパルスモードを搭載。症例に応じてご選択いただけます。

従来型 ピーク出力

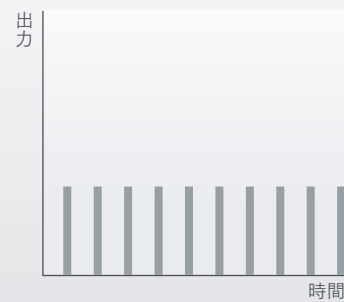

OPELASER PRO-X ピーク出力

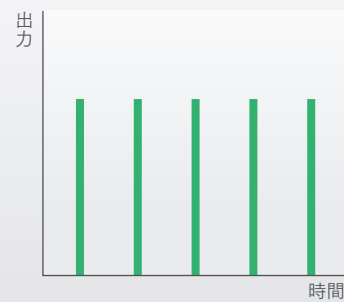

(SPモード使用時の最大出力: 10W)

マルチハンドリングシステム

処置中にハンドピースから手を離してもその場に留まり、器具を持ち替える際もスムーズに使用できます。



YOSHIDA Technology

フットスイッチ

術者のシューズを問わずに足を入れやすいフットスイッチ。フラットかつ安定感のあるフットスイッチベースで、ベースに置いたままでも外しても使用できます。



デザイン & 清掃性

どんな診療室にも合うスマートデザイン

操作パネルやボディの凸凹を減らしたスマートデザイン。
簡単に清拭でき、スタッフのお手入れの時間や負担を軽減します。



グリップ

開口の広いグリップで握りやすく、
手を入れて拭きやすい。



キャスター

小回りの利くキャスターで
チェア間の移動も簡単。



クリアな保護めがね

視認性のよいクリアレンズ。
きれいに収納できるハンガーを採用。



フロントケース

ボディや収納ケースの凹凸が少ない
スマートデザイン。

滅菌できるスタンド

ハンドピース・チップを収納するスタンドは、シリコン素材を採用。
取り外して滅菌できます。




標準セット内容

- 本体一式
- PRO-X用 15mm フォーカスヘッド
- テーパチップ(E・F)
- 保護めがね3個
- チップスタンド
- ミラークリーナーチップ

ハンドピース・チップ

診療部位に合わせて選べる3つのハンドピースと、それぞれ対象の先端チップをご用意しています。

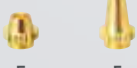 15mmフォーカスヘッド	 スキャナヘッド (15mmフォーカス) OPTION	 30mmフォーカスヘッド OPTION
焦点位置 11mm 0.5mm  E F テーパチップ	焦点位置 6mm  S テーパチップ OPTION	焦点位置 26.8mm  G テーパチップ OPTION

タッチパネル

グローブを着用した手でも反応するタッチパネル。
お好みに合わせた表示画面のデザインを2パターンからご設定いただけます。



STANDARD

直感的に操作しやすいスタイリッシュで、
先進的なデザイン。




CLASSIC

従来のスイッチパネルのレイアウトを踏襲した、
親近感のあるデザイン。



フットスイッチ

フットスイッチ・ベースは、清拭しやすいフラットデザイン。
コードはマグネット付きを採用し、本体に簡単に収納できます。

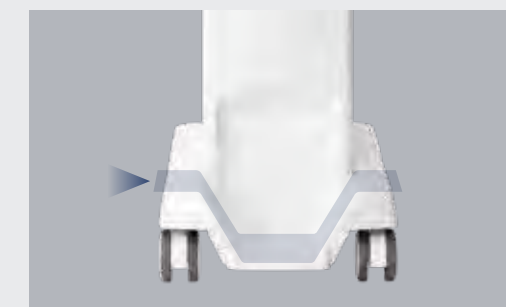

Clinical applications


臨床応用例

歯科用レーザーは、さまざまな臨床に応用されています。



切開 Incision

歯肉切除

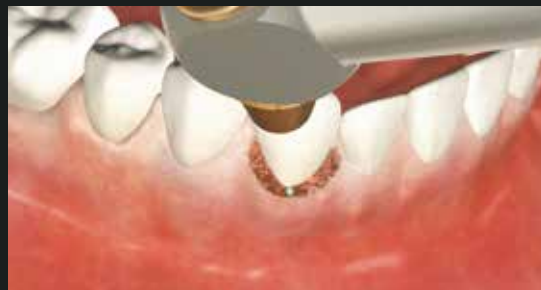


小帯切除



蒸散 Vaporization

口内炎

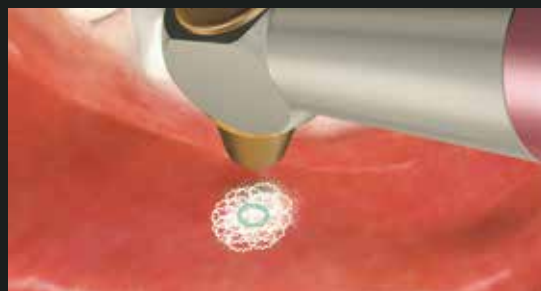

歯肉炎




止血・凝固 Coagulation

抜歯窩の血液凝固



露髄

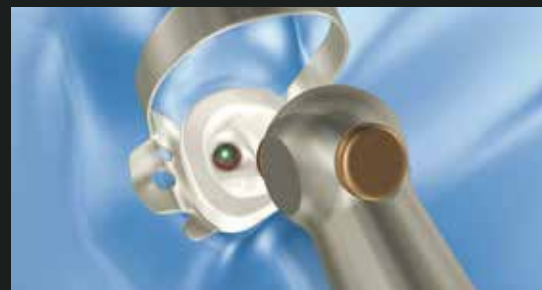

※この症例は、本製品を使用した際のイメージです。効果効能を保証するものではありません。必ず適切な診断・責任のもとでご使用ください。

Support

オペレーターが選ばれる理由

ご購入前はもちろん、ご購入後も毎日の臨床でお役立ていただけるようにサポートサービスをご用意しています。

ハンズオンセミナー

ご購入前に、豚顎骨を使った実習で、オペレーターの臨床応用方法をご体感いただけます。



オンラインフォロー

お貸出し中のご不明点や使い方のフォローをオペレーター専任者が承ります。



ユーザー会

全国各地やWEBでユーザー向けセミナーを実施。ご購入後も安心してお使いいただけます。



オペレータークラブ

ユーザーのための会員情報サイトです。使い方の動画マニュアルや、ユーザー同士で症例を共有できるコミュニティページなどをご利用いただけます。

オペレーターに関する最新情報がここに！



オペレータークラブ

標準仕様

レーザー光の種類	炭酸ガスレーザー(クラス4レーザー)
発振波長	10.6μm
定格電圧	AC100~240V 50/60Hz
電源入力	400VA
外形寸法(コンソール部)	床面積:445×280mm 高さ:840mm
質量	27kg

○一般的な名称：炭酸ガスレーザー ○販売名：オペレーター37
○承認番号：30600BZX00016000(高度管理 特管 設置)
○製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6
※オペレーターPRO-Xの販売名は、オペレーター37です。

■使用目的または効果 生体軟組織の切開、止血、凝固および蒸散

◎ご注意

- 使用に際しては必ず取扱説明書をお読みください。
- レーザー照射時には、必ず保護メガネをご使用ください。
- 仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



保険点数

- 口腔粘膜処置(1口腔につき) 30点
- レーザー機器加算1 50点
- レーザー機器加算2 100点
- レーザー機器加算3 200点

※ 算定要件をご確認ください
※ 令和6年厚生労働省告示第57号より
保険点数は診療報酬改定により変更される場合があります