


PRODUCT SPECIFICATIONS

製品仕様

X線管球	DH7004(MDインスツルメンツ製)
X線管焦点	0.4mm
管電圧	60kV(固定)
管電流	2mA(固定)
撮影時間	0.05~2.5秒
重量	2.2kg
対応媒体	CCDセンサー、イメージングプレート、アナログフィルム

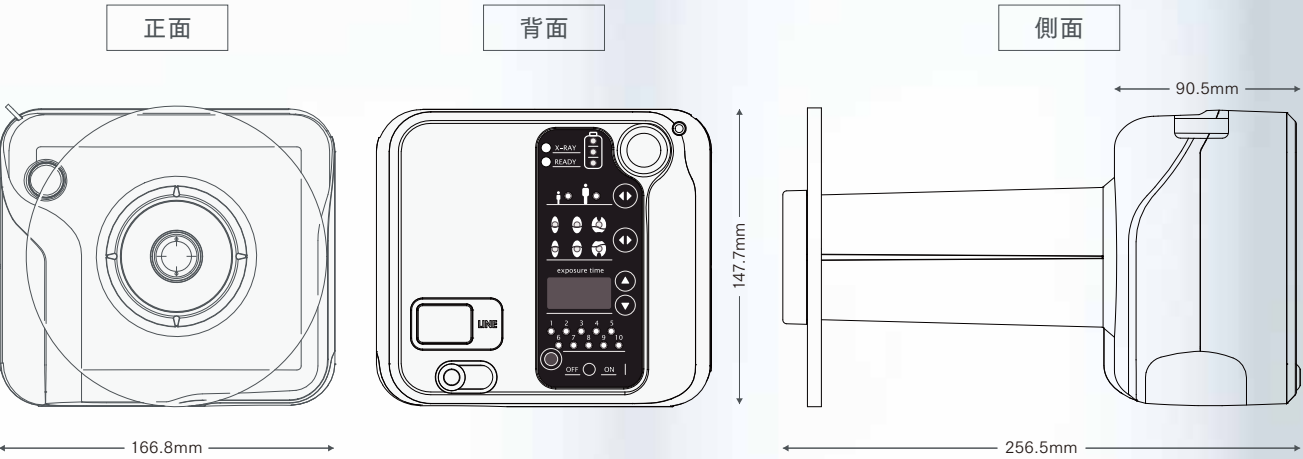

OPTION

オプション



ポータブルレントゲン

X-Shot
Light

より小さく、より軽く

標準価格:617,000円(税別)
販売名:エックスショット ライト 一般的名称:アナログ式口外汎用歯科X線診断装置 認証番号:307AKBZX00040000(管理 特管 設置)
※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
お問い合わせは下記まで

禁無断転載



C02728/2025年6月/PRI/40/新

COMPACT AND LIGHT WEIGHT

COMPACT AND LIGHTWEIGHT

すっきりコンパクトで軽い

本体がひと回り小さく、軽量になりました。

グリップとコーンが近づいたことで、位置付けも取り回しやすくなりました。



EASY TO CARRY AND OPERATE

持ち運び簡単

スムーズな操作性

バッテリー内蔵のコードレスタイプで持ち運びかんたん。

フル充電で600回*照射可能で往診以外にも便利にご使用いただけます。

また、側面のハンドストラップが取り回しをサポート。

スムーズな位置づけを実現します。 ※ 0.24s撮影時



INTUITIVE OPERABILITY

直感的な操作性

撮影部位のピクトグラムを選択するだけで、簡単に適切なX線画像が得られます。



FRIENDLY TO PEOPLE AND THE ENVIRONMENT

人と環境にやさしい

後方散乱X線シールド


X-shot Lightの後方散乱X線シールド*1は

鉛の代わりに蒼鉛(ビスマス)を採用しました。

X線の遮蔽性に関しては鉛含有の亚克力板と同等の性能を持ち、

反射したX線を99.5%以上低減*2します。

※1 医療用X線装置基準(令和4年厚生労働省告示第114号)に対応。
※2 吉田精工株式会社 試験報告書より。

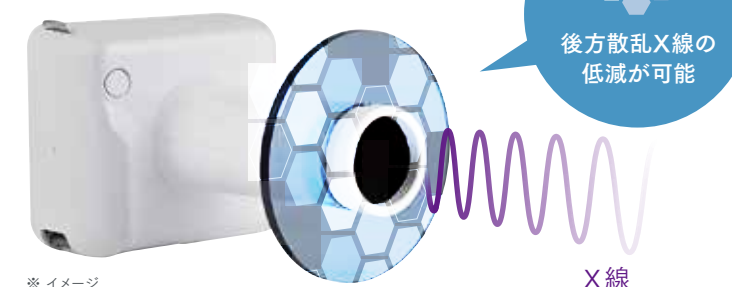

ビスマスの特長



ビスマスは鉛と異なり、人体への毒性が低く、環境負荷も低い材料です。ビスマスを採用する事で、人と環境へのやさしさを両立しました。



シールド表面は抗菌／抗ウイルス性を持つ為、細菌やウイルスの増殖を抑え表面を清潔に保つ事ができます。



防曇効果も高い為、シールドが曇りづらく、視野を確保しやすい作りとなっています。