

歯科高温鋳造用埋没材

セラベティ プレス&キャスト

Press & Cast

プレスセラミックスに対応するマルチタイプの埋没材



SHOFU INC.

Universal Investment for Pressable Ceramics and Cast Alloys

Ceravety Press & Cast

急速加熱

埋没後20分で急速加熱が可能なリングレスタイプです。

美しい成型面

プレス成型されたセラミックスと埋没材の焼付きが少ないため、 滑沢な面が得られます。






セラミックスとの焼付きが少なく、掘り出しも容易です。

3 冷却途中の応力を緩和

冷却時に鋳型温度の急な低下を無くすことで、セラミックスの 残留応力を開放しやすくし、クラックを抑制します。

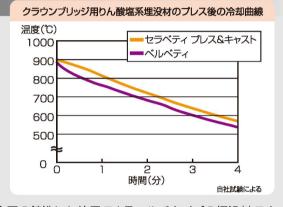

金属の鋳造にも使用可能

プレスセラミックス用だけでなく金属の鋳造にも使用できるマルチタイプの埋没材です。 金属に対しても美しい鋳造面が得られます。

【用途】・プレスセラミックスの鋳型材

·歯科鋳造用合金の鋳型材

【各種物性值】

該当規格:JIS T 6608:2001(タイプ1:クラス2) <試験室温23℃>

可使時間		6.0分
初期硬化時間		9.0分
硬化膨張	専用液100% 専用液 40%	1.0% 0.5%
熱膨張 (850℃)		0.9%
圧縮強さ	2時間後 焼成後	10.0MPa 16.0MPa

混液比:粉100gに対して液20mL

販売名·一般的名称

販売名	一般的名称	承認·認証·届出番号
セラベティ プレス&キャスト	歯科高温鋳造用埋没材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000194

包装·価格



セラベティ プレス&キャスト

粉 12kg(100g×120袋)···¥60,000 3kg(100g×30袋)····¥18,000

液 2L·····¥8.000 300mL···¥1.650

【関連商品】





ニケイ酸リチウムプレスセラミックス ヴィンテージ LD プレス スターターセット¥36,000 単品 5個入(3gインゴット) ¥12,800

ラボミキサー (歯科技工用真空攪拌器) 一式,¥250,000

記載の価格は2015年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112代

http://www.shofu.co.jp