

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
エアフロー-SI	電動式歯面清掃用装置	管理医療機器 医療機器承認番号 20300BZY00268000
エアフローパウダー	歯面研磨材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000212

包装・価格



歯面清掃器
エアフロー-SI ソリッド ¥360,000

- 仕様
 定格電源:AC100V 50/60Hz
 電源入力:50VA
 使用空気圧:0.44~0.69MPa(4.5~7kgf/cm²)
 使用水圧:0.1~0.5MPa(1~5kgf/cm²)
 エアフローパウダー貯蔵量:40g
 本体外形寸法:約W250×D250×H120(mm)
 質量:約4kg
- 付属品
 ウォーターホース 1
 エアホース 1
 *エアフロー-Sフットコントローラー 1
 電源コード 1
 *エアフロー-Sソリッドハンドピース(白) 2
 *エアフロー-Sソリッド用ホース 1
 *エアフロー-Sソリッド用清掃針(長1・短1)
 エアフローパウダーボトル(300g) 1
 *六角メタルレンチ 1
 ステリボックス(AF) 1
 メンテナンスセット 1

*印…各々単品販売をしています。



エアフローパウダー

- 【内容】ソフト(200g) ……¥4,500
 ペリオ(120g) ……¥3,200
 レモン味(300g) ……¥4,200



歯面清掃器

エアフロー/エアフローパウダー



スイスEMS社のオリジナル

歯面清掃器・超音波スケーラー

エアフロー-SI ソリッド

エアフローパウダー

ペリオ ソフト レモン味

ボトルタイプ



関連商品

旧モデルのエアフローハンドピースをご使用の方



効率よく色素沈着除去ができ、操作感、性能が向上したバージョンアップ用のキットもご準備しています。

エアフローアップデートキット…¥60,000

- 内容
 エアフロー-Sソリッドハンドピース(白) 1、エアフロー-Sソリッド用ホース 1、エアフロー-Sソリッド用清掃針(長1・短1)
 ニードルガイド 1



エアフロー-S
ソリッドハンドピース
 ●色調/2色(白・青)
 ●包装・価格/各色1本…¥35,000



エアフロー-S
ソリッド用ホース
 ●包装・価格/1本…¥35,000

ピエゾン・エアフロー専用台
マルチカート
 外形寸法:約W350×D476×H777(mm)
 質量:約14kg
 キャスター付き
 ●包装・価格/1台…¥70,000

取扱い店

ご使用の際は添付文書をよく読んでお使いください。

本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
 記載の価格は2015年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代) http://www.shofu.co.jp
 ●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595
 1505JEJSI

SHOFU INC.

エアフローパウダー+超微細ウォータースプレーの噴射により、しつこい色素沈着やプラークを素早く除去するエアフローが進化して新登場。

ノズルとハンドピースを一体化(ソリッド)し、「操作性の向上」「噴射効率向上」を実現しました。


エアフロー-SI ソリッド




進化した操作性

■操作性にすぐれた短い先端ノズル部とストリームデザインを採用

従来品に比べ、ハンドピースの先端ノズル部が短くなりました。ストリームデザインの採用とあいまって操作性が大幅に向上しました。

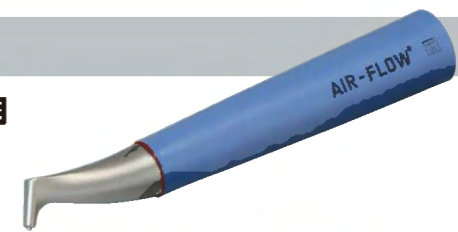

新型「ソリッド」

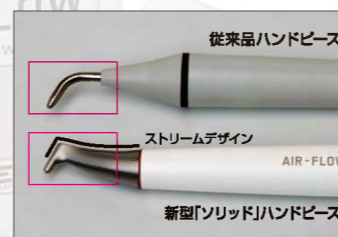

舌側傾斜の部位にも容易に噴射できます。



患者さまの開口量には限度があります。ストリームデザインと短いノズル部の採用により、従来品では到達が困難だった大白齲部舌側遠心部にも容易にアクセス可能です。


進化した性能

■噴射力&清掃性が向上

高度な金型技術により、ノズルとハンドピースを一体化(ソリッド)することに成功しました。これにより、「パウダー・水・エア」の流れがスムーズになり、エネルギーロスの効率的な噴射を可能にしました。その結果、「噴射力の向上」「清掃性の向上(目詰まりの低減)」を実現しています。

■噴射効率UP

従来品と比較し、噴射効率が向上。より短時間で効率よく清掃ができるようになりました。術者だけでなく患者さまの負担軽減にも寄与します。

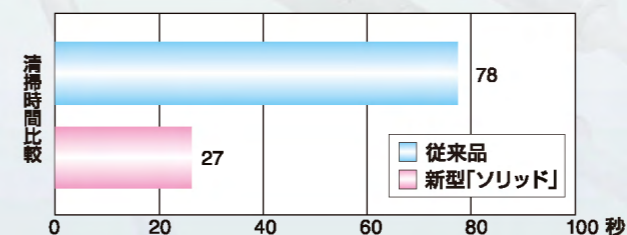

0.5cm²の金属片のよごれをきれいにするための所要時間を測定。新型「ソリッド」なら、従来品の約1/3の時間で清掃完了可能です。



歯面研磨材 エアフローパウダー

ペリオ ソフト レモン味 ボトルタイプ




炭酸水素ナトリウム(重曹)配合のレモン味とグリシン配合のソフトとペリオは用途に合わせてご使用いただけます。

清掃力の違い

レモン味の炭酸水素ナトリウム(重曹)に比べてグリシンの清掃力は低く、歯面は滑沢に仕上がります。

【レモン味を100としたときの清掃力の比較】

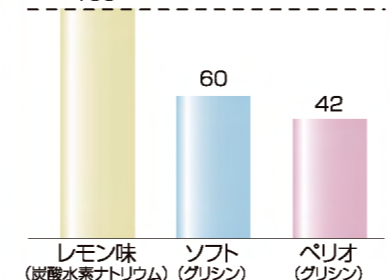

*EMS社試験データより

レモン

● 強固なステイン除去



主成分
炭酸水素ナトリウム
最大粒径
200μm

ペリオ

● 歯肉付近の歯面やインプラント周辺の清掃



主成分
グリシン
最大粒径
150μm

ソフト

● 軽度のステイン除去
● 矯正装置周辺の清掃



主成分
グリシン
最大粒径
200μm



患者さまへの啓発ポスター、リーフレットもご用意しておりますので、お申し付けください。
ポスターサイズA3両面 (297×420mm)