


販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
スーパーゴールド Ptロゼ	歯科鑄造用金合金	管理医療機器 医療機器認証番号 220AIBZX00037000

用途

クラウン、ブリッジ、クラスプ、バー、全部床、局部床

包装・価格

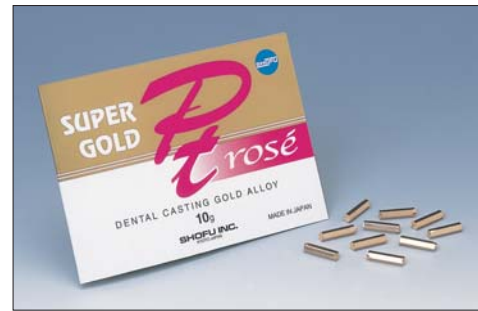

歯科鑄造用金合金 タイプ4(白金加金)
スーパーゴールド Ptロゼ
包装：10g (約1gペレット)

関連商品



ハイブリッドタイプ前歯対応歯冠硬質レジン
セラマージュセット スタンダード (8色セット)
●包装/セット
(8シェード:A1、A2、A3、A3.5、A4、B2、B3、C3)



金合金用溶剤(微細化結晶)
スーパーゴールド溶剤-16
●包装/約 1g(線状)



無酸素吸引加圧方式自動鑄造機
アルゴンキャスターAE
●包装/一式
●付属品/アルゴンガスボンベ 2、アルゴンガス調整器 1、真空ポンプ 2001、その他一式



鑄造用金合金(微細化結晶)
スーパーゴールド(タイプ3,4)
●包装/ 10g(約 1g ペレット)



急速加熱タイプ クリストバライト系埋没材
クリスト タフDF
●包装/ 15kg(1.5kg×10)
エコパック 3kg(1.5kg×2)



陶材焼付用金合金
ユニゴールドイエロー-BH
●包装/ 10g(約 1g インゴット)



高温鑄造用りん酸塩系埋没材(床用)
スノーホワイト
●包装/粉 2.5kg
18kg
30kg
液 300mL
2L



陶材焼付用金パラジウム合金(ノンシルバー)
オーロラ51
●包装/ 10g(約 1g インゴット)



陶材焼付用 金・パラジウム・銀合金
アポロ50
●包装/ 10g(約 1g インゴット)

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店

スーパーゴールド Ptロゼ



患者さまにご満足いただける補綴物。まずは色選びからこだわってみませんか。



スーパーゴールド Ptロゼは、温かみある黄金色に設計した
パラジウムフリータイプの白金加金です。
温かみある色合いは、患者さまにもご満足いただける最終補綴物を提供いただけます。

歯科鑄造用金合金 タイプ4(白金加金)

スーパーゴールド Ptロゼ

■ 温かみのあるゴールド色の白金加金


口腔内で調和のとれるゴールド色は、患者さまにも納得いただける最終補綴物を提供いただけます。

■ バランスのとれた物理的特性

鑄造後も硬化熱処理後とほぼ同等な物理的特性を有しています。

■ 鏡面光沢が容易に

均一な金属組織は、鏡面光沢を容易に得ることができます。

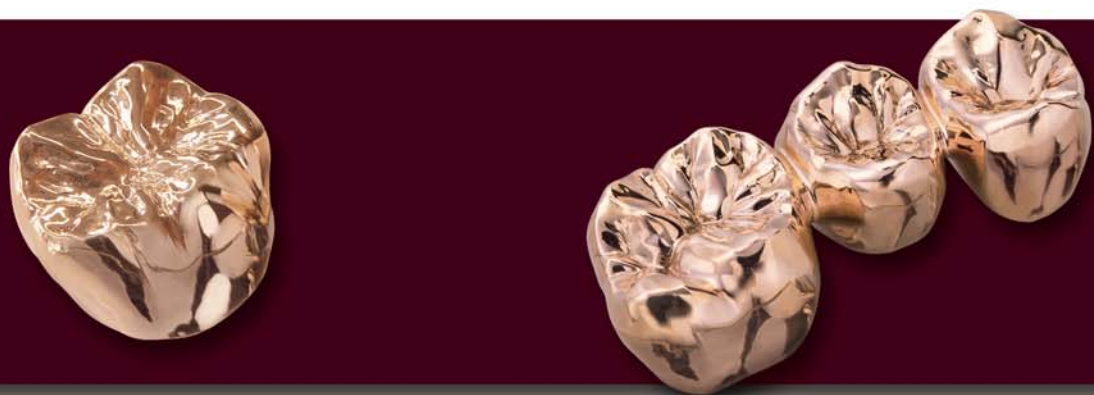

■ パラジウム、スズ無配合

パラジウム・スズに対して過敏症のある患者さまにもご使用いただけます。

【成分】

成分	分量(W/W%)
金	72.5
白金	3.0
銀	7.0
銅	16.0
その他(亜鉛、イリジウム)	1.5

【物性】

液相点(°C)	920		
固相点(°C)	875		
特性	鑄造後	軟化後	硬化後
耐力(0.2%耐力)(MPa)	740	380	790
伸び(%)	8	42	6
硬さ(ピッカース硬さ)(HV0.5)	290	180	300
密度(g/cm ³)	15.1		