

販売名・一般の名称

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
松風 ビトリファイドダイヤモンド	歯科用研削材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000226

形態

CA				○	○		○	
HP	○	○	○	○	○	○	○	○

<最高許容回転速度>30,000min⁻¹

包装・価格



松風 ビトリファイドダイヤモンド
CA : 3本入 ¥2,900 〈形態〉28,29,43
HP : 3本入 ¥2,900 〈形態〉28,29,42,43
HP : 2本入 ¥2,900 〈形態〉11
HP : 3本入 ¥4,500 〈形態〉20
HP : 2本入 ¥4,500 〈形態〉10,70



松風 ビトリファイドダイヤモンド
専用アジャスター
松風 アジャスター
¥4,500 (1本)

数量限定販売

まずはお試し
ください



お試し1本入り包装
HP : 11 ¥1,500
HP : 20, 28, 43 ¥1,000
CA : 28 ¥1,000



HP3形態と松風アジャスターがセットになった、
お得なスターターセットです。
松風 ビトリファイドダイヤモンド HP
アソートセット
 〈内容〉HP10、20、70、松風アジャスター 各1
 〈価格〉¥9,000

関連製品

●ビトリファイドダイヤモンドで形態修整後は、ジルコシャインがおすすめです。



中仕上げ

ジルコシャイン (コース) CA
 種類 : 3種 (13S, 28, Cup)
 3本入 ¥3,300 (28は4本入)
 最高許容回転速度 : 20,000min⁻¹



最終仕上げ

ジルコシャイン (ファイン) CA
 種類 : 3種 (13S, 28, Cup)
 3本入 ¥3,300 (28は4本入)
 最高許容回転速度 : 20,000min⁻¹

●ニケイ酸リチウムオールセラミックスシステム



歯科加圧成形用セラミックス
ヴァンテージ LD プレス
 色調 : 25色
 3g×5個 ¥12,800



歯科用陶材
ヴァンテージ LD
 色調 : 50色
 15g ¥3,500
 50g ¥10,000
 ※一部15g包装のみの色調もあります。
 ※OPAL (56, 57, 58, 59, 60, T, SL) 色は
 15g ¥3,950, 50g ¥11,500



歯科セラミックス用着色材料
ヴァンテージ アート LF
 ステイン 色調 : 23色
 3g ¥3,800
 グレージング 色調 : 1色
 5g ¥4,500

取扱い店

カタログに記載の価格は2015年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。
 ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(07)



形態修整用ダイヤモンド研削材

松風 ビトリファイドダイヤモンド

VIT
VITRIFIED DIA

陶材・プレスセラミックス、ジルコニアの形態修整に

研削力

ジルコニア等、硬い材料もスムーズに調整
 ※写真は表面のバインダー層を除去した状態です。(倍率65倍)

ダイヤモンドポイントのような




カーボランダムポイントのような
なめらかさ
 チッピング、面荒れを低減

SHOFU INC.

ビトリファイドダイヤとは?

VITRIFIED DIA

ビトリファイドダイヤはダイヤモンド砥粒をカーボランダムポイントと同じくガラスバインダー（ビトリファイド[!]）で結合した研削材です。ダイヤモンドポイントのような研削力、カーボランダムポイントのようななめらかな研削感を実感していただけます。

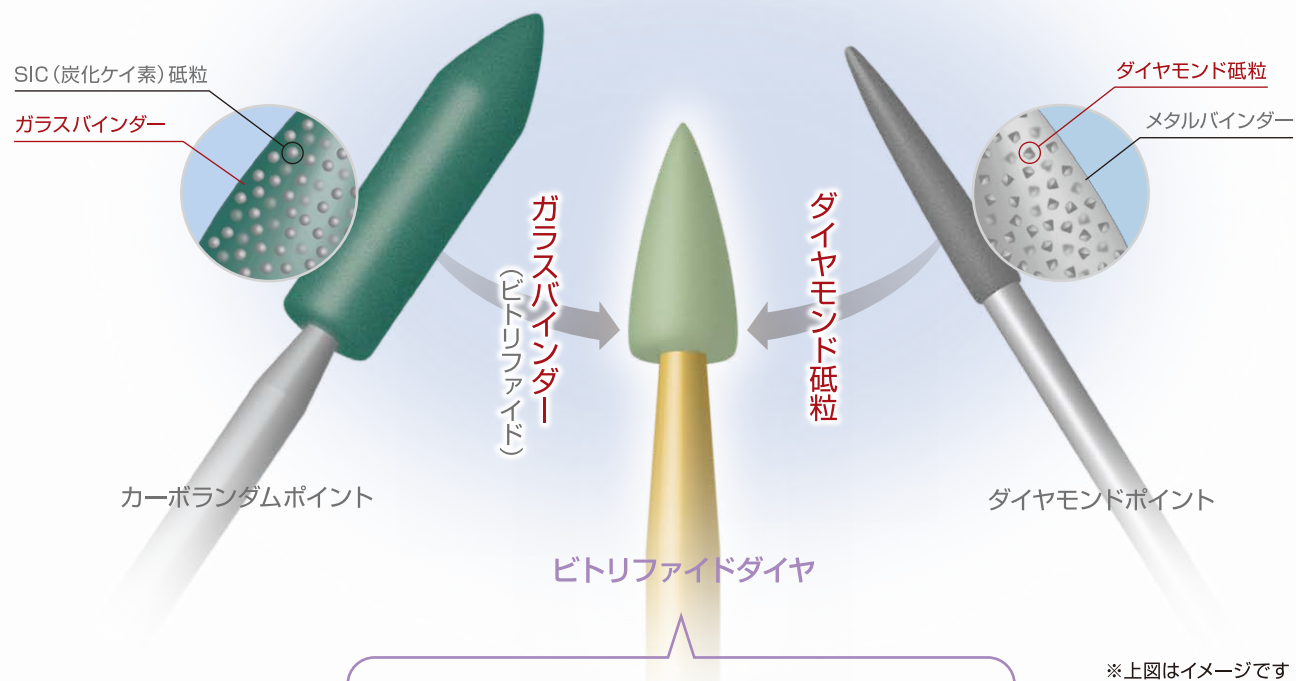


! 耐久性の高いガラスバインダーを使用

ジルコニアやプレスセラミックスのような硬い材料に対応するため、ビトリファイドダイヤにはカーボランダムポイントよりも耐久性の高いガラスバインダーを使用しています。

すぐれた研削力

細粒のダイヤモンド砥粒を高密度に充填しています。ひとつひとつの砥粒が切れ刃として働き、1回転あたりの接触回数が多いため、すぐれた研削力を発揮します。またダイヤモンド砥粒がポイントの中心部まで充填されているので研削力が最後まで維持されます。

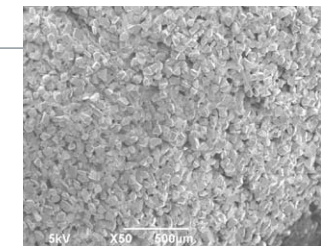

表面のバインダー層を除去した状態

チッピングも少なく、きれいな研削面


微細なダイヤモンド砥粒を、適度な強度のガラスバインダーで固定しているため、チッピングがおこりにくく、研削面の表面性状がきれいに仕上がります。

チッピングを低減



きれいな研削面

研削面 陶材を研削 (倍率400倍)

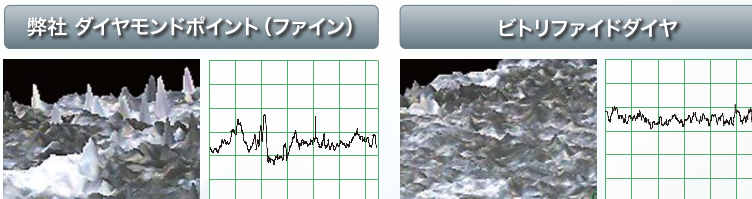

同じサイズのダイヤモンド砥粒を使用しているダイヤモンドポイント (ファイン) と比較しても、きれいな研削面が得られます。

汚れが付着しにくい

メタルバインダーではなくガラスバインダーを使用しているため、研削時にバインダーによる汚れが被研削体に付着する心配がありません。

HPタイプ

8形態をラインナップし、さまざまな用途に対応可能



※1 写真提供: タバタデンタルクリニック 小林 真人 先生

CAタイプ

口腔内でも使用可能です。



※2 写真提供: タバタデンタルクリニック 田畑 勝彦 先生

VITRIFIED DIA