



歯科用電動式ハンドピース
NiTiプロ

安全なエンド治療をサポート

Smarter and Safer




SHOFU INC.

Smarter & Safer

安全性の追求

アラーム機能とオートリバース機能で
ファイルの破折リスクを大幅に軽減

設定したトルク値に対して、2種類のアラーム音でファイルに対する
負荷状況を的確に伝えます。また、設定したトルク値に負荷が達する
とオートリバース機能が働きファイルの破折リスクを軽減し、治療の
安全性を高めます。

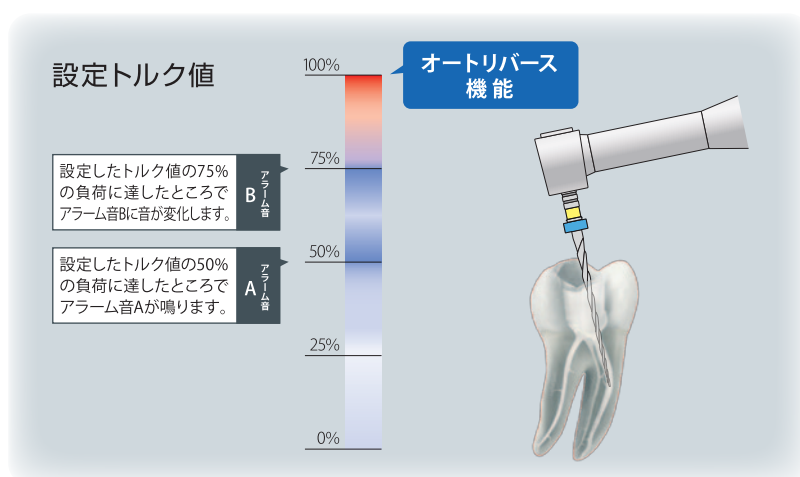


治療効率の追求

回転速度、トルク、ギヤ比、オートリ
バースモードの組み合わせを5パターン
までメモリーしてお使いいただけます。


プログラム設定パネル



回転速度

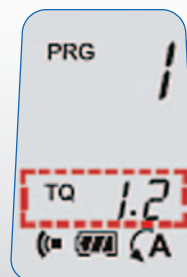

トルク

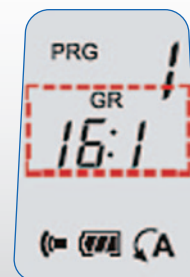

ギヤ比

直感的でスピーディーな 操作を実現

大きくフラットなボタン

ボタンが大きく操作性が向上します。

コードレスで快適な操作


コードがないので、
自由自在な操作が可能です。

見やすい液晶パネル

治療に必要な内容を一目で
確認できます。


可変できるヘッド

治療部位に応じてヘッドの向きを
6方向に変更できます。

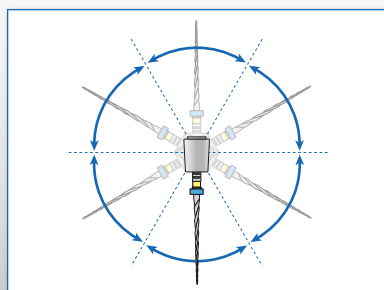

広がる視野

ミニヘッドとスリムなネックの
コントラアングルを採用することで、
広い視野を確保できます。

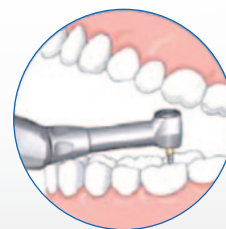

短時間で充電可能

1.5時間の急速充電が可能です。
また、無接点充電のため、接触不良がなく
確実な充電が可能です。
端子がないので、清掃しやすく衛生的です。



販売名・一般の名称

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
エンドメイト TC2	歯科用電動式ハンドピース	管理医療機器 医療機器認証番号 222ALBZX00018000 特定保守管理医療機器

包装

歯科用電動式ハンドピース NiTiプロ (エンドメイト TC2)

【内容】

モーターハンドピース、
コントラアングルヘッド (MP-Y SHO)、
1/16減速シャンク (F16R SHO)、
TC2用充電器、充電器用電源コード 各1



仕様

モーター

定格電圧	DC2.4V ±20%
電源入力	0.3VA
回転速度*	2,000～9,000min ⁻¹
連続使用時間*	約1.2時間

※電池の充電容量によって回転速度、連続使用時間が変化することがあります。

充電器

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
電源入力	12VA
充電時間	約1.5時間

別売品

モーターハンドピース



NiTiファイル用 コントラアングルヘッド (MP-Y SHO)



NiTiファイル用 (ミニヘッド用) コントラアングルヘッド (NML-Y)

※ラッチ式



1/16減速シャンク (F16R SHO)



根管長測定器接続用 (ロングシャンク用) コントラアングルヘッド (MPA-Y)



根管長測定器接続用 (ショートシャンク用) コントラアングルヘッド (MPAS-Y)

※シャンク長12mmまでのNiTiファイルに使用可



TC2用 充電器

充電器用電源コード

関連商品

手用ファイルに近い術式で使える電動式歯科用NiTiファイル Mtwoファイル

【セット】

6本

種類:2種

Mtwo ファイルベーシックアソート 21mm、
Mtwo ファイルベーシックアソート 25mm

セット内容:右の表を参照してください。




写真はベーシックアソートです。

【単品】

6本

種類:24種

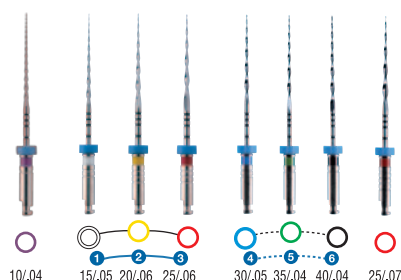

先端径 (ISO)	刃部	針部	テーパ	先端径 (ISO)							
				010(#10)	015(#15)	020(#20)	025(#25)	030(#30)	035(#35)	040(#40)	
レギュラー (R) 16mmタイプ	2種 21mm 25mm		.04	●					●	●	
			.05		●			●			
			.06			●		●	●		
			.07					●			
ロング (L) 21mmタイプ	2種 25mm 31mm		.04	●							
			.05		●						
			.06			●		●			

●印はベーシックアソートに含まれるファイルです。

(◆)は刃部長さ=15mm、(▲)=14mm、(■)=13.5mm となります。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

取扱店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112 (代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595
1309DHJSI

<http://www.shofu.co.jp>