



CAD/CAM用高透光性ジルコニアブロック  
**松風ブロックZR ルーセント FA**

**S-WAVE**

高透光性

×

1000MPa

×

5 Multi Layer

**ブロックタイプ!**

—ユニバーサルピンを使用し、幅広い症例に対応—

# SHOFU BLOCK ZR Lucent *FA*

松風ブロック ZR ルーセント FAは、東ソー社製の高透光性ジルコニア粉末を使用しており、「ジルコニア粉末の高圧プレス法」により、高い透光性を示しながら1,000MPa以上の曲げ強さを実現しています。

※ 松風ディスク ZR ルーセント FAと同組成です。



パールホワイト	5Lスーパーライト	5Lライト	5Lミディアム

*Lineup*

※印刷物のため、実物とは色調が異なる場合があります。



前 歯


臼 歯

色調は単層のパールホワイト (W2 ~ W3用)、5層マルチレイヤーの5Lスーパーライト (A1用)、5Lライト (A2用)、5Lミディアム (A3 ~ A4用) の4色をラインナップ。ステイニングによる簡便な色調再現を可能にします。

**SHOFU INC.**

# 色調再現を容易にする「5層マルチレイヤー」

ステインングによる色調調整作業が軽減するため、技工作業効率の向上に寄与します。

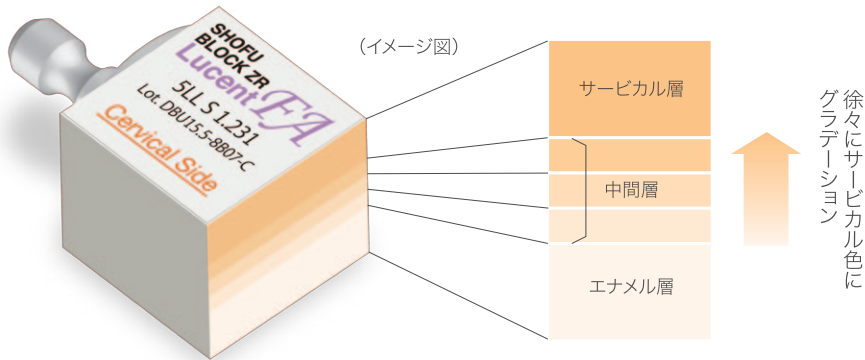


**SHOFU  
BLOCK ZR  
Lucent FA**

## 高い透光性を示しながら1,000MPa以上の曲げ強さを実現


東ソー社で開発された高透光性ジルコニア粉末を採用しています。従来製品(松風ディスク ZR-SS カラード)と比較して、より天然歯に近似した補綴装置の製作が可能です。

「ジルコニア粉末の高圧プレス法」により、高い透光性を示しながら1,000MPa以上の曲げ強さを実現しています。

### ● 分光光度計による可視光透過率(代表値)

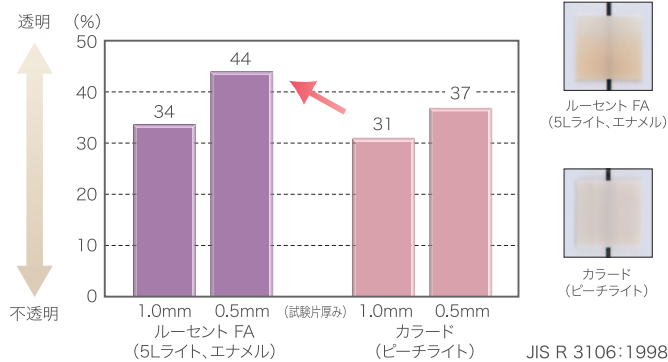

### ● 曲げ強さ(代表値)

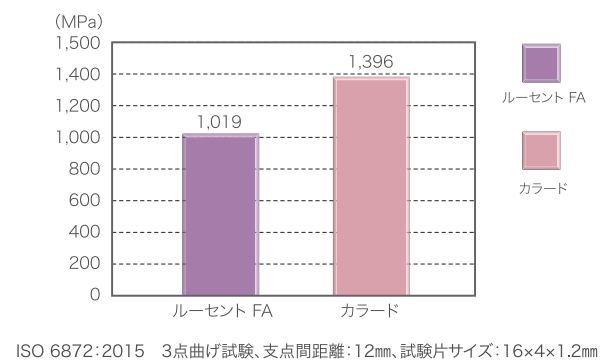


### ■ 包装・価格



#### 松風ブロック ZR ルーセント FA (3個入り)

【サイズ】  
2種類/Sサイズ  
(W: 20.0mm, D: 19.0mm, H: 15.5mm)  
Mサイズ  
(W: 20.0mm, D: 19.0mm, H: 19.0mm)

【色調】4色/パールホワイト(単層 W2~W3用)  
5Lスーパーライト(5層マルチレイヤー A1用)  
5Lライト(5層マルチレイヤー A2用)  
5Lミディアム(5層マルチレイヤー A3~A4用)

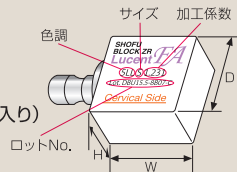

※印刷物のため、実物とは色調が異なる場合があります。

### ■ 関連製品



#### 松風ディスク ZR ルーセント FA

【サイズ】3種類/φ98×14, φ98×18, φ98×22(mm)

【色調】4色/パールホワイト(単層 W2~W3用)  
5Lスーパーライト(5層マルチレイヤー A1用)  
5Lライト(5層マルチレイヤー A2用)  
5Lミディアム(5層マルチレイヤー A3~A4用)

### ■ 推奨焼結スケジュール

開始温度	昇温速度	焼結温度	保留時間	降温
室温	5°C/分	1450°C	120分	炉内放冷

### ■ 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック ZR ルーセント FA	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 229AGBZX00044A03

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2019年6月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

**株式会社 松風**

● 本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

● 支社:東京(03)3832-4366 ● 営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>