

ジルコニアの最終仕上げに

ZirGloss
Polishing Compound for Zirconia,
Lithium Disilicate, Porcelain

ジルコニアやニケイ酸リチウムを3ステップで仕上げる事が可能です。



短時間でキズを取ることができ、ツヤやかな表面性状に仕上がります。

キズを取り、なめらかな面にすることで対合歯摩耗リスクを軽減

短時間でツヤやかな表面性状に仕上がります

ジルコシャイン コース
調整直後




Ra=0.4 ~ 0.5[μm]
レーザー顕微鏡 (×400)

ジルグロス
10秒研磨後



Ra=0.19[μm]
レーザー顕微鏡 (×400)

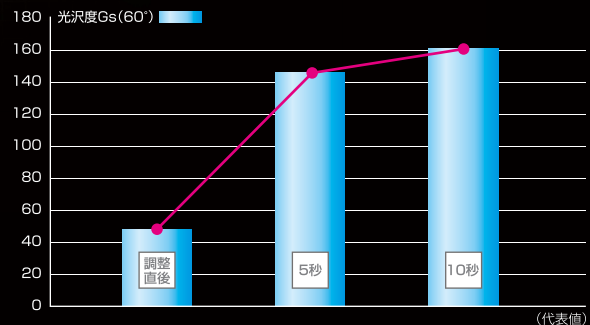

【試験方法】試験体: 松風ディスク ZR-SS カラード ジルコシャイン コースで調整 研磨試験: 荷重1N、回転数10,000min⁻¹ 併用材料: 松風ビットブラシ



ジルグロスは操作性にもこだわっています

松風独自のワックス組成により、
すぐれたワックス性状を実現しました。

ワックスが除去しやすい

ブラシに塗布しやすい

ワックスが飛散しにくい



ジルグロス

20g

40g

【最高許容回転速度】
10,000min⁻¹

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ジルグロス	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号26B1X00004000269

関連製品



一般医療機器
届出番号 26B1X00004000226
歯科用研削器具
松風ビトリファイドダイヤ HP
28, 29, 42, 43.....3本入
20.....3本入
11.....2本入
10, 70.....2本入
【最高許容回転速度】30,000min⁻¹



一般医療機器
届出番号 26B3X00014000017
歯科用ゴム製研磨材
ジルコシャイン HP
10, 11.....3本入
28.....4本入
ホイール5.....1本入
【最高許容回転速度】20,000min⁻¹ (ホイール5は15,000min⁻¹)
【種類】3種 (コース、ミディアム、ファイン)

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱店

ジルコニアの最終仕上げに

ZirGloss
Polishing Compound for Zirconia,
Lithium Disilicate, Porcelain

ジルコニアやニケイ酸リチウムを3ステップで仕上げる事が可能です。



短時間でキズを取ることができ、ツヤやかな表面性状に仕上がります。

キズを取り、なめらかな面にすることで対合歯摩耗リスクを軽減

短時間でツヤやかな表面性状に仕上がります

ジルコシャイン コース
調整直後


ジルグロス
10秒研磨後



Ra=0.4 ~ 0.5[μm]
レーザー顕微鏡 (×400)



Ra=0.19[μm]
レーザー顕微鏡 (×400)

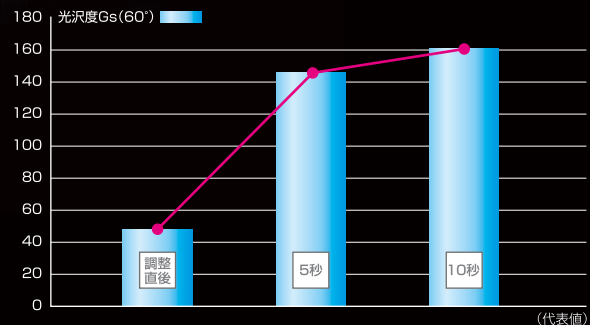

【試験方法】試験体: 松風ディスク ZR-SS カラード ジルコシャイン コースで調整 研磨試験: 荷重1N, 回転数10,000min⁻¹ 併用材料: 松風ビトリファイドダイヤ



ジルグロスは操作性にもこだわっています

松風独自のワックス組成により、
すぐれたワックス性状を実現しました。

ワックスが除去しやすい

ブラシに塗布しやすい

ワックスが飛散しにくい



ジルグロス

20g

40g

【最高許容回転速度】
10,000min⁻¹

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ジルグロス	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号26B1X00004000269

関連製品



松風ビトリファイドダイヤ HP

28, 29, 42, 43.....3本入
20.....3本入
11.....2本入
10, 70.....2本入
【最高許容回転速度】
30,000min⁻¹



ジルコシャイン HP

10, 11.....3本入
28.....4本入
ホイール5.....1本入
【最高許容回転速度】
20,000min⁻¹ (ホイール5は15,000min⁻¹)
【種類】3種 (コース, ミディアム, ファイン)

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医に愛用する

株式会社 松風

●本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112 (代)

●支社: 東京(03)3832-4366 ●営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

1712BJJSi