

軟組織トリミングを、もっと手軽に、スピーディーに

レーザーいらずの簡単操作。バーを当てるだけで、手早くクリアな術野を確保。

【FG用】ジルコニア ティッシュトリマー「ゼットン」で、より迅速・クリーンな治療を。

Ztton


ゼットン

Zirconia Tissue Trimmer

【使用前】



【使用后】

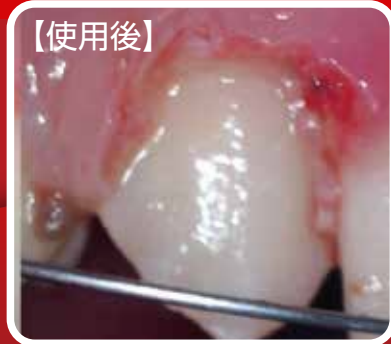

特殊ジルコニアセラミック素材のため注水不要、クリーンなドライフィールド（乾燥状態）を手早く確保

Ztt（ゼットン）がもたらす3つの臨床メリット

1. 【無麻酔・低侵襲】患者様の負担とストレスを最小限に

超高回転（300,000～500,000 rpm）での適度な摩擦熱を利用し、軟組織の切除を手早く。

メスやレーザーに比べ、症例によっては無麻酔または局所麻酔の量を減らしたアプローチも期待でき、術後の疼痛や腫れの軽減に。

2. 【手早くクリーンな術野】スキャンや印象採得の精度を飛躍的に向上

先端部を歯肉縁に軽く当てるだけで、数秒でシャープかつクリアなマージンを露出。クリーンなドライフィールド（乾燥状態）を手早く確保できるため、口腔内スキャナーによる光学印象や従来印象の精度が向上します。

3. 【優れたコストパフォーマンス】電気メスやレーザーに代わる手軽さ

レーザー・電気メスに代わる手軽な選択肢。

いつものタービンに装着するだけ、届いたその日からすぐにお使いいただけます。

幅広い症例に対応する多彩な臨床応用



歯肉切除術 Gingivectomy



修復治療の術前処置




歯肉圧排・マージン露出

歯冠長延長術 Crown lengthening



インプラント周囲組織の整形

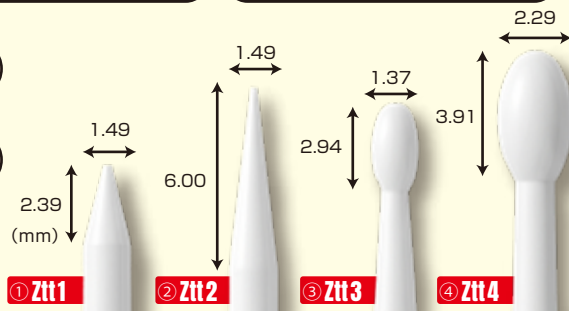

※ご使用前にトリミング部位にエアーやガーゼを使い水分をしっかりと除去してください。
※トリミング時は最小限の圧力で、断続的に軽く接触させて操作してください（摩擦熱防止のため）

ブレードを
当てるだけ！
実際の臨床
動画を公開中



■販売名：ゼットン 【FG用】

●一般的名称：歯肉切除メス ●届出番号：23B2X00017000395
●軸径：φ1.6mm ●FG用 ●素材：ジルコニア特殊セラミック ●推奨回転数 30万～50万rpm

商品コード	タイプ	作用部 (A)	作用部 (B)	全長	数量	標準価格
55774	①Ztt1	1.49mm	2.39mm	23mm	1本	¥9,800 /ケース(税別)
55775	②Ztt2	1.49mm	6.00mm	23mm		
55776	③Ztt3	1.37mm	2.94mm	27mm		
55777	④Ztt4	2.29mm	3.91mm	27mm		
55778	①～④の4本アソートセット				各1本	¥34,000



BSA [発売元] 株式会社ビーエスエーサクライ TEL.052-805-1181 <https://www.bsa-sakurai.co.jp>

4本
セットなら
1本
あたり
8500円
の
経済性