


COLOR CODE Gutta Percha Points III



Gutta Percha Points III ACCESSORY


操作性が向上

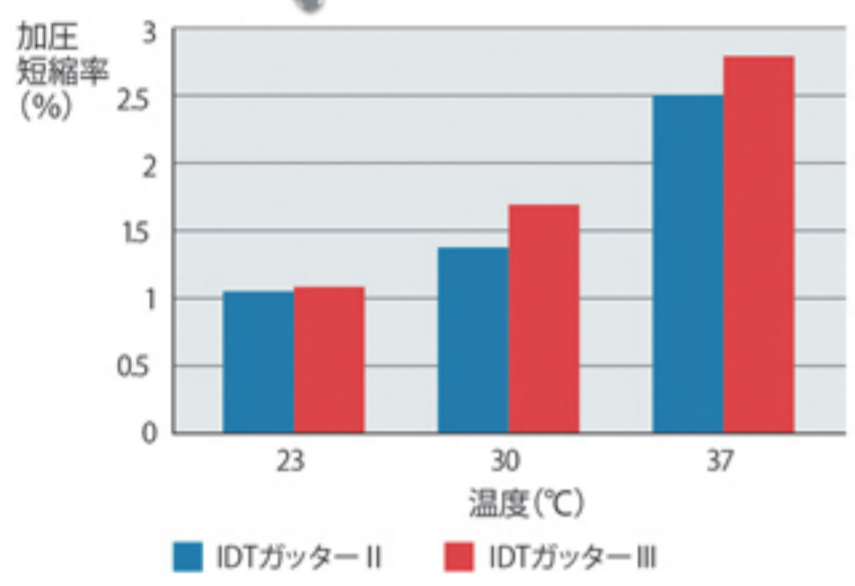

従来品よりも温度に応じた加圧短縮率が向上しており、常温付近では適度なコシを有し、体温に近い温度帯では根管内の側方加圧がしやすくなっております。

※製販元試験による


折れにくさが向上

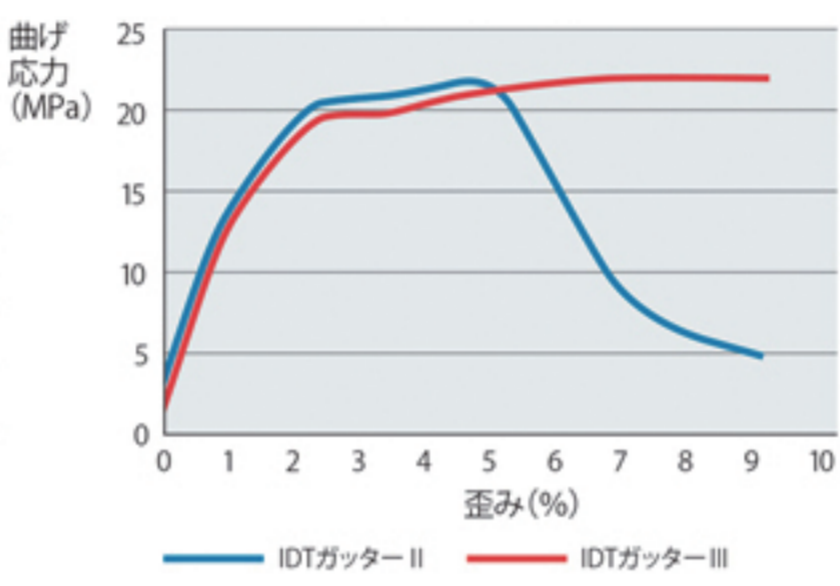

従来品は5%の歪みで亀裂が生じたが、IDTガッターIIIは10%歪んでも亀裂が生じず、折れにくさが向上したため、より差し込みやすくなりました。

※製販元試験による

明瞭なX線造影性

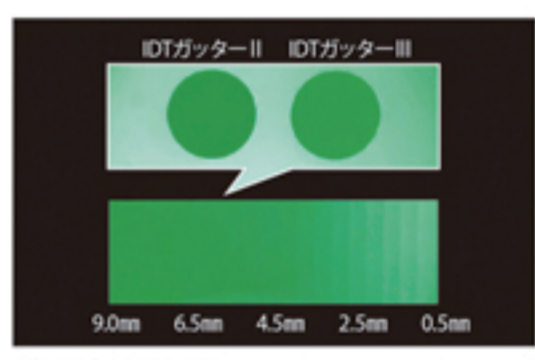


X線不透過率
 IDTガッターII
 アルミニウム6.0mm
 相当以上
 IDTガッターIII
 アルミニウム6.0mm
 相当以上

試験片厚2.0mm
 アルミニウムステップエッジ 0.5mm×18段 ※製販元試験による
 従来品と同等の明瞭なX線造影性を有します。

- ◆ IDTガッターパーチャポイントIII
 #20・25・30・35・40・45
 #50・55・60・70・80 各120本入
- ◆ IDTアクセサリーポイントIII
 細小・細中・細大
 標小・標中・標大
 太小・太中・太大 各120本入

IDTガッターパーチャポイントIII

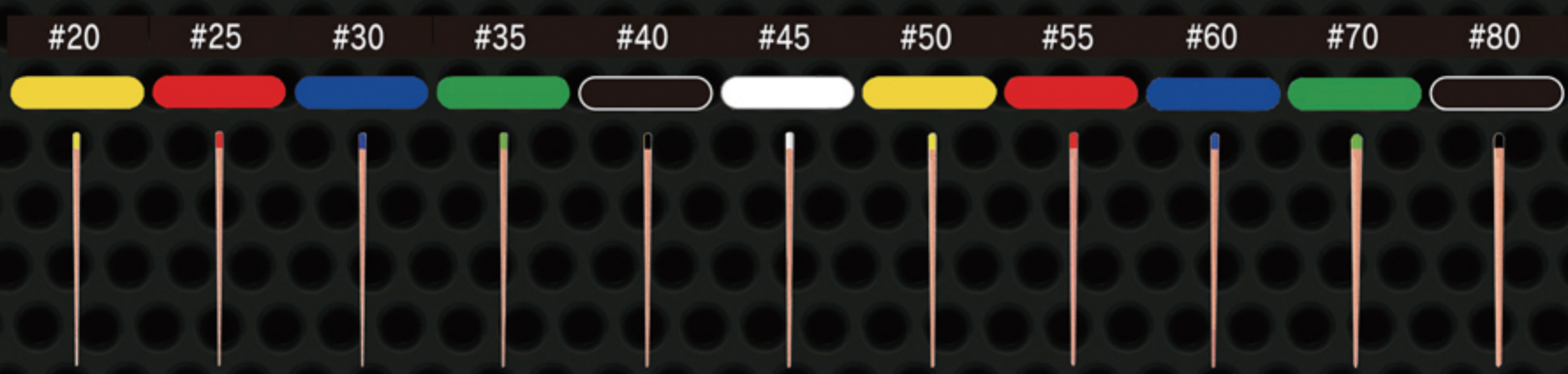

IDTアクセサリーポイントIII

※サイズは実物と若干異なります



内外歯材株式会社

本社 〒543-0062 大阪市天王寺区逢坂2-3-10
 TEL 06-6771-5553 FAX 06-6779-7518
 名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山1-2-6
 TEL 052-741-7011 FAX 052-741-7014