

Heraeus

ALGINOPLAST[®] EM
Alginate Impression Materials

アルギン酸塩印象材
アルギノプラスト[®] EM



ラバーライクな弾性特性と
寒天との馴染みの良さをそのままに
粉末と水がより速やかに、なめらかに混合する
イージーミックスタイプのアルギン酸塩印象材

アルギン酸塩印象材 アルギノプラスト® EM

■ イージーミックス

アルギノプラストEMは、マイクロファイン粒子による粉末で水がより速やかに混合する、イージーミックスを実現しました。またダストフリータイプで粉末の飛散がほとんどありません。




アルギノプラストEM

■ ラバーライクな弾性特性

印象撤去時のアンダーカット通過による変形からの回復性に優れ、精度が高く破折が起こりにくい印象採得ができます。

■ 印象撤去時の変形と回復

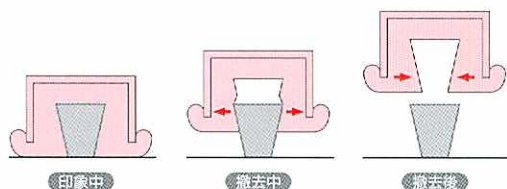

■ 滑沢な印象面

石膏の面荒れが起こりにくく、精密な模型が作製できます。

■ 連合印象に適しています。

寒天印象材との接着性に優れ、連合印象に適しています。応力に対しての変形が少ないため精密な連合印象が採得できます。

引張強さ (g/cm²)



■ ミント風味と安定した粘稠度

アルギノプラストEMは、さわやかなミントの風味と常に安定した粘稠度のペーストが得られるため、患者さんの不快感を解消します。

■ 品質を守るラミネートパック

湿気をシャットアウトする新ラミネートパックを採用。ほぐし易さを損なわない真空度95%で充填しています。保管時の品質安定性が向上し、コンパクトで保管に場所をとりません。

物性	ノーマル	ファスト	製品名	内容	医院標準価格	販売名	管理医療機器
練和時間	30秒	30秒	アルギノプラスト EM ファスト	5kg(500g×10袋) 計量スプーン×1本 カップ×1個	¥ 22,680	アルギノプラスト EM ファスト	221ABBZ00017000
作業時間*	1分45秒	1分10秒	アルギノプラスト EM ノーマル	5kg(500g×10袋) 計量スプーン×1本 カップ×1個	¥ 22,680	アルギノプラスト EM ノーマル	221ABBZ00016000
初期硬化時間*	2分~2分30秒	1分15秒~1分45分					
口腔内保持時間	約2分	約1分					
混水比(粉水)	21g : 50ml	21g : 50ml					
色調	ライトピンク	ライトグリーン					

* 23°Cにおいて、練和開始よりの時間
(硬化時間、作業時間は水温・室温が高くなるほど短くなります。)

※価格は2011年1月現在のものです。消費税を含みません。

■ お問い合わせとご用命は…

■ 販売元

ヘレウス クルツァー ジャパン 株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
 札幌営業所：〒003-0021 札幌市白石区栄通1-1-20-101 TEL.090-7555-8560
 仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
 名古屋営業所：〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
 大阪営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-12 TEL.06-6396-3100
 福岡営業所：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-3-16 TEL.092-472-0720
 フリーダイヤル：0120-230-331 (受付時間10:00~16:00/土・日・祝日を除く)

<http://www.heraeus-kulzer.co.jp/>