

咬合採得用付加型シリコーン印象材

Oxford Bite

オックスフォード バイト

ワンランクアップのクオリティー

オックスフォード バイトは
咬合状態をスピーディーかつ
精密に記録できる咬合採得用
シリコーン印象材です

口腔内保持時間

スピーディーな硬化で、
より精度の高い咬合採得

45
秒

ショアA硬さ

硬化後のショアA硬さ：87-91
ナイフや切削バー等でシャープに
調整ができる高いショアA硬さ

90

採得時の咬合抵抗が
少なく、無理なく
正確な咬合位置を記録

クリーム
タイプ

お得な

50mLのカートリッジが4本入
で満足いただける低価格

4
本入




スピーディーな硬化

操作時間
15秒以上

口腔内保持時間
45秒

ペーストの押し出し操作は、軽くスムーズ。操作時間（15秒）内で、片側、両側を問わず歯列への注入が可能です。また、注入後はスピーディーに硬化が完了し、より精度の高い咬合記録を採得することができます。

硬化前のペーストは、きめの細かいクリームタイプ

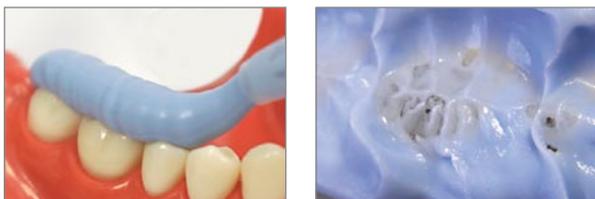

硬化前のペーストは、咬合抵抗が少ないクリームタイプのため、患者さんの正確な咬合位置を記録できます。またチキソトロピー性に優れ、無圧状態では垂れにくく、加圧時にはスムーズに流れるので、さまざまな採得方法にも対応できます。

ショアA硬さ：87～91



ナイフによるトリミング



切削バーによるトリミング

硬化物は適度な硬さがあり、ナイフや切削バー等でシャープなトリミングが可能です。

安定した寸法精度

付加型シリコンを採用し、硬化後長期間にわたり安定した寸法精度を維持します。

低価格を実現

高品質なバイトマテリアル オックスフォード バイト（50mLカートリッジ）4本入で、ご満足いただける低価格を実現しました。

オックスフォード バイト 包装内容



カートリッジ：50mL×4本
T-ミキサーチップ（ピンク）×10本
イントラオーラルチップ（バイト）×10本
標準価格：¥7,600

一般医療機器 歯科材料6 歯科用印象材料 歯科咬合採得用材料(70883000) 届出番号:1382100022000068号

単品販売

● T-ミキサーチップ（ピンク）

チップ内残量が従来品と比べて30%削減



50本入
標準価格：¥4,500

一般医療機器 機械器具65 歯科用充填器 歯科用充填・修復材補助器具(38782000) 届出番号:1382100022000069号

● オーラルチップ（バイト用）B



50本入
標準価格：¥1,400

一般医療機器 器具器械66 歯科用練成器 歯科用練成器具(70820000) 届出番号:13831000220008001号

関連商品

● ディスペンサーガン（50mLカートリッジ用）

標準価格：¥12,500



一般医療機器 機械器具65 歯科用充填器 歯科用充填・修復材補助器具(38782000) 届出番号:1382100022000019号

ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。

表示価格は2013年3月21日現在の標準価格です。
（消費税を含みません。）

PENTRON®
JAPAN INC.
www.j-pentron.com

製造販売元

ペン tron ジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17 レ・ジュ大井町 5F
TEL.03-5746-0316 FAX.03-5746-0320