

歯科用研磨器材

Wheel Buff Series

ホイールバフシリーズ

ホイールバフ #1

【材質】フェルト 【用途】金属・レジンの艶出し

- 広い面を艶出しする場合に有効。固形・ペースト・リキッド、様々なタイプの艶出し材と併用することができます。

回転数	10,000rpm以下
サイズ	作業部直径φ22mm
包装単位	12本入/袋 標準価格 ¥800



ホイールバフ #2

【材質】セーム皮 【用途】金属・レジンの艶出し

- 被研磨物の形状に生地が沿い易く、細部の艶出しも可能。吸水性が高いためリキッド・ペーストタイプの艶出し材との併用に適しております。

回転数	5,000rpm以下
サイズ	作業部直径φ22mm
包装単位	12本入/袋 標準価格 ¥2,200



ホイールバフ #3

【材質】コットン 【用途】金属・レジンの艶出し

- 被研磨物の形状に生地が沿い易く、細部の艶出しも可能。ハードタイプのコットン材質で、生地にコシがあるため、リキッド・ペーストタイプだけではなく、固形タイプの艶出し材との併用もできます。

回転数	5,000rpm以下
サイズ	作業部直径φ22mm
包装単位	12本入/袋 標準価格 ¥800



【関連商品】

COTTON BRUSH コットンブラシ 歯科用研磨器材

特 徴

- コットンでできたブラシのためソフトタッチで補綴物の細部までムラなく研磨できます。
- シルキーシャイン〔裏面商品〕との併用で軟質熱可塑性樹脂の艶出しに効果を発揮!!

回転数	20,000rpm以下
サイズ	作業部直径φ25mm
包装単位	12本入/袋 標準価格 ¥1,800

※シルキーシャインとの併用で軟質熱可塑性樹脂(ポリアミド樹脂・ポリエステル樹脂)の艶出しに用いる場合は、5,000~10,000rpm程度の低速回転数でご使用下さい。



医療機器届出番号 23B1X10001C09011

タイガーマルチ

歯科用研磨器材


技工用研磨材、中研磨・艶出し

一般医療機器

【特徴】

- 酸化アルミニウム超微細粉末によって切削力(キズ取り)、艶出し力が大幅にアップ。
- 研磨材の特殊加工により補綴物への油膜の付着が少なく洗浄が楽です。
- 金属からレジンまで多用途型
150×45×40(mm)

包装単位	400g	標準価格	¥2,300
------	------	------	--------

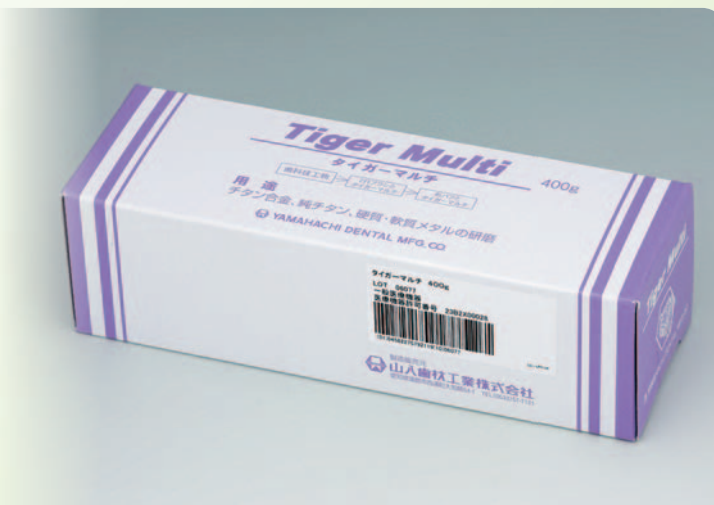

医療機器届出番号 23B1X10001C09009

ブルーシャイン

歯科用研磨器材

歯科技工用艶出しペースト研磨材

一般医療機器

【特徴】

- 一般硬質レジン・メタル・アクリルレジン専用艶出し研磨材です。
- テック等が焼き付きにくく、研磨作業が容易に行えます。
- 研磨力に優れているため、光沢が一段と出やすく研磨作業が容易に行えます。
- 無臭なため研磨作業が快適に行えます。
- 清掃性が良いため、作業時間を短縮できます。

包装単位	50g	300g
標準価格	¥700	¥3,800



ワンポイント

- ▶艶だし前段階の中研磨を充分行って下さい。
- ▶研磨材を付けすぎますと、研磨効果が低下します。

医療機器届出番号 23B1X10001C09055

シルキーシャイン

歯科用研磨器材

一般医療機器

【特徴】

- コットンブラシ〔裏面商品〕と併用することにより、ポリアミド樹脂・ポリエステル樹脂の良好な艶出しを実現!!

【主な用途】

軟質熱可塑性樹脂の最終艶出し(リキッドタイプ)

包装単位	30g/ボトル	標準価格	¥1,500
------	---------	------	--------



※標準価格は予告なく変更する場合がございます。

●ご用命は…



製造販売元

山八歯杖工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL<0533>57-7121 FAX<0533>57-1764

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>