

歯科用研磨器材

ポーセレン・ハイブリッド硬質レジンの艶出し材(固形タイプ)

DIALUSTER

ダイヤラスター

ダイヤモンドの微粒子配合。

ポーセレン・ハイブリッド硬質レジンを

素早く艶出し!!



包装単位 10g入 標準価格 ¥5,300



ダイヤモンド微粒子配合の固形研磨材。ポーセレン及びハイブリッド硬質レジンを素早く光沢のある表面に仕上げます。

関連商品

医療機器届出番号 23B1X10001C09040

パワーロビンソンブラシ


歯科用研磨器材 一般医療機器



【特徴】

少し毛の長い#12(Ø19mm)の規格もご用意し、ラインナップを充実させました。補綴物の咬合面など細部の研磨作業に最適です。

寸法

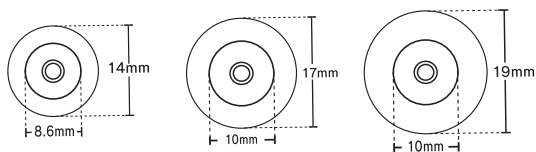

回転数	15,000rpm以下	規格	ソフト(#9・#11・#12) レギュラー(#9・#11・#12)
材質	ソフト…羊 レギュラー…馬毛・羊毛(混毛)	包装単位	12本入/箱 標準価格 ¥1,500

医療機器届出番号 23B1X10001C09018


バンピネスブラシ

歯科用研磨器材 一般医療機器



歯間から咬合面までくまなく密着するため、効率的な研磨ができます。

寸法

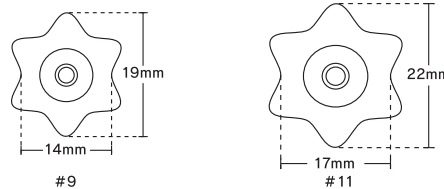

回転数	15,000rpm以下	規格	ソフト……(#9・#11) レギュラー……(#9・#11)
材質	ソフト…羊 レギュラー…馬毛・羊毛(混毛)	包装単位	12本入/箱 標準価格 ¥1,500

ダイヤモンドポリッシュポイント

コース(荒研磨用)・ミディアム(中研磨用)・ファイン(仕上げ研磨)の
3ステップで**ポーセレン**を効率よく研磨!!

一般医療機器	歯科技工用ダイヤモンド研削材	医療機器届出番号 23B1X10001C09062	用途: ポーセレン・ハイブリッド硬質レジン												
番号	#1	#2	#3	#4	#5										
形態															
作業部高さ	13.0mm	2.0mm	0.5mm	2.2mm	2.8mm										
作業部直径	Ø=4.1mm	Ø=11.5mm	Ø=19.0mm	Ø=26.0mm	Ø=17.0mm										
種類	ブルー	ピンク	グレー	ブルー	ピンク	グレー	ブルー	ピンク	グレー	ブルー	ピンク	グレー	ブルー	ピンク	グレー
	コース (粗目)	ミディアム (中目)	ファイン (細目)	コース (粗目)	ミディアム (中目)	ファイン (細目)	コース (粗目)	ミディアム (中目)	ファイン (細目)	コース (粗目)	ミディアム (中目)	ファイン (細目)	コース (粗目)	ミディアム (中目)	ファイン (細目)
標準価格	¥1,200/本			¥1,200/本			¥2,300/本			¥5,900/本			¥3,400/枚		

ポイントに含有されたダイヤモンド粒子により、高い研磨力を発揮。
コースで形態修正後、ミディアム→ファインの3ステップで仕上げが可能。
ダイヤラスターを後工程で使用すれば、よりいっそう艶やかに仕上げることが出来ます。

種類	#1・#2・#3・#4・#5	コース・ミディアム・ファイン
最大回転数	12,000rpm: #1・#2・#3 10,000rpm: #4・#5	

ラジアル・ブリッスルディスク

ハイブリッド硬質レジンの研磨をスピーディに!!

一般医療機器	歯科用ゴム製研磨材	医療機器届出番号 23B1X10001C09063	用途: ハイブリッド硬質レジンの研磨			
ホワイト (#120)	レッド (#220)	ブルー (#400)				
荒研磨用	中研磨用	仕上げ用				

ハイブリッド硬質レジンの研磨に効果を発揮。
補綴物の形状に沿い易く、良好な研磨性を有します。
ホワイト→レッド→ブルーの3ステップで研磨後、ダイヤラスターを
後工程で使用すれば、良好な艶出しを実現することが出来ます。
※マンドレルは付いておりません。別途ご購入下さい。

数枚重ねて
使用する事が
出来ます。

最大回転数	30,000rpm
サイズ	直径: 19.1mm
種類	ホワイト・レッド・ブルー
包装単位	12枚入/パック 標準価格 ¥2,300

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~ (お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております)

www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は...



製造販売元
山八歯材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL (0533) 57-7121 FAX (0533) 57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp