

歯科切削加工用レジン材料

レジンブロック

RESIN BLOCK

CAD/CAM切削加工機「DWX-4」専用
暫間クラウン・暫間ブリッジ製作用のPMMA(アクリル樹脂)ブロック



包装単位 5個/箱 標準価格 ¥10,000(税抜)

管理医療機器 医療機器認証番号:226AFBZX00056000



製造販売元


山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1


用途	暫間クラウン・暫間ブリッジの製作
サイズ	76×40×20mm
色調	A1・A2・A3
材質	PMMA(アクリル樹脂)

関連商品

DWX-4

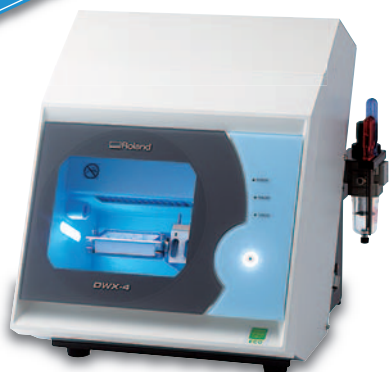

■ 製造販売元
ローランド ディー.ジー.株式会社
静岡県浜松市北区新都田1-1-3

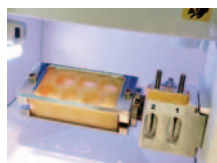

一般医療機器

医療機器届出番号
22B3X10006000050

歯科用CAD/CAMマシン DWX-4
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

DWX-4は、シンプルなワンボタン操作に同時4軸制御を備え、高度な加工をフルオートでこなします。

さらに、ATC(自動刃物交換装置)も標準搭載しており、2本の刃を使い分けることによって荒削りから仕上げ加工までを効率的に行います。

ツール収容本数	2本
電源条件	AC100V 50/60Hz
消費電力	約70W
外形寸法	幅:340×奥行:365×高さ:405mm
重量	22kg



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

歯科用研削器材

山ハCAD/CAMミリングバー


一般医療機器 医療機器届出番号:23B1X10001C09067

CAD/CAMによる 切削加工用のミリングバー

- 一般的なコーティング(チタンコーティング)と比べ
耐久性が約2倍のDLCコートと約10倍のダイヤコートの2種類をラインナップ!!
- ラジラスを併用することにより
加工効率がアップ!!




耐久性は一般的コーティングと比べ
DLCコート…約2倍 ダイヤコート…約10倍

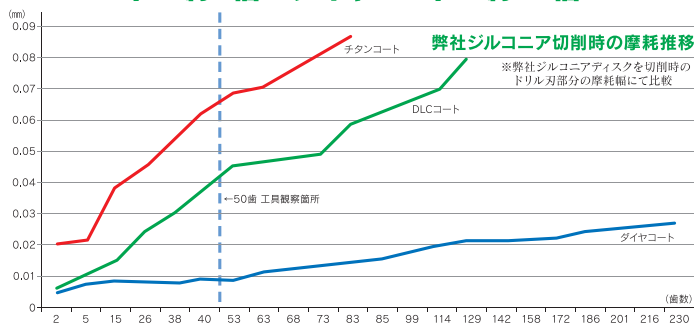


DLCコートタイプ



ダイヤコートタイプ

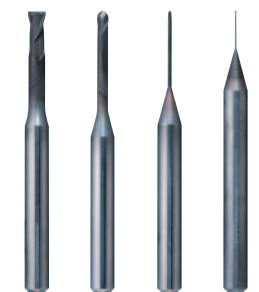

ラジラス使用により、
加工効率アップ

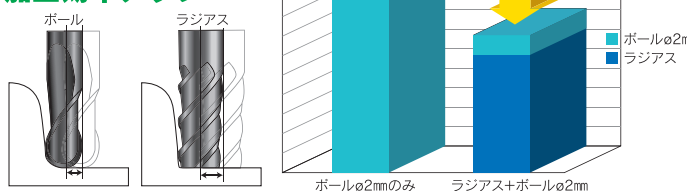

ラジラスを使用することにより、切削面積を広くとることができ加工効率がアップ。
ラジラスとボールφ2mmの併用で、ボールφ2mm単独使用時と比べ、加工時間が30%短縮。

種類	刃形状	標準価格 1本/ケース	首下 長(mm)	シャンク 径(mm)	全長 (mm)
DLC ラジラス	ラジラス	7,500円	16	4	45
DLC φ2mm	ボール		16		
DLC φ0.8mm			12		
DLC φ0.4mm			6		

種類	刃形状	標準価格 1本/ケース	首下 長(mm)	シャンク 径(mm)	全長 (mm)
ダイヤ ラジラス	ラジラス	15,000円	16	4	45
ダイヤ φ2mm	ボール		16		
ダイヤ φ0.8mm			12		
ダイヤ φ0.4mm			6		

関連商品

山ハオープンCAD/CAMシステム

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

CADシステム(スキャナー+CADソフト)



7シリーズ
23B3X10013000003
3シリーズ
23B3X10013000001




(7シリーズ / 3シリーズ):Dental Wings

■ 製造販売元 株式会社データ・デザイン
名古屋市中区錦3-4-6 桜通大津第一生命ビルディング12F

CAMシステム(加工機+CAMソフト)

worknc Dental 歯科用CAD/CAMマシン

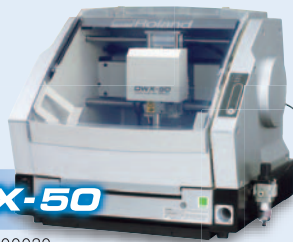

DWX-50

22B3X10006000020

CAMソフトウェア(worknc Dental):Sescoi
デンタル用切削加工機(DWX-50)

■ 製造販売元 ローランド ディー・ジー株式会社 静岡県浜松市北区新都田1-1-3



DWX-4

22B3X10006000050

CAMソフトウェア(worknc Dental):Sescoi
デンタル用切削加工機(DWX-4)

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

山ハ歯材最新情報はホームページで… ~健康は歯から~(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております) www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は…



製造販売元
山ハ歯材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp