

歯科用キャスティングワックス

ワックスブロック α

WAX BLOCK α

CAD/CAMによる切削加工用のワックスブロック



包装単位 5個/箱 標準価格 ¥6,000(税抜)

一般医療機器 医療機器届出番号:23B1X10001C07019

■ マージンワックスとの馴染みがよく、再調整がしやすい。



■ ヒートショック(急速加熱)での使用が可能です。

ワックスパターンの間隔を2mm以上空けて
植立して下さい。

■ ディスクの余剰部分を用いた盛りたしができます！

■ 焼却後の残渣がほとんどありません。

用途

クラウン・ブリッジ・フレーム
ワーク用のろう型の製作

サイズ

76×40×20mm

色調

グレー

使用埋没材

リン酸塩系・クリストバライト系

歯科用キャスティングワックス

WAX BLOCK ワックスブロック

ワックスブロックα(グレー)と比べ、
高い強度を有します。

包装単位 5個/箱 標準価格 ¥6,000(税抜)

一般医療機器 医療機器届出番号:23B1X10001C07018

用途

クラウン・ブリッジ・フレームワーク用のろう型の製作

サイズ

76×40×20mm

色調

グリーン

使用埋没材

リン酸塩系・クリストバライト系

※クリストバライト系埋没材をご使用の場合は、急速加熱は避けてください。



山ハCAD/CAM ミリングバー適応システム

CAMソフト:worknc Dental

■ 発売元 株式会社データ・デザイン
名古屋市中区錦3-4-6 桜通大津第一生命ビルディング12F

加工機:DWX-50/DWX-4

■ 製造販売元 ローランド ディー・ジー株式会社
〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-1-3

CAMソフト



worknc
Dental

切削加工機

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット



DWX-50

医療機器届出番号22B3X10006000020

歯科用CAD/CAMマシン



DWX-4

医療機器届出番号22B3X10006000050



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

歯科切削加工用レジン材料


RESIN BLOCK

レジンブロック

CAD/CAM切削加工機「DWX-4」専用
暫間クラウン・暫間ブリッジ製作用の
PMMA(アクリル樹脂)ブロック

包装単位 5個/箱
標準価格 ¥10,000(税抜)

管理医療機器 医療機器認証番号:226AFBZX00056000

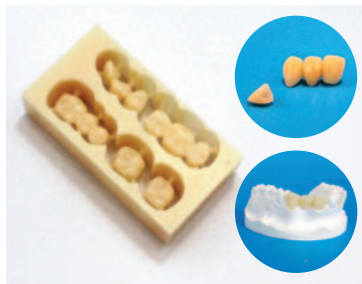

用途

暫間クラウン・暫間ブリッジの製作

サイズ

76×40×20mm

色調

A1・A2・A3

材質

PMMA(アクリル樹脂)

歯科用研削器材

山ハCAD/CAMミリングバー


一般医療機器 医療機器届出番号:23B1X10001C09067

CAD/CAMによる 切削加工用のミリングバー


- 一般的なコーティング(チタンコーティング)と比べ
耐久性が約2倍のDLCコートと約10倍のダイヤコートの
2種類をラインナップ!!
- ラジスを併用することにより
加工効率がアップ!!




耐久性は一般的コーティングと比べ
DLCコート…約2倍 ダイヤコート…約10倍

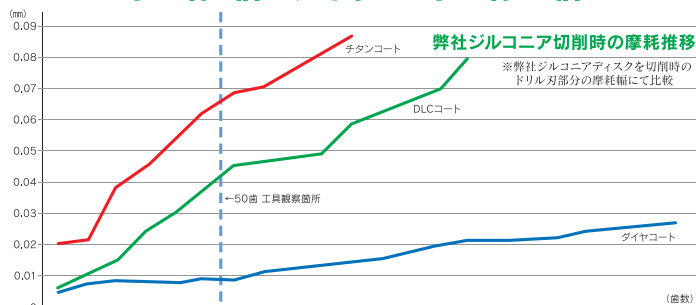


DLCコートタイプ

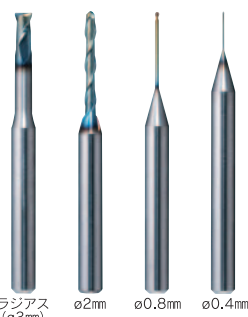

ダイヤコートタイプ

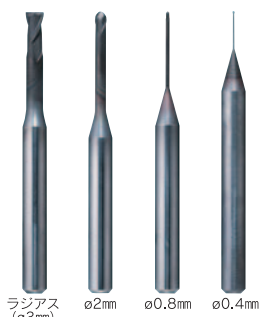

ラジス使用により、
加工効率アップ

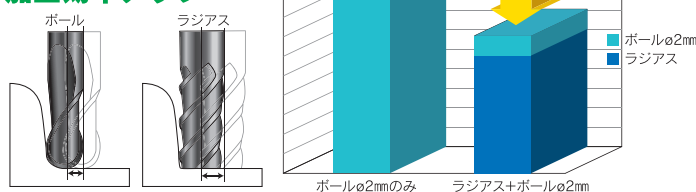

ラジスを使用することにより、切削面積を広くとることができ加工効率がアップ。
ラジスとボールφ2mmの併用で、ボールφ2mm単独使用時と比べ、加工時間が30%短縮。

種 類	刃形状	標準価格 1本／ケース	首下 長(mm)	シャンク 径(mm)	全長 (mm)
DLC ラジアス	ラジアス	7,500円	16	4	45
DLC ø2mm	ボール		16		
DLC ø0.8mm			12		
DLC ø0.4mm			6		

種 類	刃形状	標準価格 1本/ケース	首下 長(mm)	シャンク 径(mm)	全長 (mm)
ダイヤ ラジラス	ラジラス	15,000円	16	4	45
ダイヤ ø2mm	ボール		16		
ダイヤ ø0.8mm			12		
ダイヤ ø0.4mm			6		

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

山ハ歯材最新情報はホームページで… ～健康は歯から～(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております) www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は…



製造販売元
山ハ歯材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp