


咬合採得用付加型シリコーン印象材

GRAVITY BITE

グラビティバイト

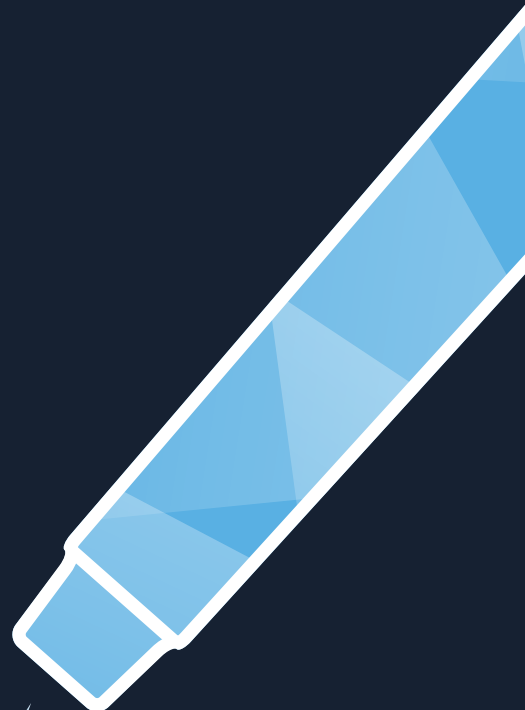

短時間で到達する最終硬度(シヨアA95)により
正確な咬合採得が可能に。
操作時間、口腔内保持時間、流動性ともに
バランスのとれたバイト材です。

 YAMAHACHI DENTAL MFG, CO.

GRAVITY
BITE

グラビティバイト

カートリッジ 50ml × 4



¥5,000

*ミキシングチップは既存のチップをご使用下さい。

咬合採得用付加型シリコン印象材

GRAVITY BITE

グラビティバイト

POINT 1


高いショアA硬度

短時間で急速に硬化する事により咬合位のずれを軽減し、高精度の咬合採得を可能にします。

ショアA硬度95まで到達し

トリミングのしやすさ、寸法安定性にも優れたバイト材です。

時間対硬化グラフ

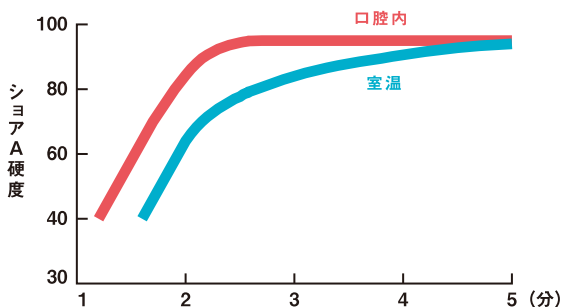

※「口腔内」のデータは37℃の板上で測定、咬合時は上下から37℃の熱が加わるため、実際はもう少し速く固まります。

※「室温」のデータは23℃環境で測定しております。

POINT 2

適度な作業時間

操作余裕時間45秒、口腔内保持45秒と

患者様にとっても術者様にとっても

丁度良いワークタイムを目指しました。

また、操作性の良い流動性を有し、

スムーズな押し出しを可能にします。



※使用イメージ

POINT 3

コスト低減

カートリッジのみ4本入で販売する事により

低コストを実現しました。

***ミキシングチップは既存のチップをご使用下さい。**



テクニカルデータ (社内実測値含む)

操作余裕時間	45秒	細線再現性	20μm
口腔内保持時間	45秒	弾性ひずみ	0.8%
ショアA硬度	95	色調	スカイブルー
寸法変化	-0.04%		



歯科咬合採得用材料 一般医療機器 医療機器届出番号 23B1X10001C06007

咬合採得用付加型シリコン印象材

GRAVITY BITE グラビティバイト

容量 カートリッジ50ml × 4

標準価格 **¥5,000**

お問い合わせ・ご用命は



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp