

CAD/CAM冠用材料
KZR-CAD HR ブロック

KZR-CAD HR ブロック

for PLANMECA



製品や模型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。製品の仕様、外観や容量などは予告なく変更する場合があります。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

本社：〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町3番7号
TEL. 06-6761-4739(代) FAX. 06-6761-4743
東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・高知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

● 製品に関するお問い合わせはこちら
テクニカルサポート
(9:00~17:00) サンキュー ヨクツク
0120-39-4929

お取扱店



前歯部の美しさと白歯にわたる色調整合性、それが「KZR-CAD HR ブロックシリーズ」



KZR-CAD HR ブロックシリーズ 5つの特長

-  **高強度/高耐久性**
-  **破折/破壊強さ**
破折/破壊試験実施済み
-  **耐摩耗性**
対合歯摩耗試験実施済み
-  **耐着色性**
コーヒー着色試験実施済み
-  **長期的なフッ素徐放性**

前歯部・小白歯・大白歯にわたる色調整合性

臨床では口腔内で複数のCAD/CAM冠治療をおこなうケースも生じます。「KZR-CAD HR ブロックシリーズ」は、前歯部用・小白歯用・大白歯用いずれも同じ色調コンセプトのため、併用する際、同じ感覚で色調を選択することができます。

製品についての
詳しい情報は
こちらから



シリーズカタログ

KZR-CAD HR 2 BG

CAD/CAM冠用材料 (II) 材料点数: 254点




保険適用 KZR-CAD HR ブロック2 BG

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
 認証番号: 302AABZX00039000 CAD/CAM冠用材料 (II)

KZR-CAD HR 3 GAMMATHETA

CAD/CAM冠用材料 (III) 材料点数: 442点

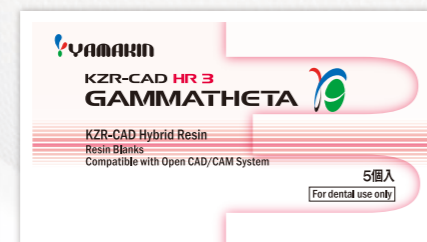

保険適用 KZR-CAD HR ブロック3 ガンマシート

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
 認証番号: 229AABZX00114000 CAD/CAM冠用材料 (III)

KZR-CAD HR 4 E-VA

CAD/CAM冠用材料 (IV) 材料点数: 576点



保険適用 KZR-CAD HR ブロック4 イーバ

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
 認証番号: 302AABZX00064000 CAD/CAM冠用材料 (IV)

色調

小白歯 単色		A1	A2	A3	A3-LT	A3.5	A4			
HR2 BG										
大白歯 単色			A2	A3		A3.5				
HR3 ガンマシート										
前歯 グラデーション	A0-GR	A1-GR	A2-GR	A3-GR		A3.5-GR	A4-GR	B2-GR	C2-GR	D2-GR
HR4 イーバ										

LTは、光の透過を抑え金属支台歯色の遮蔽性を高めた色調です。

KZR-CAD HR ブロックシリーズ

保険適用

小白歯 CAD/CAM冠用材料

II

材料点数 254点



KZR-CAD HR 2 BG

KZR-CAD HR ブロック 2 BG

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
認証番号: 302AABZX00039000 CAD/CAM冠用材料(II)

無機質フィラー含有率 (wt%)	3点曲げ強さ ^{※1} (MPa) ^{※2}	ビッカース硬さ ^{※1} (HVO.2) ^{※3}	吸水量 ^{※1} (μg/mm ³) ^{※2}	溶解量 ^{※1} (μg/mm ³) ^{※2}	
72	200	80	25	0.4	
フッ素徐放性	X線造影性	蛍光性	色調	トレーサビリティシール	ブロックへのロット番号印字
有	有	有	単色	KZR-CAD HR ブロック 2 BG CAD/CAM冠用材料(II) 管理医療機器 株式会社 ヤマキン 01234567 A3/S	有

色調	入数	サイズ		
		S	M	L
A2	5個	11,550円	12,150円	12,850円
A3				
A3.5				
A1				
A3-LT				
A4				

大白歯 CAD/CAM冠用材料

III

材料点数 442点



KZR-CAD HR 3 GAMMATHETA

KZR-CAD HR ブロック 3 ガンマシート

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
認証番号: 229AABZX00114000 CAD/CAM冠用材料(III)

無機質フィラー含有率 (wt%)	3点曲げ強さ ^{※1} (MPa) ^{※2}	ビッカース硬さ ^{※1} (HVO.2) ^{※3}	吸水量 ^{※1} (μg/mm ³) ^{※2}	溶解量 ^{※1} (μg/mm ³) ^{※2}	
75	270	85	17	0.1	
フッ素徐放性	X線造影性	蛍光性	色調	トレーサビリティシール	ブロックへのロット番号印字
有	有	有	単色	KZR-CAD HR ブロック 3 ガンマシート CAD/CAM冠用材料(III) 管理医療機器 株式会社 ヤマキン 01234567 A3/M	有

「KZR-CAD HR ブロック 3 ガンマシート」(CAD/CAM冠用材料(III))を小白歯に対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料(II) [254点]により算定します。

色調	入数	サイズ	
		M	L
A2	5個	20,100円	20,750円
A3			
A3.5			

前歯 CAD/CAM冠用材料

IV

材料点数 576点



KZR-CAD HR 4 E-VA

KZR-CAD HR ブロック 4 イーバ

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
認証番号: 302AABZX00064000 CAD/CAM冠用材料(IV)

無機質フィラー含有率 (wt%)	3点曲げ強さ ^{※1} (MPa) ^{※2}	ビッカース硬さ ^{※1} (HVO.2) ^{※3}	吸水量 ^{※1} (μg/mm ³) ^{※2}	溶解量 ^{※1} (μg/mm ³) ^{※2}	
72	200	80	25	0.4	
フッ素徐放性	X線造影性	蛍光性	色調	トレーサビリティシール	ブロックへのロット番号印字
有	有	有	GR CREATION	KZR-CAD HR ブロック 4 イーバ CAD/CAM冠用材料(IV) 管理医療機器 株式会社 ヤマキン 01234567 A3-GR/LS	有
フィラーサイズ			積層構造		
5μm以下			切縁部色、歯頸部色、移行色の複層構造		

色調	入数	サイズ	色調	入数	サイズ
		LS			LS
A1-GR	5個	23,250円	A0-GR	1個	4,650円
A2-GR					
A3-GR					
A3.5-GR					
A4-GR					



練和不要のCAD/CAM冠専用光重合型レジンセメント

KZR-CAD マリモセメント LC

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント(光重合型)
 認証番号: 302AABZX0007000

CAD/CAM冠専用レジンセメント



単品包装

KZR-CAD マリモセメントLC (2mL (2.7g))
 2,800円

パック

2本パック KZR-CAD マリモセメントLC
 ・KZR-CAD マリモセメントLC (2mL (2.7g)) × 2本
 4,000円

スターターパック KZR-CAD マリモセメントLC
 ・KZR-CAD マリモセメントLC (2mL (2.7g))
 ・TMR-アクアボンド0-n (5mL)
 ・マルチプライマーリキッド (7mL)
 16,200円

特設サイト
 コチラから



色調: 1色 (オベーク)
 歯科用合着・接着材料 I レジン系 標準型
 装着材料料 1.7点



満足に行く仕上がりをもっと手軽に

Nu:leコート
 (ヌールコート)

管理医療機器 歯科表面清沢硬化材 (高分子系歯冠用着色材料、歯科レジン用接着材料)
 認証番号: 303AABZX00051000



単品包装

Nu:leコート リキッド クリアー (6mL)
 3,000円

Nu:leコート リキッド (4mL) 全10色
 各4,200円

(ホワイト、グレー、ブラウン、イエロー、オレンジ、
 ブルー、Aプラス、Bプラス、Cプラス、Dプラス)

特設サイト
 コチラから



水を味方につけたゼロ砂ボンディング

TMR-アクアボンド 0-n

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 (歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、歯科用シーリング・コーティング材) 認証番号: 303AABZX00049000



単品包装

TMR-アクアボンド0-n (5mL)
 9,800円

セット包装

TMR-アクアボンド0-nセット
 ・TMR-アクアボンド0-n (5mL)
 ・ディスプレイアプリークーターブラシ 50本
 ・ディスプレイ採取皿 25枚
 10,500円

パック

2本パック TMR-アクアボンド0-n
 ・TMR-アクアボンド0-n (5mL) × 2本
 18,620円

単品

ディスプレイアプリークーターブラシ 50本 600円
 ディスプレイ採取皿 50枚 800円

特設サイト
 コチラから



マルチに使えるエッチャント&クリーナー

マルチエッチャント

管理医療機器 歯科用エッチング材 (歯科セラミックス用接着材料)
 認証番号: 228AABZX00136000



単品包装

マルチエッチャント (2mL)
 付属品: ニードルチップマルチエッチャント用5本
 2,000円

単品

ニードルチップ マルチエッチャント用 10本
 300円

*M-TEG-PIはYAMAKIN株式会社の登録商標です。

装着のポイント

試適

- ① アルミナサンドブラストによる内面洗浄**
 試適後は唾液や血液中のたんぱく質の除去のため、約50μmのアルミナ粒子を用い、0.2~0.3MPaの圧力で十分にサンドブラスト処理します。チェアサイド用のサンドブラスターが無ければ、エッチング材により洗浄、水洗、乾燥をおこないます。
- ② 表面処理**
 CAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック対応の表面処理剤を塗布し、乾燥させます。
- ③ 支台歯処理**
 使用するレジンセメントの電子添文に記載されている使用方法に従い、支台歯を洗浄し、表面処理します。
- ④ レジンセメント塗布**
 適法に従い、クラウン内面にCAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック対応のレジンセメントを塗布します。
- ⑤ 圧接・重合**
 適法に従い、圧接し仮重合したのち、余剰セメントを除去、十分に最終重合をします。



LINE公式アカウント
 はじめました



製品・キャンペーン情報をお知らせしています

タイムリーな情報は、
 Web マガジン
 「ヤマキンニュース」で
 お知らせします

情報発信サイト
YAMAKIN NEWS



<https://www.yamakin-gold.co.jp/yn/>

製品や模型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格(税抜き)です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

本社: 〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町3番7号
 TEL. 06-6761-4739(代) FAX. 06-6761-4743
 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・高知
 生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

● 製品に関するお問い合わせはこちら

テクニカルサポート

(9:00~17:00) サンキュー ヨクツク
 0120-39-4929

お取扱店