

審美的義歯用ポリエステル樹脂

エステショット ブライト



- 色調 #0(クリア) クリアピンク
#1R(リアルピンク) [繊維入り]
#8(ライプピンク) [繊維入り]
- 包装 各1kg
患者カード50枚入
- 標準価格 #0、クリアピンク 各26,000円
#1R、#8 各28,000円
- 販売名: エステショット ブライト
- 一般的名称: 義歯床用熱可塑性レジン
- 分類: 管理医療機器
- 医療機器認証番号: 223AFBZX00104000
- 製造販売元: 株式会社 ニッシン
京都府亀岡市旭町樋ノ口88


経済的

必要な時に、必要な量だけ!

使いたい分だけ計量して使えるので、1袋で複数のノンクラスプデンチャーが製作できます。

エステショットブライトはコストメリットのある義歯床用材料です。

エステショット ブライトをお試しいただけるお得なトライアルセット


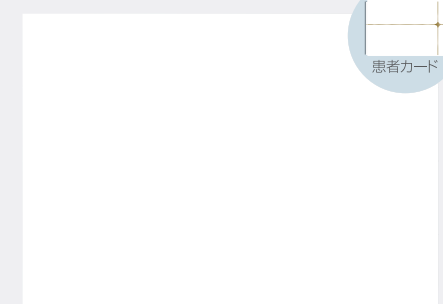


エステショット ブライト トライアルセット

- 標準価格 18,000円
- 構成品
 - ・#0(クリア) ----- 150g
 - ・クリアピンク ----- 150g
 - ・#1R(リアルピンク) [繊維入り] ----- 150g
 - ・#8(ライプピンク) [繊維入り] ----- 150g
 - ・患者カード ----- 25枚

ノンクラスプデンチャーを患者さんにアピールできる便利な院内ツール

- ノンクラスプデンチャー リーフレット 20枚入 600円
- ノンクラスプデンチャー ポスター 1枚入 500円
5枚入 1500円

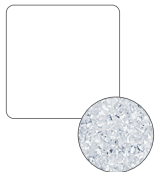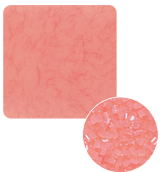色 調			
#0(クリア)	クリアピンク	#1R(リアルピンク) [繊維入り]	#8(ライプピンク) [繊維入り]
			

関 連 製 品

ながく美しく、そして強く。 高品質の義歯製作へ



- 審美的義歯用ポリエステル樹脂
エステショット
- 色調 #0(クリア) クリアピンク
#1R(リアルピンク) [繊維入り]
#8(ライプピンク) [繊維入り]
 - 包装 各1kg
患者カード50枚入
 - 標準価格 各26,000円
 - 販売名: エステショット
 - 一般的名称: 義歯床用熱可塑性レジン
 - 分類: 管理医療機器
 - 医療機器認証番号: 220AFBZX00122000
 - 製造販売元: 株式会社 ニッシン
京都府亀岡市旭町樋ノ口88

射出成型材料(熱可塑性樹脂)と石こうとの分離材に



- 光重合型レジン分離材
プラスタースムーズ
- 標準価格 5,000円
 - 構成品
 - ・プラスタースムーズ ----- 1本 (50mL)
 - ・平筆 ----- 1本
 - ・取扱説明書 ----- 1枚

●カタログに記載の商品及び色見本などの色調は、印刷のため実物とは異なります。 ●仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
●価格は、2012年1月21日現在のものです。標準価格に消費税は含まれておりません。 ●ご使用に際しましては、添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。

販売元

株式会社アイキャスト

〒604-0847
京都市中京区烏丸通り二条下る秋野々町513番地
京都第一生命泉屋ビル8階
TEL 075-257-7270 FAX 075-257-7271

www.i-cast.jp

EstheShot Polyester for Esthetic Denture Base *Bright*


審美的義歯用ポリエステル樹脂

エステショット ブライト

「エステショット ブライト」で
ノンクラスプデンチャーが進化する



エステショット ブライトは
「つよさ」と「しなやかさ」をあわせ持った
新しいポリエステル樹脂の熱可塑性レジンです。

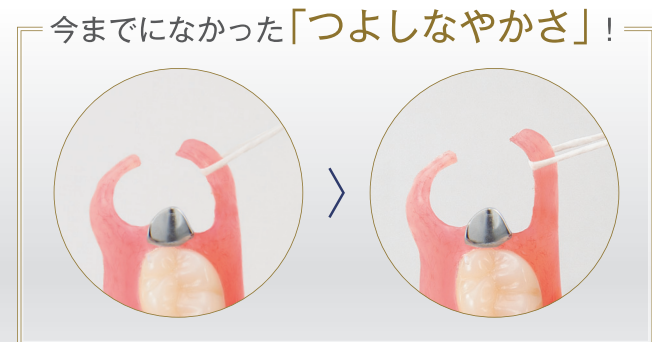



エステショット ブライト 4つの特性

耐衝撃性

つよさ × しなやかさ = つよしなやか

Toughness
Flexible

エステショットブライトは、やわらか過ぎず、適度なしなやかさを有しています。また、今までのポリエステル樹脂にはなかった耐衝撃性も持ち合わせています。

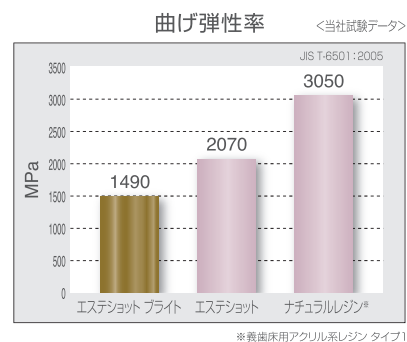
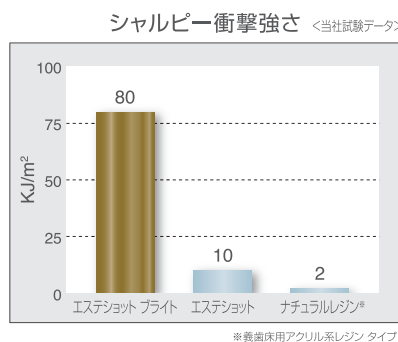


安全性

吸水量・残留モノマー・溶出物を低減

Safety

変色や臭いの原因となる吸水性に配慮し、低吸水性を実現しました。長期間美しさを保つことができます。また、残留モノマー等の溶出物を可能な限り低減することで、患者さんへの安全性を考慮した生体にやさしい材料です。

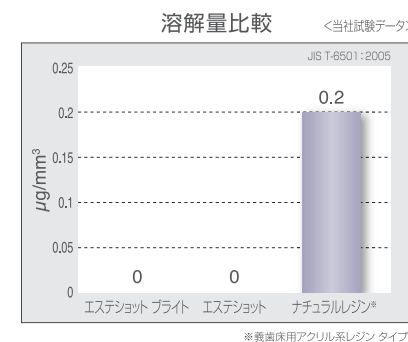
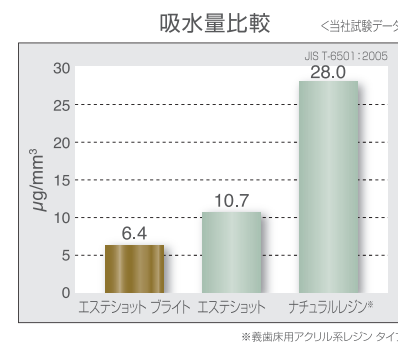


操作性

チェアタイムも考慮した使いやすさ

Functionality

研磨性が良いので、作業時間が短縮できます。また、常温重合型レジンとの接着が良好で、チェアサイドでリライニングや補修が簡単に行え、補修後は目立ちにくく美しく仕上がります。そのため、患者さんに長く安心して使い続けていただくことができます。

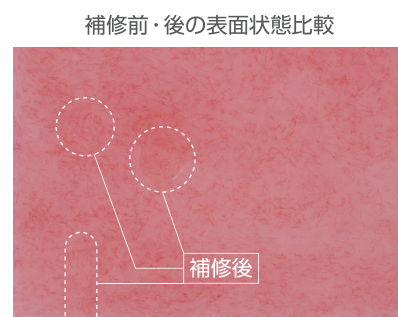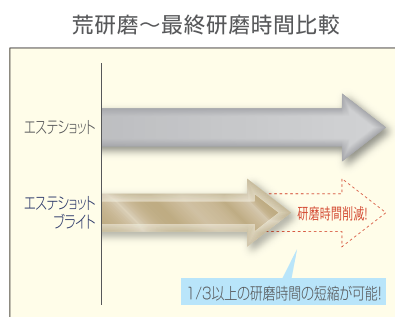

審美性

メタル製クラスプを使用しない自然な美しさ

Esthetic

「つよしなやか」な性質を持つエステショットブライトは、メタル製クラスプを使用せずに、自然で美しい義歯製作が可能です。見た目を気にされる患者さんの審美的要求に応えることができます。



エステショット ブライトの
技工操作ステップ

乾燥



エステショットブライトのペレットを70℃で24時間以上 もしくは90℃で4時間以上乾燥器内にて乾燥させます。

溶融



MIS-II溶解炉でアルミケースを使用した場合、280℃で20～30分溶解させます。

ショット



プランジャーダイヤルをDOWN側に回し、エステショットブライトを成型します。

研磨



形態修正をおこない、エステションを用いて最終研磨をおこないます。

完成



完成した義歯です。