



**ZOOM!**<sup>®</sup>  
*Advanced Power*<sup>™</sup>

ズーム ホワイトニング システム

時間経過が一目でわかるタイマーランプをヘッドに搭載。

フレキシブルに稼働するヘッドとバランスアームにより細かな位置調整が可能です。

光を外部に逃がさないICコーラーを採用しています。

照射例



操作性に優れたコントロールスイッチと一目でわかる自己診断機能が付いた本体モジュール。

アクセサリー(別売)



IC付ライトガイド(2個セット)



ガイダンスシステム




リトラクター



保護メガネ

ズームディスプレイ(別売)

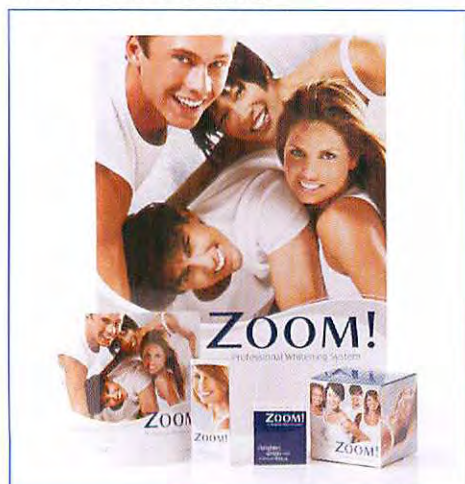



世界で60,000台以上の販売実績\*がある最も新しいズームホワイトニングシステム。  
25Wのメタルハライドバルブの採用によりチェアタイムも大幅に短縮され、  
歯科医院や患者にとって負担がさらに軽減されました。

コストパフォーマンスにも優れ、オフィスホワイトニングがもっと身近になりました。

\*2009年DISUCUSの調査による




#### 本体モニター

- 自己診断機能  
照射回数や残時間などを表示します。問題発生時にはモニター表示されます。
- 簡単操作  
本体には、主電源スイッチとスタートボタン、一時停止ボタン、終了ボタンの3つで面倒な操作は全くありません。



#### バルブ 一体型照射ヘッド

- タイマーランプ  
離れた場所からでも経過時間を確認できるタイマーランプを搭載。
- 光源低下通知ランプ  
メタルハライドバルブの光量低下をお知らせするランプを標準搭載。
- IC付ライトガイド  
ライトガイド装着により光を外に逃がさないため効率的な照射が可能です。

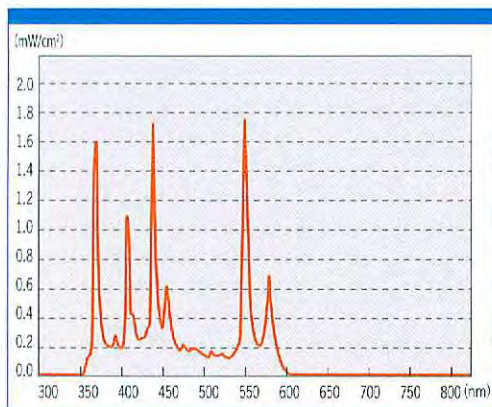

#### 照射光の波長

- 複数の波長域に波長ピークを有しています。
- 光相対強度(最大)1.7mWを発生します。

#### ●仕様

外形寸法：幅110cm(最大)×奥行70cm×高さ162cm

重量：11kg

電源電圧：AC100V 50/60Hz

光源：メタルハライド25W

定格入力電力：3A

[一般名称] 歯面漂白用加熱装置

[販売名] ズームホワイトニングシステム

一般医療機器 特定保守管理医療機器

医療機器製造販売届出番号 27B2X00229ZM0013



<http://www.sciz.jp>