

見えない
リスクから守る！

NEW DENTISTAR ニューシールド SHIELD

紫外線殺菌灯保管庫



手を触れずに「光センサースイッチ」で
電動開閉します


デンティストア

検索

<http://www.e-teck.co.jp>

動画でご確認ください。


付属品

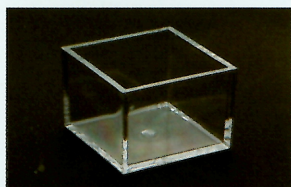

ワッテガーゼボックス



ハンドピースボックス

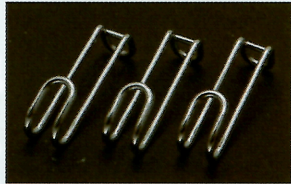

ハンドピースハンガー




専用ACアダプター



専用ステンレストレー

飛散する粉塵や唾液から、消毒・滅菌した器具を患者さんへ使う直前まで守ることができます。

チェアテーブルだけではなく、キャビネットの上や受付など、場所を選ばずお使いいただけます。

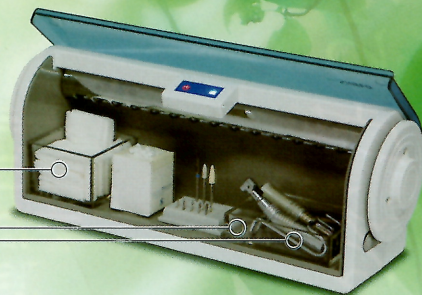

仕様

品目	紫外線殺菌灯保管庫
品名	ニューシールド
殺菌方式	紫外線殺菌灯による除菌
殺菌時間	約5分間(カバー開閉または、1時間ごとに反復)
使用電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	14W(殺菌灯単体の場合7.9W)
外形サイズ	横幅389.0×高さ150.8×奥行126.7 (mm)
内径サイズ	横幅321.0×高さ75.0×奥行85.0 (mm)
本体重量	1.37kg
付属品	ワッテガーゼボックス・ハンドピースボックス・ハンドピースハンガー・専用ACアダプター・専用ステンレストレー

光センサーで
ノータッチ操作

しっかり除菌し
院内感染予防に

姉妹品

高温オイル消毒器 デンティストアーIIエコ



DENTISTAR II eco

ハンドピースやバーなどの小器具を110℃の専用オイルでしっかり殺菌・洗浄・注油します。

約30%節電(当社比)

詳しくは、カタログをご請求ください

注記

- ・商品写真は印刷のため、実際の色とは若干異なる場合があります。
- ・SHIELDの保障期間は、お買い上げより1年間です。
- ・紫外線殺菌灯は機能維持のため、1年に1度は交換してください。
- ・紫外線を浴びて劣化する恐れのある器具は使用しないでください。
- ・付属品は、予告なく変更される場合があります。

発売元 **株式会社 E・テック**

医療機器開発研究所

〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島9丁目1番地

神戸医療産業都市内KIO 316号室

TEL 078-335-5425 FAX 078-335-5426

本社 〒654-0151 神戸市須磨区北落合3-28-2

製造販売元 **株式会社 ビッグライン**

TEL 078-335-5241/FAX 078-335-5251

お問い合わせ