

SMART BURS[®] II

CONSERVATIVE DECAY REMOVAL INSTRUMENTS

スマートバー II



感染象牙質のみを除去する
低侵襲治療用
シリコーンバー

感染象牙質のみを除去する低侵襲治療用シリコンバー

● 感染象牙質のみを切削する、削り過ぎない切削力

特殊硬度のシリコンバーにより、C2における感染象牙質（軟化象牙質）のみを切削する為、健全な象牙質を最大限に保存した低侵襲治療が可能



● C2(象牙質う蝕)の治療時における露髄のリスクを回避

C2の治療時における感染象牙質除去の際、切削力の高いカーバイトバー等による削り過ぎ(露髄)リスクを無くした低侵襲治療が可能


● C2の治療における麻酔処置が不要

健全な象牙質を切削しない硬度の為、象牙細管の露出(痛みの発生源)が無く、C2治療における麻酔処置が不要

* う蝕の進行度合いによっては麻酔処置が必要になる場合があります。

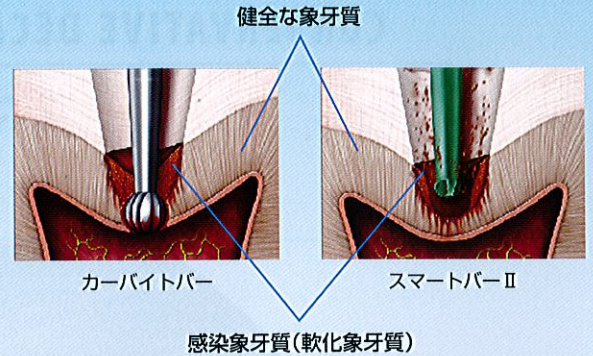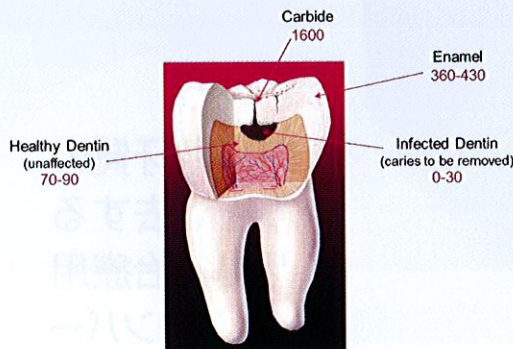

SEM画像
カーバイトバーによる切削面
象牙細管の露出あり
痛みの発生あり

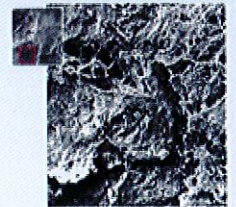

SEM画像
スマートバーIIによる切削面
象牙細管の露出なし
痛みの発生なし

| 材質 | ヌーブ硬さ |
|---------|-----------|
| カーバイト | 1600 |
| エナメル質 | 430 - 360 |
| 象牙質(健全) | 90 - 70 |
| 感染象牙質 | 30 - 0 |

【製品ラインナップ】

| 製品番号 | 製品名称 | 製品形状 | 包装形態 |
|--------|----------------|---------------------------------|-------|
| L01041 | スマートバーII RA #4 | | 各10本入 |
| L01042 | スマートバーII RA #6 | | |
| L01043 | スマートバーII RA #8 | | |
| 製品番号 | 製品名称 | 包装形態 | |
| L01044 | スマートバーII キット | 1キット(RA#4×5本、RA#6×10本、RA#8×10本) | |

販売名：S.S.ホワイトスマートバーII 製造販売届出番号：13B3X0013600013

有限会社 マルヤマ歯科商店

SmartPractice
株式会社スマートプラクティスジャパン

(製造販売元) 株式会社 新協
(総販売元) 株式会社スマートプラクティスジャパン

本社：〒227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-9-6
大阪営業所：〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-26 新大阪エヒロビル710
九州出張所：〒801-0826 福岡県北九州市門司区黒川東2-9-2 B101

TEL 045-972-9081 FAX 045-972-0739
TEL 06-6309-4000 FAX 06-6309-4002
TEL 093-341-0526 FAX 093-341-0527